

POWER FÜRS LABOR, ÄSTHETIK FÜR DIE PRAXIS!

KENTZLER
KASCHNER
DENTAL



POWER FOR LABORATORY,
AESTHETICS FOR DENTAL SURGERY!

KATALOG | CATALOGUE



Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur
Technology for dental perfection – inspired by nature

www.kkd-topdent.de



Kompetent • Kreativ • Dynamisch

Werte Kunden, Geschäftspartner und Freunde des Unternehmens Kentzler-Kaschner Dental

Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit für unser Unternehmen und unser aktuelles Produktsortiment nehmen und wünschen Ihnen viel Freude beim Durchblättern dieses Kataloges.

Seit 1967 ist das Unternehmen Kentzler-Kaschner Dental mit seinem Produktspektrum im Geschäftsbereich KKD® für den zahnärztlichen und im Geschäftsbereich TOPDENT für den zahntechnischen Bereich auf nationalem und internationalem Dentalmarkt tätig. Die über Jahrzehnte gewachsene Kompetenz und Erfahrung und die hohe Qualität unserer Produkte haben den Marken KKD® und TOPDENT ein hohes Ansehen beschert.

Dies ist uns Ansporn und Maßstab für die Zukunft!

Zusammen mit unseren Partnern in Wissenschaft und Forschung, Zahnarztpraxis und im Dentallabor, optimieren und entwickeln wir kontinuierlich unser Produktprogramm weiter. Wir konzentrieren uns dabei auf die Anwendungsbereiche, in denen wir Produkte mit echtem Mehrwert für den Anwender bieten können.

Mit den kontinuierlichen Schulungen unserer Mitarbeiter und den speziell auf die Verarbeitung unserer Produkte ausgerichteten „hands on“ Kursen für Kunden und Vertriebspartner in unserem Schulungslabor, sowie bei externen Vertriebsschulungen und Kursveranstaltungen bei unseren Vertriebspartnern im In- und Ausland, setzen wir die an uns selbst gerichteten Maßstäbe eines kompetenten, kreativen und dynamisch am Markt agierenden Unternehmens um.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Dear Customers, Partners and Friends of the Kentzler-Kaschner Dental company

We feel very pleased that you take some of your precious time for our company and our actual product range and hope that you enjoy reading our catalogue.

Since 1967 the Kentzler-Kaschner Dental company is working on the national and international dental market with its two product lines: KKD® for dentists and TOPDENT for dental technicians and laboratories.

Our experience and competence, acquired over decades, and the high quality of our products made of KKD® and TOPDENT well esteemed brands.

For us this is the incentive and standard for the future!

Together with our partners in science and research, dental cabinet and laboratory we continuously optimize and develop our product range. We concentrate our efforts on those scopes where we are able to offer real added value for end-users. With continuous trainings of our staff, as well as „hands-on“ courses for our customers and business partners – courses which are especially oriented on the special processing of our products taking place in our new training laboratory – and with our external courses and trainings at our business partners in Germany and abroad, we realize the self-determined standards of a competent, creative and dynamic company working on the dental market.

We thank you for your confidence and look forward to a good cooperation!

KAPITEL-ÜBERSICHT CHAPTER



Seite/ page

11 - 48

Rotierende Werkzeuge

Rotating Tools



49 - 62

Kunststoffprothetik und Metallverarbeitung

Resin prosthetics and Metal working



63 - 74

Modellherstellung

Model preparation



75 - 91

Modellierwerkstoffe, Modellierinstrumente
und Hilfsmittel

Modelling Materials, Modelling Instruments
& Auxiliaries



Alle Kapitel auch als PDF Dokumente erhältlich/
Chapters available as PDF Documents:

www.kkd-online.de

Kreativität &
Kompetenz für
die Praxis!
Creativity & expertise
for dental surgery!

REF M010502



TOPDENT
CERABRUSH

NEU
NEW



Seite/ page 83


UNSERE NEUESTEN
PRODUKTE FÜR DAS
DENTALLABOR



panther stone
panther edition

Distributed by
TOPDENT

Seite/ page 26, 27

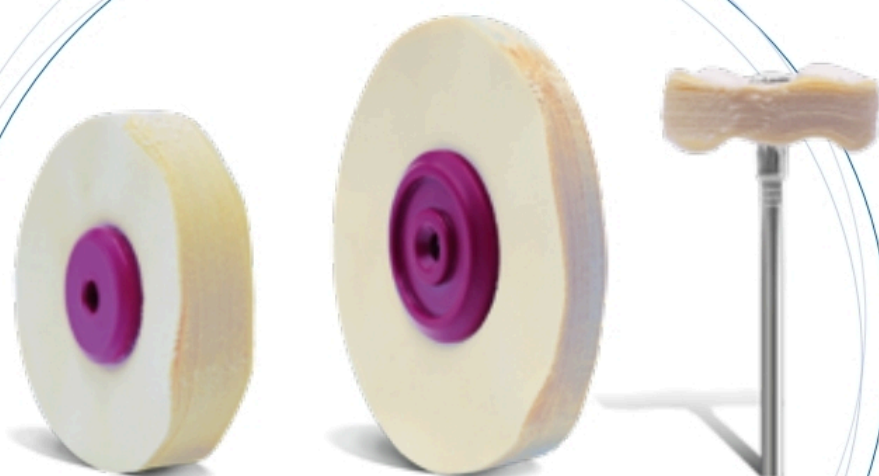

DELTAGLOSS

Seite/ page 38, 41

NEU
NEW



ORIGINAL
ROBINSON BÜRSTCHEN
BRUSHES

Seite/ page 36

OUR NOVELTIES
FOR THE DENTAL
LABORATORY



astron

CLEARsplint® Disc

Seite/ page 55

TOP**DENT**
MATRIX

NEU
NEW



Seite/ page 34

TOP**DENT**
TELESKOPZANGEN/
TELESCOPE PLIERS

Seite/ page 90



EN



A

Abdruck-Entspannungsmittel	73
Abrasive Cups	16
Abrasive Cup-Träger	16
Abriebstein / Abziehstein	25, 29
Achtspatel	81
Adapter für FG-Instrumente (Syndia®)	43
Additionsvernetzendes Knetsilikon	61
Aderer Zange	88
Alcontura-Schwabbel	38, 41
Alcohol Torch Brenner	79
Allround Abrasive Cups & Cup-Träger	16
Alu-Oxid-Schleifräder	24
Anmischbecher	56
Anmischspatel	72
ANTI-FOG Schutzbrillen	46, 47, 91
Antibeschlagsgel (Anti-Fog)	47
Antkoviak Wachsmesser	79
Articulation Plaster	65
astron® CLEARsplint® Discs	55
astron® CLEARsplint®	50-52
astron® CLEARsplint® Zubehör	56
astron® Spezialkunststoffe - MMA-frei	51
Aufbewahrungsboxen für Schienen	56
Aufbisssschienenmaterial	51-54
Aufbisssschienenreiniger	56
Aufwuchsbesteck	79
Augen- / Gesichtsschutz	46-48
Ausarbeitungssteine & Schleifräder	24, 26, 27
Ausbildungs-Set	86

B

B-20 Superbürste	40
BA 606 blaue Steine	24
BA 606 Co-Cr Trennscheiben	20
Basisplattenwachs	76
Baumwollschwabbel	38, 41
Bearbeitungssteine	24-26, 29
Biege- und Schneidezangen	88
Bimssteinpulver	44
Blanks	54, 55
Blaue Steine BA 606	24
Blue Action Ultraschall-Reiniger	60
BLUESTAR® Diamant-Polierpaste	44
Blue Trim	32
Böhme (nach), Teleskopzangen	90
Bohrerstände	45
Bonyhardklammern	77
Boxing Wachs	76
Breitbürste	39
Brennset	80
Brenngutträger /-halter /-watte	80
Bright Spot II TAUB	70
Brillen	46-48, 91
Buffalo Gipsmesser	72
Bügelbiegezange	88
Bürsten für das Handstück	35-37
Bürsten für den Poliermotor	39-40
BurShelter Bohrerstände	45

C

CAD/CAM-Spray	70
Cal Hartgips	65
Cali-Top Bürsten/ Cali-Top-S Bürsten	39
Calibris Bürsten Original	39
Carbid Fräser	15
CC-Turbo-Cut	21
CeraBrush	83
Ceramic End Brush	38
Chungking-Bürstchen /-Bürsten	35-37, 39, 40
CLEARsplint® Aufbisssschienenmaterial	50, 51
CLEARsplint® Interimsversorgung	52
Clearsplint® CAD/CAM Pro	54
CLEARsplint® Discs	55
CLEARsplint® Zubehör	56
Co-Cr Polierer	31
Co-Cr-Trennscheiben	20, 21
College Pinzetten	87
Composite Silikoninstrumente	83
Cone Pin Keramik-Brenn-Set	80
Contact Spray Ultra 2000	71
Contapol Polierstifte & Mandrelle	29, 43
Contour™ Powder Liquid Gold TAUB	74
CrownGrip Kronenhalter	89
CrownMaster Kronenhaltezege	89
Crown Kronenhalter	89
Cutoff Stahl-Trennscheiben	20
Cutoff Stahl-Schleifräder	24

Cyan-Acrylat Kleber	67
---------------------	----

D

Delfinzangen, diamantiert	90
DeltaGloss Polierschwabbeln	38, 41
Dentalgipse	64-66
DIA-BLUE-Polierer	25
Dia Cup Schleifkappe & Träger	16
Dia-Steine (Panther)	26
Diamond Flex	17
Diamant- & Separierscheiben	17-19
Diamantinstrumente für HP + FG	12, 13
Diamantpolierer für das Dentallabor	25, 27
Diamant Polierpaste	44
Diamantpoliersysteme	25-27
Discs, CLEARsplint®	55
Doppelseitige Trennscheiben	20
Dosierstäbe für Keramik	81
Drahtbiegezangen /-schneider	88
Dreikanfräser	14
DRYSEP Trennmittel	73
DuraClean² Aufbisssschienenreiniger	56
Drucktopf Polypot	59

E

Edelmetall-Polierpaste	44
Edelmetall-Trennscheibe	20, 21
EM-/Edelmetall-Polierer	30
Einstellgerät für SPLITFIX	69
Elastische Polierscheiben (Finisher)	31
EM-Cut Trennscheibe	21
Emetapol Polierer	30
Entspannungsmittel	73
Extradünne Trennscheiben	20

F

Fahnenstock Modelliermesser	78
Fastcut Rad/Fastcut Spitzen	24
FG-Adapter	43
Filz-Polierschwabbel, montiert	38
Filze/Filzkegel/ Filzrad	42
Filzlamellenpolierer	42
Finesil Silikon-Knetmasse	60
Finierscheiben (MOORE)	22, 23
Finisher – elastische Polierscheiben	31
Flachzange	88
Flanellpolierschwabbeln für HP	38
Flanellpolierad	41
Flanellpolierschwabbel für den Poliermotor	41
Flexible Diamantscheiben	17-19
Flexibles Aufbisssschienenmaterial	50-51
Flexiflex Diamantscheibe	18
Flipperzangen (nach Böhme)	90
Folienmesser /-scheren	86, 87
Fräsrohlinge	54, 55
Fräs- und Modellierwachs	76
Fransenschwabbel	41

G

Galvanische Diamantscheiben	17-19
Galvanische Sinterdiamantscheiben	17
Gesichtsschutz	48
Gießkunststoff	50-56
Gipse	64-66
Gipsfräser	14
Gips-Gips-Isoliermittel	73
Gips-Kunststoff-Isoliermittel	73
Gipsmesser /-schneidezange /-anmischspatel	72
Gipstrennscheiben	19
Gipsversiegelung	66
Glasfaserverstärkte Trennscheiben	21
Glastone	65
Glättungspinsel (Wachs)	77
Go-Cut Diamantscheibe	18
Gold-Trennscheiben	20
Gold- und Kronenscheren	86
Grundinstrumentarium im Etui	86
Gummipolierer	28-30
Gussringe/-einlage	62

H

Halteklammern	87
Haltestifte Zirkon	80
Handstück Polierschwabbeln	38
Härter für Silikonknetmassen	61
Hartmetalldrahtschneider	88

Hartmetallfräser	14, 15
Hartmetallscheren	86
Heatless Steine	24
Hi-Finish Emulsion I + II	44
High-Cut Turbo	21
High-Tech Gipstrennscheibe	19
Hilfsmittel für die Modellherstellung	72, 73
HM Stufenbohrer	67
Hitzelose Schleifsteine	24
Hitzeschutzpaste Metallex	62
Hochglanzpolierer	25-42
Hochglanzpolierpaste	44
Hochglanzpolierscheiben	29
Hypofix-Gamma Polierer	37

I

Illishaarpinsel	82
Imprägnierte Polierräder	32
Inlay Pin Pro	80
Instrumente und Pinsel im Etui	86
Interdental Gummipolierer	28
Interimsversorgungen	52, 53
Isoliermittel Gips-Gips	73
Isoliermittel Gips-Kunststoff	73
Isolierpinsel	83
Isolierspray	73
Iwanson Tasterzirkel	86

K

K&K (konvex-konkav) Trennscheiben	20
Karton Hochglanz-Polierscheiben	29
Kauflächenpolierer	25, 27-29, 33
Kera-Cut Trennscheibe	21
Kera-Polierer	30
Keramik Anmischbecher	56
Keramik-Dosierstäbe	81
Keramik-Brenn-Set	80
Keramikfaser-Stifte	38
Keramik-Modellierinstrumente	81
Keramik-Pinsel	82-84
Keramikpolierer	25, 27-30
Keramik-Trennscheibe	21
Kevlar-Polierer	33
KFO-Gipse	66
Klammerprofile	77
Klingen und Skapelle	87
Kochfeste Silikonknetmasse	61
Komposite-Modellierinstrumente	83
Kondensationsvernetzende Knetmasse	61
KonusPolierer	29
Kopf-Bürste	41
Kramponzange	88
Kreuzverzahnte Fräser	15
Kronen- und Goldscheren	86
Kronenhalter/ Kronenhaltezege	89
Kunststofffräser	14, 15
Kunststoff-Gips Isoliermittel	73
Kunststoff-Polierer	31, 32
Kunststoffpolierpaste	44
Kunststoffpoliersysteme	31, 32
Kunststoffprothetik & Metallverarbeitung	49-62
Kunststoffvergüteter Gips	64

L

Labtec Pro(Astron)	53
LabWax	76
Lamellenpolierer	42
LeCron Modellierinstrumente	78
Lederschwabbel HP	38
Leinenpolierschwabbel	41
Lessmann Modelliermesser	78
Lichthärtender Kunststoff (Löffel- & Basisplatten)	58
Lochretentionen	76
Lötmasse LM-36	62
Lötpinzetten	87
Lötschutzpaste	62
Longpins	25
Luxtray	58

M

Macro Fräser	14
Magnetständer	45
Magnum MOORPLASTIC Scheiben	22
Malfarbenpinsel	82
Mandrelle	16, 23, 29, 43
Matrix	34
Master Die	65

A		H	
Abrasive cups	16	Headbrush „Palatal Brush“	41
Abrasive discs (MOORE)	22, 23	Heatless Stones	24
Abrasive cup-mandrels	16	Hemostats	87
Abrasive stones, -wheels	24	Hi-Finish Emulsion I+II	44
Abrasive wheels	24	High gloss polishing paste	44
Accelerators for impression materials	61	High-Cut Turbo – separating discs	21
Accessories for metal working	62	High-speed separating discs	20
Acid tweezers	87	High-Tech – plaster separating disc	19
Acrylically modified plaster	64	Horse hair brushes	35, 37, 40
Adapter FG-HP (Syndia®)	43	Hypofix-Gamma polishers	37
Addition-curing kneading silicone	61		
Aderer pliers	88	I	
Agate spatula	81	Impregnated polishing discs	32
Alcontura buffing wheels	38, 41	Impression material	61
Alcohol Torch – hand burner	79	Inlay Pin Pro	80
Allround Abrasive Cups & Cup Mandrels	16	Instruments and Brushes in leather case	86
Alu-oxide abrasive wheels	24	Interdental Rubber Polishers	28
ANTI-FOG protection glasses	46, 47, 91	Isolating agent plaster/resin	73
Anti-fog Gel	47	Isolating agent plaster/plaster	73
Antkoviak wax knife	79	Isolating brush	83
Arch forming pliers	88	Isolating Spray	73
Articulation Plaster	65	Isolation	73
astron® accessories	56	Iwanson Calipers	86
astron® CLEARsplint®	50-52		
astron® CLEARsplint® Discs	55	K	
Auxiliaries for model preparation	72, 73	K&K separating discs	20
B		KERA polishers	30
B-20 Superbrush	40	Kera-Cut separating discs	21
BA 606 Co-Cr separating discs	20	Krampon pliers	88
BA 606 Blue Stones	24	Kneading silicone	61
Barrel-type-polishers mandrel	43		
Base plates, light curing	58	L	
Base plate wax	76	Labtec Pro (Astron)	53
Blades for foil knife	87	Laboratory pliers	88
Blanks for milling technique	54, 55	LabWax	76
BLUESTAR® Diamond polishing paste	44	Lamella felt polishers	42
Blue Action	60	LeCron - modelling instruments	78
Blue Stones BA 606	24	Lessmann - modelling knives	78
Blue Trim	32	Light-curing tray material	58
Böhme (type), telescope pliers	90	Linen buffing wheel	41
Boxing Wax	76	Liquid occlusion indicator	70
Brass Wire Brushes	36	Longpins	25
Bright Spot II TAUB	70	Luxtray	58
Broad Brush	39		
Brushes	82-84	M	
Buffalo plaster knives	72	Macro Cutter	14
Buffing wheels, mounted	38	Magnetic Bur Stand	45
Bur racks	45	Magnum MOORPLASTIC discs	22
C		Mandrels	16, 23, 29, 43
CAD/CAM-Spray	70	Mandrel for MOORE	23, 43
Cal Plaster	65	Materials and instruments for the ceramic- and acrylic veneer technique	80, 81
Cali-Top Brush	39	Matrix	34
Cali-Top-S Brush	39	Master Die	65
Calibris Brush Original	39	Meister Finish Ceramic End Brushes	38
Calipers	86	Mesh tray	80
Carbide Burs Piranha	15	Metall Caliper	86
Carbide cutters & special burs	14, 15	Metallex – protective paste for soldering	62
Carton High gloss polishing discs	29	Mezzo-Mezzo	61
Carving instrument	77	MICRO sintered diamond disc	19
Casting rings and -bases	62	Milling- and modelling wax	76
CC-Turbo-Cut – separating discs	21	Milling discs	54, 55
CeraBrushes	83	Mini-Flex	17
Ceramic brushes	82-84	Miniature brushes	35, 36
Ceramic dosing instrumentes	81	Mini goat hair brush	37, 40
Ceramic End Brush	38	MiniPli brushes	37
Ceramic fibres	38	MiniVlies brushes	37
Ceramic Firing Set	80	Mixing spatula	72
Ceramic mixing bowl	56	Model preparation	63-74
Ceramic polishers	27-30	Model systems	68, 69
Ceramic polishing paste	44	Model- & die preparation	74
Ceramic modelling instruments	81	Model-Casting separating discs	20, 21
Chamois Leather buffing wheel	41	Modelling Materials, Modelling Instruments & Auxiliaries	75-90
Chamois Leather buffing wheels for HP	38	Modelling waxes in plates	76
Chungking polishing brushes	35-37, 39, 40	MOORE discs (Snap-on-off system)	22, 23
Cleaning concentrates	60	Mounted buffing wheels	38
Clearsplint® CAD/CAM Pro	54	Multisystem rubber polishers	28
CLEARsplint® Discs	55	Muselin buffing wheels	38
CLEARsplint® interim restorations	52		
CLEARsplint® - splint material	50, 51		
CLEARsplint® storing boxes	56		
D		G	
DeltaGloss	38,40	Galvanic sintered diamond discs	17
Dental stones and plasters	64-66	Galvanically coated diamond discs	17-19
Dia Cup	16	Glasses for protection	46-48, 91
DIA-BLUE Polishers	25	Glass-fibre separating discs	21
Dia-Stones	26	Go-Cut	18
Diamond Flex	17	Goat hair brushes	35-37, 40
Diamond- & Separating discs	17-19	Gold separating discs	20
Diamond instruments for HP + FG	12, 13	Grinding stones	24, 26, 27
Diamond polishers for the dental laboratory	25, 27	Groove Bur	14
Diamond polishing paste	45		
Diamond polishing system for silicate ceramics	26, 27		
Diamond polishing systems for ceramics	25		
Die Spacer	74		
Discs (CLEARsplint®)	55		
Double cutting discs	20		
DRYSEP – separating agent	73		
DuraClean ² - cleaner	56		
E, F		H	
EM-Cut – separating discs	21	Headbrush „Palatal Brush“	41
Emetapol – polishers	30	Heatless Stones	24
End Brushes	35, 38	Hemostats	87
Eye and face protection	46-48, 91	Hi-Finish Emulsion I+II	44
Fahnenstock	78	High gloss polishing paste	44
Fast-Setting glues	67	High-Cut Turbo – separating discs	21
Fastcut Points and wheel	24	High-speed separating discs	20
Felt buffing wheels	38	High-Tech – plaster separating disc	19
Felt cones	42	Horse hair brushes	35, 37, 40
Felt polishers	38, 42	Hypofix-Gamma polishers	37
Felt wheel	42		
FG adapter	43		
FineSil	61		
Finisher	31		
Finishing discs (MOORE)	22, 23		
Firing supports	80		
Flannel buffing wheels	38, 41		
Flannel polishing disc	41		
Flat pliers	88		
Flexible Nightguard Material	50, 51		
Flexiflex	18		
Flipper – telescope pliers	90		
Foil knife	87		
Foil scissors	86		
G		I	
Galvanic sintered diamond discs	17	Impregnated polishing discs	32
Galvanically coated diamond discs	17-19	Impression material	61
Glasses for protection	46-48, 91	Inlay Pin Pro	80
Glass-fibre separating discs	21	Instruments and Brushes in leather case	86
Go-Cut	18	Interdental Rubber Polishers	28
Goat hair brushes	35-37, 40	Isolating agent plaster/resin	73
Gold separating discs	20	Isolating agent plaster/plaster	73
Grinding stones	24, 26, 27	Isolating brush	83
Groove Bur	14	Isolating Spray	73
		Isolation	73
		Iwanson Calipers	86
		K	
		K&K separating discs	20
		KERA polishers	30
		Kera-Cut separating discs	21
		Krampon pliers	88
		Kneading silicone	61
		L	
		Labtec Pro (Astron)	53
		Laboratory pliers	88
		LabWax	76
		Lamella felt polishers	42
		LeCron - modelling instruments	78
		Lessmann - modelling knives	78
		Light-curing tray material	58
		Linen buffing wheel	41
		Liquid occlusion indicator	70
		Longpins	25
		Luxtray	58
		M	
		Macro Cutter	14
		Magnetic Bur Stand	45
		Magnum MOORPLASTIC discs	22
		Mandrels	16, 23, 29, 43
		Mandrel for MOORE	23, 43
		Materials and instruments for the ceramic- and acrylic veneer technique	80, 81
		Matrix	34
		Master Die	65
		Meister Finish Ceramic End Brushes	38
		Mesh tray	80
		Metall Caliper	86
		Metallex – protective paste for soldering	62
		Mezzo-Mezzo	61
		MICRO sintered diamond disc	19
		Milling- and modelling wax	76
		Milling discs	54, 55
		Mini-Flex	17
		Miniature brushes	35, 36
		Mini goat hair brush	37, 40
		MiniPli brushes	37
		MiniVlies brushes	37
		Mixing spatula	72
		Model preparation	63-74
		Model systems	68, 69
		Model- & die preparation	74
		Model-Casting separating discs	20, 21
		Modelling Materials, Modelling Instruments & Auxiliaries	75-90
		Modelling waxes in plates	76
		MOORE discs (Snap-on-off system)	22, 23
		Mounted buffing wheels	38
		Multisystem rubber polishers	28
		Muselin buffing wheels	38

N	
N/EM-Cut – separating disc	21
Narrow brush	40
Natural stones	64-66
NEW STYLE protection glasses	46
NPM polishers	31
NPM polishing paste	44
NPM separating discs	20, 21
Nylon Brush	36

O	
Occlusal-surfaces polishers	25, 27-29, 33
Occlusion indicators & sprays	70, 71
OK-Bürste (UPPER JAW)	39
Okklamat	58
Opaque stick	81
Optipin TC-Bur	67
Optipin System	67
Orange Wheel	32
Original Buffalo knives	71
Original Robinson brushes	36

P	
Palatal Brush	41
Panther Stone diamond polishers	27
Panther Stone polishing stones	26, 27
Patient ID card	56
Perfocut	18
Perforated retainers	76
Pin system	67
Pink Wheel	32
Pins (Optipin)	67
Piranha Carbide Burs	15
PK Thomas Color – waxing-up instruments	79
Plaster Cutters	14
Plaster Cutting forceps	72
Plaster knives	72
Plaster sealing agent – Stoneseal	66
Plaster separating discs	19
Plaster-Cut / Plaster Cut Mini / Plaster Cut Maxi	19
Plasters	64-66
Plexoflex	18
Pliers shelf	90
PMMA Blanks	54
PM rubber polishers	30
PM separating discs	20, 21
Polecat brush	82
Polishers for ceramics	25, 27-30
Polishers for metals	28-30
Polishers for resins	31, 32
Polishing agents	44
Polishing brushes for HP	35-38
Polishing brushes for the polishing lathe	39, 40
Polishing brushes, -buffing wheels	35-41
Polishing buffing wheels for HP	35-38
Polishing buffing wheels for polishing lathe	41
Polishing paste	44
Polishing wheels, impregnated	32
Polymerisation pressure pot	59
Polypot - pressure pot	59
Powder Liquid Gold	74
Porcelain dosing instruments	81
PM polishers	30
PM polishing agent	44
PM separating discs	20, 21
precious metal polishing paste	44
Pressure pot	59
Protection glasses	46-48, 91
Pumice Powder	44

R	
Rapido-Cut	18
Realstone	65
Reference card (Astron)	56
Red Action	60
Red Marten/Kolinsky brushes	82-84
Release Spray – releasing agent for impressions	73
Relining Unit	58
Resin polishing paste	44
Resin polishing system	31, 32
Resin prosthetics & Metal working	49-62
Retention clasps	77
Retention grids	77

Ring clasps	77
Rivet wheels	43
Robinson Brushes	36
Rotating Tools	11-48
Rubber polishers	28-30

S	
Safety glasses	46-48, 91
Sandpaper mandrels	43
Satin-Roc	64
Scalpels, Scalpel-handle and Foil Knife	87
Screw-type mandrel	43
Scissors	86
Scotch brush for the lathe	39, 40
Scotch brush for HP	37
Separating agent plaster/plaster	73
Separating agent plaster/resin	73
Separating discs	20, 21
Separating discs with glass-fibre grids	21
Separator	73
Set for beginners	86
Shaping stone	25, 29
Shelf for Pliers	90
ShurWax	76
Sidia-Flex / Sidia-Mini-Flex	17
Silicone Brushes - composite modelling instruments	83
Silicone Isolating agent	73
Silimont polishers	32
Silver wire end brush	36
Sintered diamond discs	17, 19
Smoothing brush	77
Snap-On-Off mandrel	23, 43
Snap-On-Off System	22, 23
Snow White Stone	66
Soft-Leather brush	39
Soft-leather buffing wheels	41
Soldering support	80
Soldering tweezers	87
Special burs / TC-Burs	14, 15
Special Cutters	14, 15
Special Diamonds	12, 13
Special separating discs	20
SPLITFIX System	68, 69
Splint material	51-54
Steel polishers	29, 31
Steel separating discs	20, 21
SteWaFix BurShelter	45
Stones & plasters	64-66
Stoneseal	66
Storing box for splints	56
Study Model	85
Superflex Disc	20
SUPER-FLEX CLICK protection glasses	46
Super-Flexiflex	18
Super glue	67
Superbrush B-20	40
Surface indicator	74
SYNDIA® adapter	43
SYNDIA® VDS LONGLIFE Diamonds	12, 13
SyndiaFlex	17
Synthetic hair brushes	83, 84
Synthetic resin bonded trimmer	33

T	
TAUB Bright Spot II	70
TAUB Contour™ Powder Liquid Gold	74
TAUB Tru-Fit	74
TC-Bur Optipin	67
TC scissors	86
Telescope End Brushes	35, 38
Telescope Pliers type Böhme	90
Titanium polishing paste	44
Tooth sieve	60
topBraun polishers	28
TOPDENT Ceramic firing set	80
TOPDENT Isolating spray	73
topGrün polishers	28
Topliner	62
TopPol polishers	31
Totoflex	18
Transverse Cutters	15
Tritutter	14
Trimming Points	24
Tru-Fit TAUB	74
Tweezers (College)	87

Tweezers, scissors & laboratory instruments	86, 87
---	--------

U	
Ultra 2000 – occlusion spray	71
Universal pliers	88
Universal polishers	28, 33
Universal polishers UPOFIX	33
Universal polishing paste	44
Universal protection glasses	47, 91
UPOFIX universal polishers	33
Upper Jaw brush	39
Utility Wax Strips	76

V	
Vaseline	79
VDS LONGLIFE Diamonds	12, 13
Veradur superhard plaster	64, 65

W	
Waldsachs pliers	88
Wax brush	77
Waxes	76, 77
Wax isolating liquid	78
Wax knives and Modelling instruments	77-79
Wax knife Antkoviak	79
Wax modelling instruments	78
Wax modelling knives	78
Wax patterns	77
Wax perforated retainers	77
Wax wire	76
Waxing-up instruments	79
Wire bending pliers	88
Wire Cutter	88

X, Y, Z	
x-thin separating discs	20
xx-thin separating discs	20
YellowSil – impression material	61
Zahle – modelling instruments	78
Zirconia Firing Supports	80
Zirconium polishing paste	44

Important note: Our shortened catalogue descriptions are intended for easy guidance. Products must always be used according to the manufacturer's instructions by qualified users.

Please note warnings. Always read the instruction manuals carefully before using the product so that you use it in a correct and safe way. The non-observance of instructions may cause risks for patients, users and third parties, such as injuries, material damages or other undesirable effects. Please contact our medical product consultant or the manufacturer directly, if you have any questions about the proper use of a product. Illustrations may be different, technical changes omitted.



TOPDENT BLUESTAR® Qualitäts-Siegel

Alle TOPDENT Produkte mit dem BLUESTAR® sind Qualitätsprodukte für den präzisionsbewussten Zahntechniker und haben produktspezifische Merkmale, die sich von handelsüblichen Standards deutlich abheben.

All TOPDENT products marked with the BLUESTAR® are quality products for the precision conscious technician and have product-specific characteristics which beat by far common standards.

Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur
Technology for dental perfection – inspired by nature

Spezialdiamanten	
Special Diamonds	12, 13
Hartmetall- & Spezialfräser	
Carbide cutters & Special burs	14, 15
Schleifkappen/ Abrasive cups	16
Diamant- & Separierscheiben	
Diamond- & separating discs	17-19
Trennscheiben	
Separating discs	20, 21
MOORE Schleif- & Finierscheiben	
MOORE Abrasive- & finishing discs	22, 23
Ausarbeitungssteine & Schleifräder	
Abrasive stones, -wheels	24, 26
Diamantpolierer für das Dentallabor	
Diamond Polishers for the dental laboratory	25, 27
Panther Poliersystem	
Polishing system	26, 27
Polierer/ Polishers	28-33
Polierbürsten & Schwabbeln	
Polishing brushes & Buffing wheels	34-41
Polierfilze/ Felt polishers	42
Nieträder & Mandrelle	
Rivet wheels & Mandrels	43
Poliermittel/ Polishing agents	44
Bohrerstände	
Bur racks	45
Schutzbrillen	
Safety glasses	46, 47, 48

Spezialdiamanten | Special Diamonds

TOPDENT Syndia® VDS LONGLIFE

Extrem hohe Dichte und ein stark minimierter Bindemittelanteil setzen bei den im Vakuum-Diffusions-Schweißverfahren hergestellten Diamanten neue Maßstäbe für Qualität und Standzeit.

Vorteile

- extrem hohe Standzeit
- exzellente Laufruhe
- gleichmäßiges Schleifbild und effizienter Abtrag
- hervorragend auch für Linkshänder geeignet
- porenarmer und fugenfreier Schleifkörper
- für alle gängigen Werkstoffarten im Labor geeignet, auch für Zirkon

Spezialformen

- für die Ausarbeitung von Aufbisschienen und Teleskopkronen
- für die Verwendung in Turbinen (FG)

These diamonds – produced by the vacuum-diffusion welding method – with their high density and extremely minimized binder content, raise the bar concerning Quality and Durability.

Advantages

- extremely long durability
- extraordinary smooth running
- uniform and efficient removal
- best suited for left-handed persons
- homogenous surface, seamless
- appropriate for all current materials used in laboratories, even for zirconia

Special forms

- for the finishing of splints, nightguards and telescope crowns
- for the use in turbines (FG)



Handstück/ HP

Ø 2,35 mm Schaft/ shank

30.000-40.000 min⁻¹



30.000-40.000 min⁻¹



30.000-40.000 min⁻¹



30.000-40.000 min⁻¹



30.000-40.000 min⁻¹



30.000-40.000 min⁻¹



22.000-30.000 min⁻¹



30.000-40.000 min⁻¹



30.000-40.000 min⁻¹



30.000-40.000 min⁻¹



5.000-11.000 min⁻¹




30.000-40.000 min⁻¹



Sonderformen/ Special forms

30.000-40.000 min⁻¹

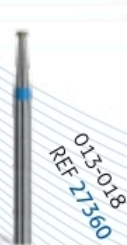

30.000-40.000 min⁻¹



22.000-30.000 min⁻¹



30.000-40.000 min⁻¹




5.000-11.000 min⁻¹



5.000-11.000 min⁻¹



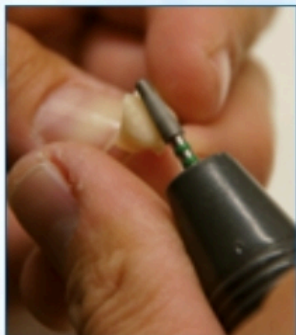

Vergleich der verschiedenen Herstellungsarten von Diamantschleifkörpern Comparison of different manufacturing processes of diamond tools



Galvanik-Verfahren
Galvanic




Sinter-Verfahren
Sinter



VakuumpDiffusionsSchweißverfahren
Vacuum-Diffusion Welding

(VDS)

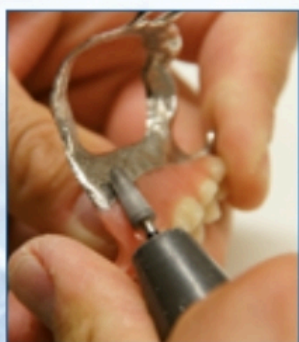

Farbkodierungen/ Colour-codings

- 315 - 400µ - super coarse
- 160 - 200µ - coarse
- 125 - 159µ - coarse
- 100 - 124µ - medium
- 63 - 80µ - fine
- 50 - 63µ - super fine

VDS:
Bis zu 66%
Diamantenanteil!
Up to 66% parts
of diamonds!

TOPDENT Syndia® VDS LONGLIFE Spezial-Sortimente Special assortments



für EM/NEM/
Co-Cr
for PM/NPM/
Co-Cr

Inhalt/ content

- 303-112 ■■
- 200-048 ■■■
- 249-030 ■■
- 199-033 ■
- 499-018 ■
- 027-026 ■

REF 273705



für Kunststoff
& Composite
for acrylics &
composites

Inhalt/ content

- 200-048 ■■■
- 250-016 ■
- 249-030 ■■
- 199-033 ■■
- 119-018 ■
- 027-026 ■

REF 273725



für Keramik
for ceramics

Inhalt/ content

- 027-026 ■
- 199-025 ■
- 199-033 ■
- 249-030 ■■
- 199-033 ■■
- 277-018 ■

REF 273715

Turbine im Labor/ turbine in laboratory
Ø 1,60 mm Schaft/ shank
für Keramik/ for ceramics



199-025
REF 27391



237-015
REF 27392



249-030
REF 27393



277-018
REF 27394



298-018
REF 27395



304-070
REF 27396

Sortiment/ assortment

Inhalt/ content

- 199-025 ■
- 237-015 ■
- 277-018 ■
- 298-018 ■
- 304-070 ■

REF 273905



Nur mit Wasserkühlung zu verwenden!
Only use with water cooling!

Hartmetallfräser | Carbide Cutters

Spitzenqualität „Made in Germany“. Mit Farbringen für optimale Effizienz. Schaft ist aus Sicherheitsgründen und zur Erhöhung der Rundlaufgenauigkeit im HM-Kopf eingelötet. Lange Lebensdauer und guter Abtrag auch bei intensivem und längerem Einsatz durch innovative Schneidegeometrie.

Top quality „made in Germany“. Colour-coded rings on the shank for optimal efficiency. Soldered shank for increased safety and increased concentricity. Long-lasting and best abrasion even during long and intensive use due to innovative cutting edge geometry.


Gipsfräser Turbo/ Plaster Cutter Turbo Kreuzverzahnung SUPERGROB/ cross cut, super coarse

Fräser für großflächiges Abtragen von Gips sowie von Kunststoffen und zum Einsatz bei der Bearbeitung von Löffelmaterialien aus Kunststoff.
Cutter for extensive abrasion of plasters, as well as resins, also appropriated for acrylic tray materials.
Schaft/ shank 2,35 mm
○ 15.000 – max. 25.000 min⁻¹
1 St./ pc.



Fräser Macro/ Cutter Macro Kreuzverzahnung GROB/ cross cut, coarse

Fräser zur Grobabtragung von harten Kunststoffen, auch für Löffelmaterialien geeignet, sowie für die Co-Cr-Bearbeitung.
For rough abrasion of hard acrylics, also suited for tray materials, as well as for chrome-cobalt.
Schaft/ shank 2,35 mm
○ 15.000 – max. 30.000 min⁻¹
1 St./ pc.

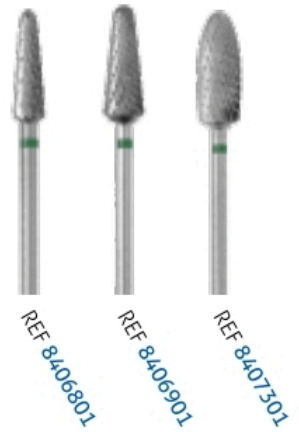

Spezialfräser | Special burs

TOPDENT Spezialfräser/ Special Cutter Einfachverzahnung MITTEL (Spezialfräser für Kunststoff) simple cut, medium (special bur for acrylics)

Dieser Fräser ermöglicht ein glattes Schliffbild auf Kunststoffen und reduziert so die Nacharbeit.
Leaving a smooth surface on acrylics. This reduces rework.
Schaft/ shank 2,35 mm
○ 15.000 – max. 30.000 min⁻¹ 1 St./ pc.

REF 15500



TD Rillenfräser/ Groove Bur

Zum Aufrauen von Kunststoffzähnen und Prothesen bestens geeignet.
For roughen acrylic teeth and dentures.
Schaft/ shank 2,35 mm
○ 5.000 – max. 15.000 min⁻¹ 1 St./ pc.

REF 30048



Tricutter SUPERGROB (Stichfräse) super coarse

Dreikantfräser zum schmierfreien Schneiden von Tiefziehfolien und Kunststoff.
Three-edged cutter for smearfree cutting of thermoplastic foils and tray material.
Schaft/ shank 2,35 mm
○ 5.000 – max. 10.000 min⁻¹
1 St./ pc.



TOPDENT Syndia® VDS LONGLIFE

○ 30.000-
40.000 min⁻¹

○ 22.000-
30.000 min⁻¹

Speziell zum Heraustrennen von tiefgezogenen Aufbisschienen.
Schmierfrei, laufruhig.
Especially for splints. Does not smear, smooth running.

Schaft/ shank Ø 2,35 mm
1 St./ pc.




TOPDENT Spezialfräser für PEEK, PMMA & Nylon Special Cutters for PEEK, PMMA & Nylon

Kreuzverzahnung mit Querhieb/ cross cut, transverse

Die spezielle Verzahnung erlaubt bei leichtem Anpressdruck einen schnellen Materialabtrag mit scharfem Schnitt ohne Materialerhitzung. Es entsteht eine glatte Oberfläche, sodass diese anschließend leicht poliert werden kann. Geeignet zur schonenden Bearbeitung von PEEK, PMMA und Nylon etc., sowie aller thermoplastischen und weichbleibenden Kunststoffe. Die Fräser eignen sich zum Trennen der Haltestege, Verschleifen der Ansatzstellen der Haltestege, zur Korrektur von Unebenheiten in der Formgebung, als auch zur Ausarbeitung von Zahnfleischmasken. The special cut enables a fast material removal with sharp cut without heating the material. The result is a smooth surface on the material, which can then be easily polished. Suited for working on PEEK, PMMA and nylon etc., as well as for all thermoplastic and soft acrylics. Cutters are suited for separating retention bars, reducing their stubs, for adjusting uneven areas in the shape and also for gingival masks. Schaft/ shank 2,35 mm

- 1) max. 12.000 min⁻¹
- 2) max. 18.000 min⁻¹
- 3) max. 20.000 min⁻¹

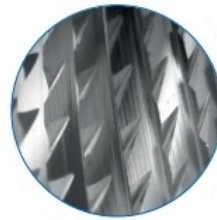

Kreuzverzahnung
mit Querhieb
Cross cut, transverse

1 St./ pc.



Profi-Set/ Profi-Set:

alle 8 Fräser
all 8 cutters

REF 20560S



Carbid Fräser Piranha/ Carbide Burs Piranha


Spezialfräser zur Vorbereitung von Unterfütterungen und Erweiterungen von weichen und harten Prothesenkunststoffen. Laufruhig, langlebig; erzeugen raue Oberflächen für optimale Retention.

Special burs for the preparation of relinings and dimensional changings of soft and hard denture resins. Well-balanced, long-lasting; produce a rough surface for optimal retention.

Schaft/ shank 2,35 mm

1 St./ pc.

1 St./ pc.

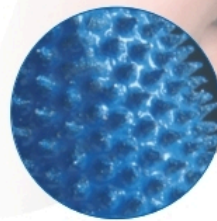

							
Form Shape	Kugel Ball	Torpedo Torpedo	Kegel spitz Taper	Zylinder flach Cylinder	Zylinder rund Ball Nose	Flamme Flame	Flamme lang Bud
REF	20544	20542	20546	20545	20543	20541	20547
Ø Kopf/ Head Dia.	8 mm	5 mm	10 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Kopflänge/ Head Length	8 mm	20 mm	16 mm	14 mm	16 mm	15 mm	19 mm
Gesamtlänge/ Overall Length	37 mm	51 mm	46 mm	44 mm	45 mm	44 mm	49 mm

Schleifkappen | Abrasive Cups



TOPDENT Dia Cup

Zum Beschleifen von Gips, Kunststoff und Metall geeignet.
For trimming plasters, resins and metals.

Ø 12,7 mm
Länge der Schleifkappe/ length of the cup: 16 mm
Gesamtlänge/ total length: 44 mm
Körnung fein/ grit fine
○ max. 20.000 min⁻¹

Schleifkappe mit Träger/ cup with mandrel REF **219705**

Schleifkappe einzeln/ cup REF **21971**

Träger einzeln/ mandrel REF **21972**
Schaft/ shank 2,35 mm



TOPDENT Allround Abrasive Cups & Cup-Träger/ cups & mandrels

Zum Beschleifen von Kunststoff und Gips.
For trimming acrylics and plaster.

Schaft/ shank 2,35 mm
○ max. 20.000 min⁻¹

ABRASIVE Cups, rund/ round

	80 µm – coarse		150 µm – medium	
	10 St./ pcs.	50 St./ pcs.	10 St./ pcs.	50 St./ pcs.
small Ø 7 mm, L 13 mm	25588	25538	25589	25539
medium Ø 10 mm, L 15 mm	25591	25541	25592	25542
big Ø 13 mm, L 19 mm	25594	25544	25595	25545



Schutzbrillen finden Sie ab Seite 46.
Safety glasses refer to page 46.

ABRASIVE Cup-Träger, 2,35 mm Mandrels, 2,35 mm

	St./ pc.
small, L 38 mm	25527
medium, L 40 mm	25529
big, L 44 mm	25531



Diamant- & Separierscheiben | Diamond- & Separating discs

TOPDENT DIAMOND FLEX

Textiles Trägermaterial mit einseitig aufgetragenen Diamantfeldern auf der Scheibe (bei der Verwendung dem Mandrellschaft zugewandt aufbringen). Hochflexibel – für gute Anpassung der Scheiben an die Werkstücke. In 3 Körnungen für verschiedene Anwendungsgebiete, z.B. zur Bearbeitung von Kronenrändern, Strukturierung von Keramik- und Kunststoffverblendungen, Angleichung der Übergänge von Metall zur Verblendung und für feine, finale Korrekturen.

Textile carrier material with one-sided diamond coating (during use place the diamond-coated side towards the shank). High flexibility of the discs enables a perfect adaptation to workpieces. Available in three grains for different scopes, e.g. processing of crown margins, structuring of ceramic- and acrylic veneers, levelling of transitions from metal to veneer and for final fine corrections.

Ø 19 mm

Stärke ca. 0,6 mm/ thickness approx. 0.6 mm

○ max. 15.000 min⁻¹

Pck. mit 6 Stück/ Pkg. with 6 pcs.

grob, schwarz/ coarse, black

REF 17851

mittel, rot/ medium, red

REF 17852

fein, gelb/ fine, yellow

REF 17853



Sortiment mit je 2 St. grob, mittel, fein

assortment with 2 pcs./ea. coarse, medium, fine

REF 17856S

Farbkodierungen/ Colour-codings



superfein/ super fine

SyndiaFlex




superfein/ super fine

- hochflexible, superdünne (0,14 mm) Diamantseparierscheibe mit beidseitigem synthetischem Diamantbelag für die Keramik- und Compositebearbeitung
- enorme Schneide- und Schleifleistung auch auf der Peripherie mit minimalstem Materialverlust
- hohe thermische Belastbarkeit, lange Lebensdauer
- high flexible, x-thin (0.14 mm) diamond separating disc with double-sided synthetic diamond coating for ceramics and composites
- enormous cutting- and grinding performance also on the periphery with minimum material loss
- high thermic resilience, long-lasting

Schaft/ shank 2,35 mm

○ 5.000 – 20.000 min⁻¹

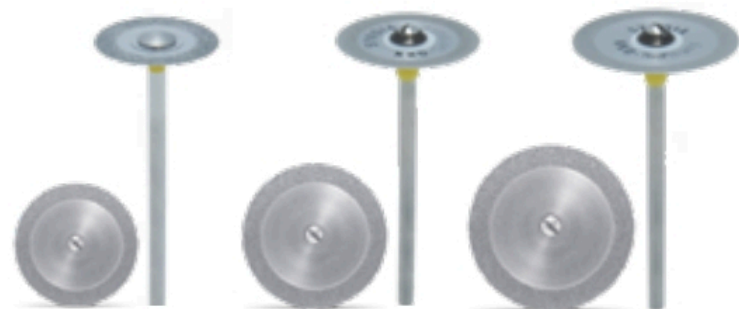

16 x 0,14 mm
REF 10058

19 x 0,14 mm
REF 10055

22 x 0,14 mm
REF 10052

Galvanische Sinterdiamantscheiben/ Galvanic sintered diamond discs




superfein/ super fine

Rand volldiamantiert und flexibel. Zum Trennen und Separieren von Keramik und NEM-Legierungen.

With a complete diamond edge. For separating ceramics and NPM-alloys.

Schaft/ shank 2,35 mm

○ 5.000 – 10.000 min⁻¹

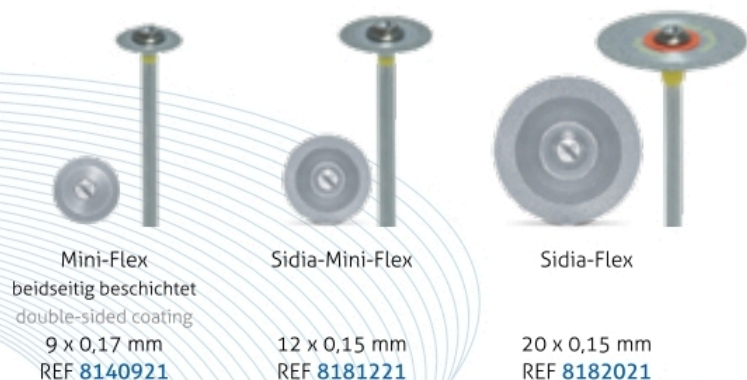

Mini-Flex
beidseitig beschichtet
double-sided coating
9 x 0,17 mm
REF 8140921

Sidia-Mini-Flex
12 x 0,15 mm
REF 8181221

Sidia-Flex
20 x 0,15 mm
REF 8182021

Plexoflex ●

Beidseitig beschichtet; für Keramik und Verblendkunststoffe.
Double-sided coating; for ceramics and acrylic veneers.

○ 3.000 – 5.000 min⁻¹



22 x 0,17 mm REF 8162221
22 x 0,22 mm REF 8192221

Perfocut ●

Beidseitig beschichtet; für Gips, Keramik, Kunststoffe und extra-harte Verblendkunststoffe.

Double-sided coating; for plaster models, ceramics and extra-hard acrylic veneers.

○ 3.000 – 5.000 min⁻¹



21 x 0,17 mm REF 8272121
21 x 0,22 mm REF 8272125

Super-Flexiflex ●

Beidseitig beschichtet für Keramik und Komposite.

Double-sided coating; for ceramics and composites.

○ 5.000 – 10.000 min⁻¹



19 x 0,17 mm REF 8121921

Go-Cut ●

Zum Separieren von Keramik, Kunststoffen, Gips.

For separating ceramics, acrylics and plaster.

○ 5.000 – 10.000 min⁻¹



18 x 0,3 mm REF 8131622

Rapido-Cut ●

Zum Separieren von Kunststoffen in der Totalprothetik, Tiefzieh-technik und Gips.

For separating plasters and acrylics in the complete prothetics and coping forming technique.

○ 3.000 – 5.000 min⁻¹




18 x 0,25 mm REF 8131822

Totoflex ●

Beidseitig beschichtet für Keramik und Komposite.

Double-sided coating for ceramics and composites.

○ 5.000 – 10.000 min⁻¹

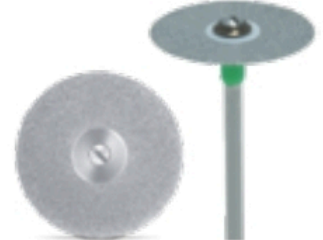


22 x 0,19 mm REF 8112231
22 x 0,30 mm REF 8112241

Flexiflex ●

Beidseitig beschichtet für Keramik und Komposite.

Double-sided coating; for ceramics and composites.

○ 5.000 – 10.000 min⁻¹

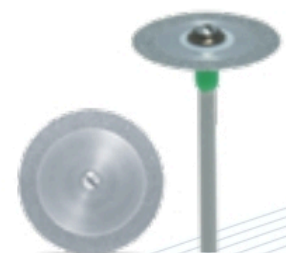

19 x 0,19 mm REF 8111921

Farbkodierungen
Colour-codings

● grob
coarse

● fein
fine

Sinterdiamantscheiben – montiert | Sintered diamond discs – mounted

Vorteile von Sinterdiamantscheiben

- aus einem Diamant-/Metallgemisch
- hochtemperaturgesintert
- höhere Standzeit als beschichtete Scheiben

advantages of sintered diamond discs

- made of a diamond-/metal mix
- high temperature sintered
- increased longevity compared to coated discs

MICRO – montiert/ mounted

für Interdentalräume (Keramik, Co-Cr, NEM-Leg., Pd-Basis-Leg.)
For interproximal grinding (ceramics, Co-Cr, NPM- and PD-based-alloys).

Schaft/ shank 2,35 mm

○ 5.000 – 15.000 min⁻¹



16 x 0,25 mm
REF 8050265



22 x 0,3 mm
REF 8050154

Gipstrennscheiben – unmontiert | Plaster separating discs – unmounted

Diamantscheiben für Sägestümpfe zum Trennen von Zahnkränzen bei Gipsmodellen./ Diamond discs for separating plaster models.

Lieferung ohne
Mandrell/ without
mandrel



1 High-Tech

- Die Perforation sorgt für eine hohe Lauftransparenz, dies erleichtert die Separation
- die Perforation erhöht die Selbstreinigungseigenschaft, dadurch verschmieren die Scheiben nicht so schnell
- the perforation ensures more air transparency, this facilitates the separation
- the perforation increases the self-cleaning properties, therefore the disc doesn't smear up so fast

Lieferung mit Mandrell, unmontiert

with mandrel, unmounted

○ 5.000 – 10.000 min⁻¹

35 x 0,26 mm

REF 8153522



2 Plaster-Cut Mini

Lieferung mit Mandrell,
unmontiert/ with
mandrel, unmounted

○ 5.000 – 10.000 min⁻¹

32 x 0,28 mm

REF 8153222



3 Plaster-Cut Maxi

Lieferung mit Mandrell,
unmontiert/ with
mandrel, unmounted

○ 5.000 – 10.000 min⁻¹

40 x 0,28 mm

REF 8154022

4 Plaster-Cut


Galvanisch diamantierte Gipstrennscheibe zum Einsatz in der Modellsäge / Gipssäge.

Galvanically diamond coated plaster separating disc for the use in the model saw / plaster saw.

○ 3.000 – 5.000 min⁻¹

75 x 0,35 mm, 16 mm Bohrung/ drill-hole REF 1575162

75 x 0,35 mm, 20 mm Bohrung/ drill-hole REF 1575202

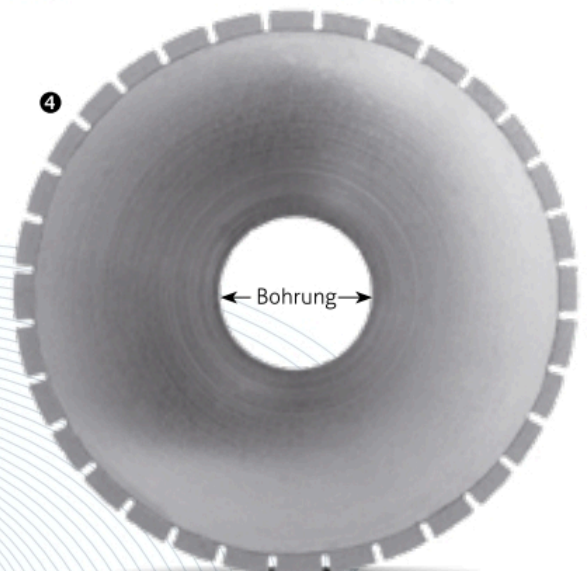



TOPDENT Spezialtrennscheiben – unmontiert: „Qualität, die überzeugt“
TOPDENT Special Separating Discs – unmounted: Top Quality

Die Klassiker!

TOPDENT Superflex Discs

Flexibel – für Keramik und Metall.
 Auch als Separierscheibe bestens geeignet./ Flexible – for ceramics and metals.

SiC
 25 St./ pcs. REF **21374**



22 x 0,13 mm

TOPDENT superdünne Trennscheiben/ xx-thin separating discs

Für Keramik, EM und NEM. Auch als Separierscheibe bestens geeignet./ For ceramics, PM and NPM.

SiC
 25 St./ pcs. REF **21367**
 100 St./ pcs. REF **21367B**



22 x 0,22 mm

TOPDENT Stahl-Trennscheiben Steel separating discs

Für Metall./ For metals.
 Al_2O_3

100 St./ pcs. REF **21361**



23 x 0,63 mm


TOPDENT K&K Trennscheiben K&K separating discs

Konvex-konkav für Metall und Keramik./ Convex-concave, for metals and ceramics.

SiC
 75 St./ pcs. REF **21364**



22 x 0,6 mm

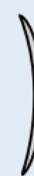

TOPDENT extradünne Trennscheiben/ x-thin separating discs

Für Keramik und Metall. Auch als Separierscheibe bestens geeignet./ For ceramics and metals.

SiC
 25 St./ pcs. REF **21370**
 100 St./ pcs. REF **21370B**



22 x 0,38 mm

TOPDENT schnellschleifende Trennscheiben/ High-speed separating discs

Für Metall, auch für Keramik.
 For metals, also for ceramics.

SiC
 100 St./ pcs. REF **21358**



23 x 0,63 mm

TOPDENT doppelseitige Trennscheiben/ Double cutting discs

Für EM und NEM, auch für Keramik./ For PM and NPM, also for ceramics.

SiC
 100 St./ pcs. REF **21373**



22 x 0,6 mm

TOPDENT Gold-Trennscheiben Gold separating discs

Zum Abtrennen von EM-Gusskanälen./ For cutting off PM-casting sprues.

Al_2O_3
 200 St./ pcs. REF **22720**




22 x 0,3 mm

TOPDENT cutoff Stahl-Trennscheiben/ cutoff Steel separating discs

Alu-Oxid/ Alu-Oxide
 100 St./ pcs.

32 x 1,6 mm REF **21376**
 38 x 1,0 mm REF **21379**
 38 x 0,6 mm REF **21382**

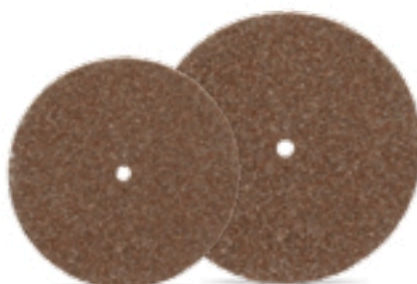

⌀ bis/ up to 25 mm Ø:
 30.000 min⁻¹

ab/ from 32 mm Ø on:
 15.000 min⁻¹


BA 606 Co-Cr-Trennscheiben/ BA 606 Co-Cr separating discs

100 St./ pcs.



22 x 0,6 mm REF **25009**
 Auch für Keramik!
 Also for ceramics!

22 x 0,25 mm REF **25019**
 25 x 0,7 mm REF **25010**
 35 x 0,7 mm REF **25011**
 35 x 1,0 mm REF **25012**
 35 x 1,7 mm REF **25013**
 37 x 0,7 mm REF **25014**
 40 x 1,0 mm REF **25015**

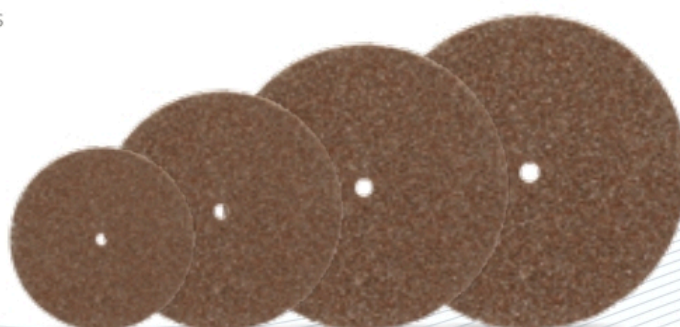

Glasfaserverstärkte Trennscheiben – unmontiert Separating discs with glass-fibre grids – unmounted

TOPDENT KERA-Cut

- für Keramik/ for ceramics
- mit Diamantkorn/ with diamond grain
- extrem hohe Schnitt- und Standzeit
extremely long-lasting with extraordinary cutting performance


10 St./ pcs. REF 22393
20 St./ pcs. REF 22393B
50 St./ pcs. REF 22393B50



20 x 0,2 mm
⌀ max. 20.000 min⁻¹



Langlebig und
bruchstabil!
Long-lasting and
break resistant!

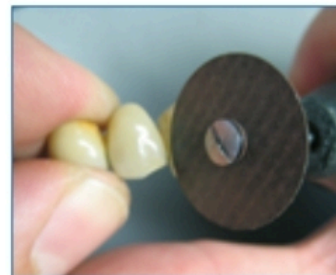

TOPDENT EM-Cut

- für Edelmetalle/ for precious metals
- extrem hohe Schnitt- und Standzeit
extremely long-lasting with extraordinary cutting performance

20 St./ pcs. REF 22392
100 St./ pcs. REF 22392B



22 x 0,2 mm
⌀ max. 48.000 min⁻¹




TOPDENT N/EM-Cut

- für EM, NEM und Co-Cr/ for PM, NPM and Co-Cr
- extrem hohe Schnitt- und Standzeit/ extremely long-lasting with extraordinary cutting performance

20 St./ pcs. REF 22394
100 St./ pcs. REF 22394B



22 x 0,3 mm
⌀ max. 48.000 min⁻¹

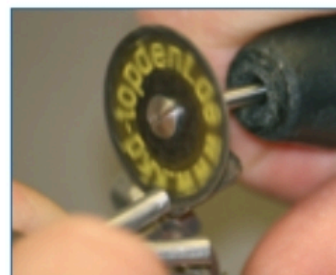

TOPDENT CC-Turbo-Cut

- für Co-Cr (Modellguss)/ for Co-Cr (model casting)
- zum Trennen und Verschleifen von Stahl in einem Arbeitsgang/ for separating and grinding of steel in one operation

31 x 1,0 mm 20 St./ pcs. REF 22397
31 x 1,0 mm 100 St./ pcs. REF 22397B

26 x 0,5 mm 20 St./ pcs. REF 22395
26 x 0,5 mm 100 St./ pcs. REF 22395B



31 x 1,0 mm
⌀ max. 48.000 min⁻¹



26 x 0,5 mm
⌀ max. 48.000 min⁻¹



TOPDENT High Cut Turbo

- dünne Trennscheibe für schnelles Separieren
- zum Trennen und Verschleifen in einem Arbeitsgang
- for separating and grinding in one operation
- thin disc for fast separating

40 x 1,0 mm 20 St./ pcs. REF 22398M
40 x 1,0 mm 100 St./ pcs. REF 22398MB

40 x 0,5 mm 20 St./ pcs. REF 22399
40 x 0,5 mm 100 St./ pcs. REF 22399B



40 x 1,0 mm
⌀ max. 15.000 min⁻¹



40 x 0,5 mm
⌀ max. 15.000 min⁻¹




MOORE

Schleif- & Finierscheiben | Abrasive- & finishing discs

Seit über 100 Jahren exklusive Qualität vom ältesten Hersteller von Schleifscheiben aus den USA. Vertriebspartnerschaft mit der Kentzler-Kaschner Dental GmbH seit 1967!

For more than 100 years outstanding quality of one of the oldest manufacturer of abrasive discs in the USA. A close distribution partnership with the Kentzler-Kaschner Dental company since 1967!

In 3 Größen erhältlich
Available in 3 sizes:

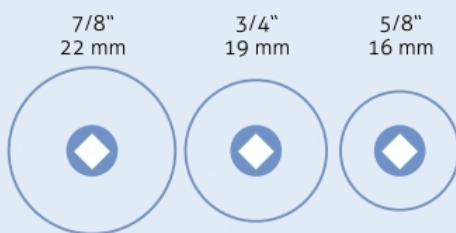

Mit **MOORE** macht Schleifen Freude!
With **MOORE** grinding is a real pleasure



MOORE
PLASTIC

ideal für nass & trocken
suitable for wet & dry



200 Scheiben/ discs

Einsatzbereiche/ fields of application

	Keramik ceramics	Metall metals	NEM NPM	EM PM	Silikat silicate	Kunststoff acrylics	Komposite composites
Sand				●		●	
Garnet				●		●	
MAGNUM SiC	●	●					
MAGNUM Al ₂ O ₃		●	●	●		●	

Herstellerempfehlung

Manufacturer's recommendation:



Weitere Anwendungsbereiche

Additional fields of application:



SAND



	coarse	medium	fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs		
7/8"=22 mm	40825	40827	40829
3/4"=19 mm	40817	40819	40821
5/8"=16 mm	40809	40811	40813

GARNET



	medium
Größe/ size	200 Scheiben/ discs
7/8"=22 mm	40859
3/4"=19 mm	40851
5/8"=16 mm	40843

KKD® Anti-Fog Schutzbrillen
Anti-Fog protection glasses



blau-grau/ blue-grey
REF 11770

Weitere Schutzbrillen finden Sie ab Seite 46.
More safety glasses refer to page 46.

MAGNUM SiC

100 Scheiben/ discs

Größe/ size	medium	fine
7/8"=22 mm	40893	40892
3/4"=19 mm	40885	40884
5/8"=16 mm	41874	—

MAGNUM Al₂O₃

100 Scheiben/ discs

Größe/ size	coarse	medium	fine
7/8"=22 mm	40891	40890	40889
3/4"=19 mm	40883	40882	40881
5/8"=16 mm	41872	41871	—

100 Scheiben/ discs

Snap-on-off System



Auflegen – drücken – fertig! Und los gehts.
Just press the disc – it snaps on in a jiffy – and off you go.



Einfach & schnell entfernen: nur vom Schaft nach oben drücken.
Fast / easy removal: just press the disc off the mandrel.

KKD® Snap-On-Off Träger – für -Scheiben
Snap-On-Off Mandrels – for discs

HP-7 Handstück 2,35 mm
HP-7 handpiece
12 St./ pcs. REF 01398



Einsatzbereiche/ fields of application

	Keramik ceramics	Metall metals	NEM NPM	EM PM	Silikat silicate	Kunststoff acrylics	Komposite composites
Sand				●	●	●	
Garnet				●		●	
Emery	●	●	●	●		●	
Adalox	●						

Herstellerempfehlung

Manufacturer's recommendation:



Weitere Anwendungsbereiche

Additional fields of application:



SAND



	coarse	medium	fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs		
7/8"=22 mm	40987	40989	40991
3/4"=19 mm	40981	40983	40985
5/8"=16 mm	40975	40977	40979

GARNET



	x-coarse	coarse	medium	fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs			
7/8"=22 mm	41023	41025	41027	41029
3/4"=19 mm	41013	41015	41017	41019
5/8"=16 mm	41003	41005	41007	41009

ADALOX



	coarse	medium	fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs		
7/8"=22 mm	41059	41061	41063
3/4"=19 mm	41053	41055	41057
5/8"=16 mm	41047	41049	41051


EMERY



	coarse	medium
Größe/ size	200 Scheiben/ discs	
7/8"=22 mm	40961	40963

MOORE
PAPIER/ PAPER

ideal für trocken
suitable for dry

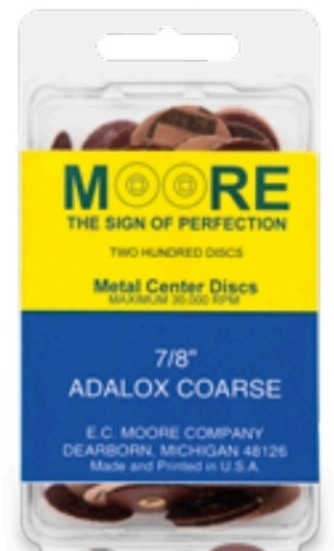

200 Scheiben/ discs

Ausarbeitungssteine & Schleifräder | Abrasive stones & -wheels

Fastcut Spitzen/ Fastcut Points

Aus agglomeriertem Schleifstoff zum Ausarbeiten von Kunststoffen. Selbstkühlend, nicht schmierend und selbstreinigend. Extrem hohe Standzeit, bestens zum Entfernen von Druckstellen geeignet.

Made of agglomerated grinding material for acrylics. Self-cooling, do not smear, self-cleaning. Extremely long-lasting, best suited for the removal of sore spots.

○ max. 5.000 min⁻¹

6-er Sortiment/ assortment of 6 pcs. REF 073775

Einzel/ individuals:



Nr. 2
REF 07365



Nr. 4
REF 07367



Nr. 5
REF 07369



Nr. 6
REF 07371



Nr. 7
REF 07373



Nr. 8
REF 07375

Fastcut Rad/ Fastcut Wheel

Zum Trimmen von Gipsmodellen und Beschleifen von Kunststoffen am Poliermotor./ For trimming plaster models and grinding acrylics with the polishing lathe.



75 x 9 mm
REF 07378

TOPDENT Alu-Oxid-Schleifräder/ Alu-Oxide Abrasive Wheels

Zum Verschleifen von Gusskanalenden und zur Gratentfernung bei der Co-Cr Modellgusstechnik. Schaffen einen glatten Übergang. Mittlere Körnung, braun./ For casting sprues in the Co-Cr model-casting technique. For smooth transitions. Medium grit, brown

○ max. 30.000 min⁻¹

50 St./ pcs.



22 x 3 mm
REF 21385

TOPDENT cutoff Stahl-Schleifräder cutoff Steel Abrasive Wheels

Alu-Oxid/ Alu-Oxide
○ max. 15.000 min⁻¹

50 St./ pcs.



32 x 2,2 mm
REF 21384

TOPDENT Heatless Steine/ Heatless Stones

Zum Verschleifen von abgetrennten Gusskanalenden. Größere Körnung, Stärke: 3 mm. For casting sprues. Grain coarse, thickness: 3 mm

25 St./ pcs.



19 mm Ø
REF 11250



22 mm Ø
REF 11251



25 mm Ø
REF 11252

BA 606 Blaue Steine/ Blue Stones

Aus blauem Spezialkorund, extra großporig. Zum Ausarbeiten von Kunststoff-Prothesen, bzw. zum effizienten Abtragen von Kunststoff. For finishing acrylic resin dentures, resp. for efficient ablation of acrylics.

○ max. 5.000 min⁻¹



klein/ small
REF 25090



mittel/ medium
REF 25091



groß/ big
REF 25092


Diamantpolierer für das Dentallabor | Diamond Polishers for the dental laboratory

Diamantpolierer für die Bearbeitung von Keramiken | Diamond Polishers for ceramics

TOPDENT DIA-BLUE-Polierer für feinstes Oberflächenfinish von Keramik. Für das Handstück - 2,35 mm Schaft

Polishers for finest surface finishing of ceramics. For HP - 2.35 mm shank

5.000 - max. 20.000 min⁻¹

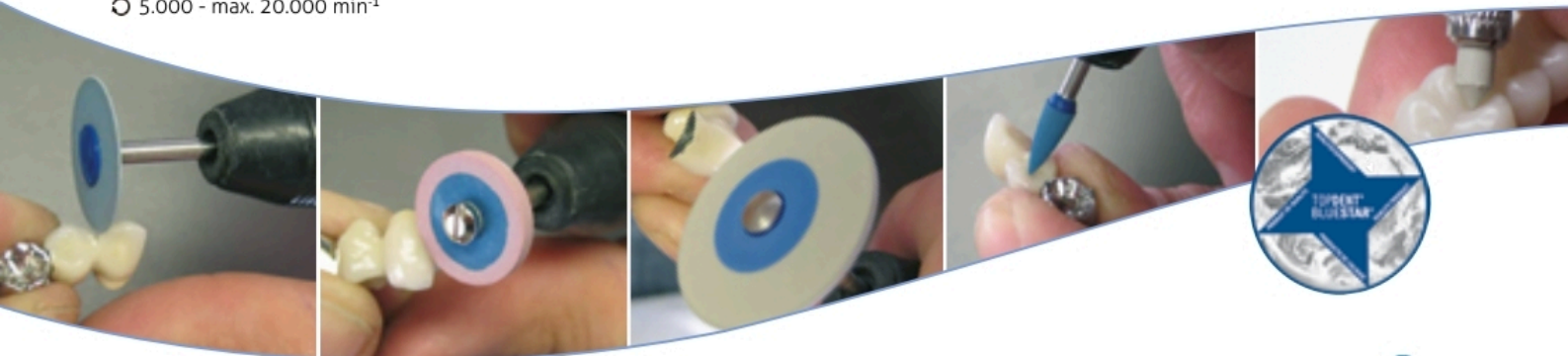

Grob – zum Abtragen und zum Verschleifen von Keramikmaterialien/ Coarse – for ablation of ceramic materials

			Sortiment/ assortment je 1 St./ ea. 1 pc. REF 225725						
Ø 4 x 13 mm 3 St./ pcs. REF 22585 12 St./ pcs. REF 22585B	Ø 11 x 2 mm 3 St./ pcs. REF 22586 12 St./ pcs. REF 22586B	Ø 16 x 3 mm 1 St./ pc. REF 22584 6 St./ pcs. REF 22584B		extra-dünn/ lense x-thin	Ø 20 x 1 mm 1 St./ pc. REF 22517	Ø 26 x 2 mm 1 St./ pc. REF 22597	Pin 3 mm Ø 6 St./ pcs. REF 22547	Pin 2 mm Ø 6 St./ pcs. REF 22544	Longpin für das Handstück - ohne Mandrell/ for HP - without mandrel Ø 2,35 x 35 mm 3 St./ pcs. REF 22637

Mittel – zum Glätten der Keramikarbeiten/ Medium – for smoothing ceramic works

			Sortiment/ assortment je 1 St./ ea. 1 pc. REF 225735						
Ø 4 x 13 mm 3 St./ pcs. REF 22588 12 St./ pcs. REF 22588B	Ø 11 x 2 mm 3 St./ pcs. REF 22589 12 St./ pcs. REF 22589B	Ø 16 x 3 mm 1 St./ pc. REF 22587 6 St./ pcs. REF 22587B		extra-dünn/ lense x-thin	Ø 20 x 1 mm 1 St./ pc. REF 22518	Ø 26 x 2 mm 1 St./ pc. REF 22598	Pin 3 mm Ø 6 St./ pcs. REF 22548	Pin 2 mm Ø 6 St./ pcs. REF 22545	Longpin für das Handstück - ohne Mandrell/ for HP - without mandrel Ø 2,35 x 35 mm 3 St./ pcs. REF 22638

Fein – für feinstes Finishing der Keramikoberflächen (Hochglanzpolitur - Glanzbrandeffekt). Reine Diamantkörnung.
Fine – for finest finishing of ceramic surfaces (high gloss polish - firing glaze effect). Pure diamond particles.

			Sortiment/ assortment je 1 St./ ea. 1 pc. REF 225755						
Ø 4 x 13 mm 3 St./ pcs. REF 22577 12 St./ pcs. REF 22577B	Ø 11 x 2 mm 3 St./ pcs. REF 22578 12 St./ pcs. REF 22578B	Ø 16 x 3 mm 1 St./ pc. REF 22576 6 St./ pcs. REF 22576B		extra-dünn/ lense x-thin	Ø 20 x 1 mm 1 St./ pc. REF 22519	Ø 26 x 2 mm 1 St./ pc. REF 22599	Pin 3 mm Ø 6 St./ pcs. REF 22549	Pin 2 mm Ø 6 St./ pcs. REF 22546	Longpin für das Handstück - ohne Mandrell/ for HP - without mandrel Ø 2,35 x 35 mm 3 St./ pcs. REF 22639


Polierstiftmandrelle s. Seite 43./ Mandrels for polishing sticks refer to page 43.

Sortimente/ assortments

6 Pins 3 mm Ø (je 2 St. grob, mittel, fein) + 1 HP Mandrell
6 Pins 3 mm Ø (ea. 2 pcs. coarse, medium, fine) + 1 HP mandrel
REF 225425

6 Pins 2 mm Ø (je 2 St. grob, mittel, fein) + 1 HP Mandrell
6 Pins 2 mm Ø (ea. 2 pcs. coarse, medium, fine) + 1 HP mandrel
REF 225415

3 Longpins 2,35 mm Ø (je 1 St. grob, mittel, fein) + 1 Abrichtstein
3 Longpins 2,35 mm Ø (ea. 1 pc. coarse, medium, fine) + 1 shaping stone
REF 226405

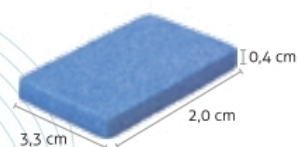

Abrichtstein/ shaping stone
1 St./ pc. REF 22636

Distributed by

TOPDENT

Schleifsteine zur schonenden Bearbeitung von Zirkonoxid, Lithiumdisilikat und Feldspatkeramik

Polishing stones for gentle handling of zirconium oxide, lithium disilicate and feldspar ceramics

- weicher Schliff
- schnittfreudiger Diamant
- feines Schliffbild
- lange Standzeit

- soft grinding
- fast cutting diamond
- smooth surface finish
- long durability



panther stone

Zylinder abgerundet/
cylinder round 035
Ø 3,5 x 10 mm
○ max. 15.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20710



panther stone

umgekehrter Kegel/
inverted cone 050
Ø 5 x 3 mm
○ max. 15.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20714



panther stone

Rad/ wheel 120
Ø 12 x 2,4 mm
○ max. 10.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20711



panther stone

Torpedo 025
Ø 2,5 x 7 mm
○ max. 15.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20715



panther stone

Zylinder/ cylinder 048
Ø 5 x 13 mm
○ max. 15.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20712



panther stone

Kelch/ cup 123
Ø 12 x 10 mm
○ max. 10.000–20.000 min⁻¹
1 St./ pc.

REF 20716



panther stone

Kegel/ cone 040
Ø 4 x 10,5 mm
○ max. 15.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20713



panther stone

Linse/ lense 220
Ø 22 x 2,2 mm
○ max. 8.000–20.000 min⁻¹
1 St./ pc.

REF 20717

Anwendungsgebiete fields of application

- Zirkon gesintert
- Zirconia sintered
- Keramik
- Ceramics

panther stone

Set mit 6 versch. Formen/
set with 6 diff. shapes

REF 20700S



Distributed by **TOPDENT**

Die Komplettierung des Panther Stone Sortiments durch die Ergänzung der Geometrien Rad We060, Minikonus Co035 und Kugel Ba040.

The perfect complement for the Panther Stone range adds the We060 wheel, the Co035 mini-taper, and the Ba040 ball geometries.



panther stone

Kugel/ ball 040

Ø 4 mm

○ max. 6.000/20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20707



panther stone

Rad/ wheel 060

Ø 6 x 2,1 mm

○ max. 6.000/20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20708



panther stone

Minikonus/ mini-taper 035

Ø 3,5 x 10,8 mm

○ max. 10.000/20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20709

panther edition

Distributed by

TOPDENT

Diamantpolierer für das Premium Finish von Zirkonoxid, Lithiumdisilikat und Feldspatkeramik

Diamond polishers for premium finish of zirconium oxide, lithium disilicate and feldspar ceramics

- Premiumlinie für jede Vollkeramik
- schneller zum Hochglanz
- lange Standzeit
- abgestimmte Geometrien für alle Situationen
- geschmeidiger Schliff durch weiche Bindung

- premium line for all-ceramic restorations
- high-gloss in high speed
- long service life
- coordinated selection of shapes for all situations
- soft bonding for smooth grinding



panther edition

Flamme/ flame 055

smooth

Ø 5,5 x 18 mm

○ max. 12.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20720



panther edition

Rad/ wheel 170

smooth

Ø 17 x 2,4 mm

○ max. 8.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20722



panther edition

Linse/ lense 260

smooth

Ø 26 x 2 mm

○ max. 8.000–20.000 min⁻¹
1 St./ pc.

REF 20721



panther edition

Linse/ lense 148

smooth

Ø 15 mm

○ max. 8.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20724



panther edition

Rad/ wheel 150

smooth

Ø 15 x 1 mm

○ max. 8.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20723

Anwendungsgebiete fields of application

- Zirkon gesintert
- Zirconia sintered
- Keramik
- Ceramics

Polierer | Polishers

KKD® topBraun und KKD® topGrün für das Handstück/ Polishers for the handpiece



Vorpolierer/ pre-polishers
 ⚙ max. 20.000 min⁻¹

Spitze/ point	12 St./ pcs.	REF 22843
	100 St./ pcs.	REF 22643
Linse/ lense	12 St./ pcs.	REF 22844
	100 St./ pcs.	REF 22644
Rad/ wheel	12 St./ pcs.	REF 22845
	100 St./ pcs.	REF 22645



Hochglanzpolierer/ high gloss polishers
 ⚙ max. 10.000 min⁻¹



Spitze/ point	12 St./ pcs.	REF 22847
	100 St./ pcs.	REF 22647
Linse/ lense	12 St./ pcs.	REF 22848
	100 St./ pcs.	REF 22648
Rad/ wheel	12 St./ pcs.	REF 22849
	100 St./ pcs.	REF 22649

TOPDENT Multisystem-Gummipolierer/ Rubber Polishers

Für alle Metalle (Universalpolierer)
 For all metals (universal polishers)

100 St./ pcs.

⚙ 5.000 - 12.000 min⁻¹

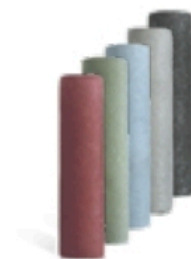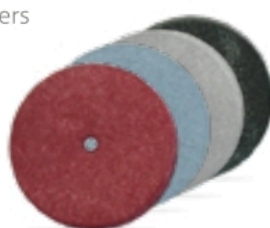

für EM + NEM für PM + NPM	x-weich/ x-soft weich/ soft	rot/ red
	mittel/ medium	grün/ green
Für Co-Cr-Mo für Co-Cr-Mo	hart/ hard	blau/ blue
	superhart/ x-hard	grau/ grey
		schwarz/ black

Räder/ wheels
 22 x 3,1 mm
 REF 21931

 REF 21922
 REF 21925
 REF 21934

Linsen/ lenses
 22 mm Ø

 REF 21955
 REF 21952

 REF 21953

Walzen/ barrel-type
 6 x 24 mm
 REF 21946
 REF 21943
 REF 21937
 REF 21940
 REF 21949

Mandrelle – z.B. REF 21807 oder 07269 – finden Sie auf Seite 43.
 Mandrels – e.g. REF 21807 or 07269 – refer to page 43.




TOPDENT Interdental Gummipolierer Interdental Rubber Polishers

Für alle Metalle. Gut geeignet für schwer zugängliche Stellen.
 For all metals. Best suitable for hard-accessible areas.

100 St./ pcs.

⚙ max. 20.000 min⁻¹

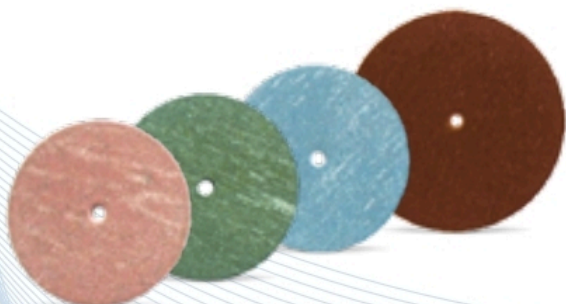

Räder/ wheels 22 x 1,0 mm

für EM/ for PM	rot/ red	REF 21398
für NEM/ for NPM	grün/ green	REF 25039
für NEM/ for NPM	blau/ blue	REF 21961

26 x 1,2 mm - x-hart/ x-hard
 für NEM und Co-Cr/ for NPM and Co-Cr
 braun/ brown

REF 07759

TOPDENT Karton Hochglanz-Polierscheiben Carton High gloss Polishing Discs

Zum Hochglanzpolieren aller Metalle.
Ideal für schwer zugängliche Stellen an Modellgussprothesen
und Übergängen zwischen Keramik und Metall.
For high gloss polishing of all metals.
Ideal for places that are hard to reach on model cast
prostheses and transitions between ceramic and metal.

5.000 - 12.000 min⁻¹

33 mm Ø, 100 St./ pcs.

REF 21274

+ Zur Steigerung der Effizienz empfehlen wir
die Verwendung von Polierpaste/ Diamantpolierpaste.
To increase efficiency, we recommend
the use of polishing paste/ diamond polishing paste.



Anwendungsvideo
„How to use“ video
<https://youtu.be/BWGkt-HtvIM>



TOPDENT Contapol

Kauflächenpolierer in abgestuften Körnungen zur Politur von EM-/ NEM- und Co-Cr-Legierungen.
Three-steps-polishing sticks for the polishing of occlusal surfaces. For PM / NPM and Co-Cr alloys.

10.000 - 20.000 min⁻¹

	Regular 3 mm Ø	Mini 2 mm Ø
Vorpolierer, 100 St. inkl. Mandell pre-polishers, 100 pcs. incl. mandrel	braun/hart brown/hard REF 22838	braun/hart brown/hard REF 22590
Nachpolierer, 100 St. inkl. Mandell re-polishers, 100 pcs. incl. mandrel	rot/mittel red/medium REF 22839	blau/mittel blue/medium REF 22591
Hochglanzpolierer, 100 St. inkl. Mandell high gloss, 100 pcs. incl. mandrel	grün/weich green/soft REF 22840	rot/weich red/soft REF 22592
Mandrell zum Schrauben, 1 St. mandrel screw-type, 1 pc.	REF 22836	REF 22593

Abziehstein einzeln
shaping stone
1 St./ pc. REF 22837



Sortiment „Regular“/ ass. „Regular“
50 Stück braun, je 25 Stück rot und grün,
1 Schraubmandrell, 1 Abziehstein
50 pcs. brown, ea. 25 pcs. red and green,
1 screw-type mandrel, 1 shaping stone

REF 228355



Sortiment „Mini“/ ass. „Mini“
je 30 Stück braun, blau und rot,
1 Schraubmandrell
ea. 30 pcs. brown, blue and red,
1 screw-type mandrel

REF 225945

TOPDENT KonusPolierer/ Conical Polishers

Auf Silikonbasis, 2,35 mm Schaft./ Silicone base, shank 2.35 mm.
14 mm Ø
7.000 - 12.000 min⁻¹

Vorpolierer/ pre-polishers
braun - grob/ brown - coarse
12 St./ pcs. REF 22832

Sortiment mit je 6 St./ ass. with
ea. 6 pcs. REF 22831S

Hochglanzpolierer/ high gloss
grün - fein/ green - fine
12 St./ pcs. REF 22833



Edelmetall-Polierer | Precious Metal Polishers

TOPDENT Edelmetall Gummipolierer/ PM Rubber Polishers

Flexibel, gute Formanpassung und guter Abtrag.
Flexible, good form adaptation and good ablation.
60 St./ pcs.

7.000 - 20.000 min⁻¹

weiß, mittel (auch für Keramik)/ white, medium (also for ceramics)

blau, fein/ blue, fine



Räder/ wheels
22 x 3 mm

REF 22568

REF 22553



Linsen/ lenses
22 mm

REF 22562

REF 22565



Spitzen/ points
24 x 6 mm

.....

REF 22556


TOPDENT Emetapol

Universalpolierer für Edelmetall, edelmetall-reduzierte Legierungen und Metall-Keramik-Übergängen bei Verblendkronen.
Polishers for precious metals, low precious metal alloys and metal-ceramic transitions of veneer crowns.
100 St./ pcs.

max. 20.000 min⁻¹

weiß, mittel/ white, medium

schwarz, fein/ black, fine

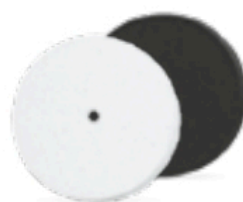

Räder/ wheels
22 x 3 mm

REF 22853

REF 22850



Linsen/ lenses
22 mm

REF 22854

REF 22851



Spitzen/ points
23 x 6 mm

REF 22855

REF 22852

Keramik-Polierer | Polishers for Ceramics

TOPDENT KERA-Polierer/ Polishers

Zum Vor-, Nach- und Hochglanzpolieren von Keramikarbeiten.
For pre-, re- and high gloss polishing of ceramic works.



Räder/ wheels
22 x 3 mm



Linsen/ lenses
22 mm Ø

○ KERA-PRE, grob/ coarse

Für die abrasive Vorpolitur. Zum Glätten der Oberflächen und Entfernen der Schleifspuren.
Pre-polisher, coarse. For smoothing surfaces and removal of grinding marks

max. 20.000 min⁻¹

100 St./ pcs.

REF 22856

REF 22858

● KERA-PAST, mittel/ medium

Polierer für die leicht abrasive Nachpolitur unter Erhaltung der anatomischen Struktur mit leichtem Glanzeffekt.
Polisher, medium. For the slightly abrasive re-polishing maintaining the anatomic structure with lustrous finish.

max. 10.000 min⁻¹

100 St./ pcs.

REF 22857

REF 22859

● KERA-HOCHGLANZ, fein/ HIGH GLOSS, fine

Polierer für das Erreichen von natürlichem Glanz (Hochglanz). Ein erneuter Glanzbrand entfällt. Das spart Zeit und Geld.
For high-gloss finish with natural gloss. No further gloss firing required - which saves time and money.

max. 5.000 min⁻¹

50 St./ pcs.

REF 22898

REF 22899

Sortiment Räder und Linsen/ ass. wheels and lenses

je 20 St. grob, 15 St. mittel, 10 St. fein + 3 Mandrelle/ ea. 20 pcs. coarse, 15 pcs. medium, 10 pcs. fine + 3 mandrels

REF 22900S

NEM-Polierer | NPM Polishers

TOPDENT TopPol Co-Cr Polierer/ Co-Cr Polishers

- Hohe Polierleistung bei niedriger Drehzahl.
- Geringe Hitzeentwicklung.
- Aus extrem hartem Material (vulkanisiert).
- Effective polishing with low speed.
- Slight heat generation.
- Made of extremely hard material (vulcanized).



Räder/ wheels
22 x 3 mm



Walzen/ barrel-type
7 x 21 mm



Walzen/ barrel-type
6 x 23 mm

grob/ coarse	⊙ max. 20.000 min ⁻¹	50 St./ pcs.	REF 07750	REF 07753	REF 07756
mittel/ medium	⊙ max. 20.000 min ⁻¹	50 St./ pcs.	REF 07751	REF 07754	REF 07757
fein/ fine	⊙ max. 20.000 min ⁻¹	50 St./ pcs.	REF 07752	REF 07755	

Kunststoff-Polierer | Polishers for resins

TOPDENT Finisher I-V

Elastische Polierscheiben für das Beschleifen bzw. das Entfernen scharfer Kanten, Verschleifen von Frässtegen, Abrunden von Übergängen und Glätten von Tiefziehschienen, Silikonen, weichbleibenden Unterfütterungen. Geringe Wärmeentwicklung.

Elastic polishing wheels for grinding or removing sharp edges. They are also used for smoothing milling bars, rounding transitions of thermoformed splints, silicones, permanently soft relinings or other flexible and solid materials of plastic. They stand out for their low heat generation.



28 mm Ø



Finisher I
Grobe Körnung, beige-braun, halboffene Struktur. Abtragen, Abrunden, Glätten/ coarse, beige/brown, half-open structure. Removing, rounding, smoothing

⊙ 5.000 - 10.000 min⁻¹



Finisher II
Feine Körnung, türkis, halboffene Struktur. Abtragen, Abrunden, Glätten/ fine, turquoise, half-open structure. Removing, rounding, smoothing

⊙ 5.000 - 10.000 min⁻¹



Finisher II (SOFT)
Hellblau, standfeste, geschlossene Struktur. Zur Vorpolitur speziell im Interdentalbereich/ light blue, stable, closed structure. Prepolishing especially in interdental areas

⊙ 10.000 - 15.000 min⁻¹



Finisher III
Grobe Körnung, braun, offene Struktur. Abtragen von Kanten/ coarse, brown, open structure. Removing edges

⊙ max. 5.000 min⁻¹



Finisher IV
Mittlere Körnung, grau, offene Struktur. Abrunden von Kanten/ medium, grey, open structure. Rounding edges

⊙ max. 5.000 min⁻¹



Finisher V
Feine Körnung, weiß, offene Struktur. Glätten von Kanten/ fine, white, open structure. Smoothing edges

⊙ max. 5.000 min⁻¹

10 Räder, 4 Unterlegscheiben, 1 Mandrell/ 10 wheels, 4 washers, 1 mandrel	REF 210815	REF 210835		REF 210855	REF 210875	REF 210895
6 Räder, 4 Unterlegscheiben, 1 Mandrell/ 6 wheels, 4 washers, 1 mandrel			REF 210935			
Nachfüllpack/ Economy Pack: 100 Räder, 4 Unterlegscheiben/ 100 wheels, 4 washers	REF 21080	REF 21082	REF 21092	REF 21084	REF 21086	REF 21088

TOPDENT Silimont Polierer/ Polishers

Zum Abtragen (grün), Glätten (schwarz) und Hochglanzpolieren (gelb) von prothetischen und kieferorthopädischen Kunststoffen.
For ablation (green), smoothing (black) and high gloss polishing (yellow) of prosthetic- and gnatho-orthopedic resins.

○ 5.000 – 7.000 min⁻¹

6 St./ pcs.

grün, grob
schwarz, mittel
gelb, fein

green, coarse
black, medium
yellow, fine



TD-12
REF 22889
REF 22876



TD-10
REF 22893
REF 22880
REF 22867



TD-4
REF 22897
REF 22884
REF 22871



Ideal zum Bearbeiten von CLEARsplint®-Kunststoff.
Best suitable for CLEARsplint®-resin.

TOPDENT Blue Trim

Schleifkörper in Kunstharzbindung. Speziell für Werkstoffe mit geringer Wärmetoleranz geeignet, um Schmelzeffekte zu vermeiden. Für die Bearbeitung von Thermoplasten wie z.B. Nylon, PE, PP, weichen Kunststoffen und Silikon sowie für weichbleibende Unterfütterungen. Ideal für Aufbissschienen, Bleichschienen und Sportmundschutz.

- Offene porige Struktur und niedriger Drehzahlbereich minimieren Wärmeentwicklung
- weicher, angenehmer Schliff

Abrasive in synthetic resin bond, especially suited for thermoplastics such as nylon, PE, PP and silicones, as well as soft relining materials. Best suited for materials with low heat tolerance in order to avoid melting effects.

- Open-pore structure and low speed range minimise heat development
- soft, pleasant finishing

○ 3.000 - 10.000 min⁻¹

1 St./ pc. REF 22457

Imprägnierte Polierräder | Impregnated Polishing wheels



22 x 3 mm
Vorpulitur/
Pre-polishing
10 St./ pcs. REF 22459



22 x 3 mm
Hochglanzpulitur/
High gloss polishing
10 St./ pcs. REF 22458

TOPDENT Orange Wheel - Vorpulitur/ Pre-polishing

TOPDENT Pink Wheel - Hochglanzpulitur/ High gloss polishing

Imprägnierte Polierräder für die Bearbeitung von harten Kunststoffoberflächen.

- Hochglanzpulitur ohne Schmelzeffekte

Impregnated polishing wheels for high lustre on hard acrylic surfaces.

- High lustre without melting effects

○ 5.000 – 10.000 min⁻¹

Anwendungsvideo
„How to use“ video
www.youtube.com/watch?v=B79pfwog4DI



Poliersystem/ Polishing system

für die Kunststoffbearbeitung/ for denture acrylics
7-teilig für das Handstück/ 7 instruments HP

REF 22450S

UPOFIX® Universalpolierer | Universal Polishers

Aus hochbeanspruchbarer Kevlarfaser/ made of highly elastic kevlar fibers

Das UPOFIX® Poliersystem besteht aus sechs Polierbürsten, deren Fasern sich von extragrob bis superfein hinsichtlich Aggressivität und Stärke unterscheiden. Der Vorteil des Systems besteht darin, dass mit nur sechs Instrumenten eine breite Palette von Materialien ein- oder mehrstufig poliert werden kann. Die Fasern passen sich der Form des Werkstücks an und ermöglichen dem Benutzer auch schwer zugängliche Flächen wie Interdentalräume zu polieren.

The Upofix® dental polishing system consists of six polishing brushes with fibers ranging from extra coarse to super fine in terms of abrasion and strength. The main advantage of this system is that a broad range of materials can be polished in one or two steps using only six polishers. The fibers adapt to the shape of the workpiece and allow the technician to effectively polish and finish all surfaces including difficult areas such as interdental spaces.



21 mm Ø

UPOFIX® Set
sortiert/ assorted
6 St./ pcs. REF 88022095



UPOFIX® 0 - extragrob/
x-coarse
schwarz-grün/ black-green

als Vorpolierer für Metalle/
pre-polisher for metals

3 St./ pcs. REF 8802207
5 St./ pcs. REF 8802279

UPOFIX® I - supergrob/
super coarse
schwarz/ black

Als Vorpolierer für Metalle
- speziell für Kauflächen
und Interdentalräume/
pre-polisher for metals -
occlusal and interproximal
areas

3 St./ pcs. REF 8802217
5 St./ pcs. REF 8802219



UPOFIX® III - grob/ coarse
grün/ green

Als Vorpolierer für
Keramik/ pre-polisher for
ceramics

3 St./ pcs. REF 8802237
5 St./ pcs. REF 8802239

UPOFIX® II - mittel/ medium
blau / blue

Als Glanzpolierer für Metalle
- speziell für Kauflächen
und Interdentalräume/ final
polisher for metals - occlusal
and interproximal areas

3 St./ pcs. REF 8802227
5 St./ pcs. REF 8802229

UPOFIX® V - superfein/ super fine
gelb/ yellow

Als Glanzpolierer für Komposite
und Kunststoff/ final polisher for
composites and acrylics

3 St./ pcs. REF 8802257
5 St./ pcs. REF 8802259

UPOFIX® IV - fein/ fine
rot/ red

Als Glanzpolierer für Keramik
und Vorpolierer für Komposite
und Kunststoff/ final polisher for
ceramics and pre-polisher for
composites and acrylics

3 St./ pcs. REF 8802247
5 St./ pcs. REF 8802249

Zu beachten ist, dass die UPOFIX® Polierer bei niedriger Drehzahl (ca. 2000 - 5000 min⁻¹) in durchzugskräftigen Mikromotoren eingesetzt werden. Bei niedrigen Drehzahlen unter erhöhtem Anpressdruck entsteht eine leichte Abrasion. Mit einem reduzierten Anpressdruck und einer etwas höheren Drehzahl wird Glanz auf den Oberflächen des Werkstücks erzielt.

Please note that the UPOFIX® polishing instruments should be used at low speed (2000-5000 min⁻¹) using high-torque micro motors. As a general rule, low speed and firm pressure results in light abrasion whereas technicians should reduce pressure at slightly higher speed in order to achieve shine or high shine on the workpiece. Intermittent pressure and circular, diagonal movements improve the polishing result.

Niedrige Drehzahl/ low turning speed ○ 2.000 - 3.000 min⁻¹
Höhere Drehzahl/ high turning speed ○ 3.000 - 5.000 min⁻¹

höherer Anpressdruck – leichte Abrasion/ firm pressure – slight abrasion
geringerer Anpressdruck – Glanzpolitur/ light pressure – final polish

Packung à 3 Stück, montiert, auf Schaft verpresst/ Pkg. à 3 pcs., mounted, firmly pressed on shank

22 x 3,2 mm REF 22731

22 x 6,4 mm REF 22732

Drehzahl max. 20.000 rpm/ Speed max. 20,000 rpm

Eigenschaften:

- Matrix: Dreidimensionale, halboffene Strukturmatrix
- Haptik: Anschmiegsam, flexibel und beweglich
- Emission: Keine Staub- und Geruchsentwicklung
- Oberflächengüte: Kratzfreies Finish mit feinem Seidenglanz
- Abtrag: Effiziente, kontrollierbare und materialschonende Wirkung
- Formstabil: Profilieren für punktgenauen definierten Einsatz

Properties:

- Matrix: three-dimensional, semi-open mesh structure matrix
- Haptic: supple, flexible and movable
- Emission: no dust- and odor development
- Surface quality: scratch-free finish with a fine silky gloss
- Removal: efficient, controllable and gentle on the material
- Dimensionally stable: profiling for precisely defined use

Lösungen:

- Verschleifen der Supports
- Glätten von Oberflächen
- Ausarbeiten von Schienen aller Art
- Für schwer zugängliche Stellen
- Laser/Faser-Schweißnähte glätten/versäubern
- Entfernen von Oxidschichten und Anlauffarben nach Lötungen
- Abtragen und Versäubern von weichbleibenden Unterfütterungen
- Reduzieren von Glanzpunkten (Zirkonoxid/Keramik/Lithium-Disilikat)
- Nivellieren von Übergängen unterschiedlichster Materialien (Kunststoff/Metall-Legierungen/Titan/Keramik/Glasurmasse)

Solutions:


- grinding of the supports
- smoothing of surfaces
- finishing all types of splints
- appropriated for hard-to-reach areas
- smoothing/cleaning of laser/fibre welds
- removal of oxide layers and annealing colours after soldering
- removal and cleaning of soft relinings
- reduction of lustre spots (zirconium oxide/ceramic/lithium disilicate)
- levelling of transitions between different kinds of materials (acrylics/ metal alloys/titanium/ceramic/glazing material)

Werkstoffe:

- Zirkonoxid/Keramik/Lithium-Disilikat
- Titan, NEM-/ EM Legierungen
- Weichbleibende Unterfütterungen
- Harte und weiche Tiefziehschienen
- PEEK
- 3D-Druckerzeugnisse
- Thermoaktive Kunststoffe

Materials:

- Zirconium oxide/ceramic/lithium disilicate
- Titanium, NPM-/PM alloys
- Soft relinings
- Hard and soft vacuumformed splints
- PEEK
- 3D printed products
- Thermoactive acrylics

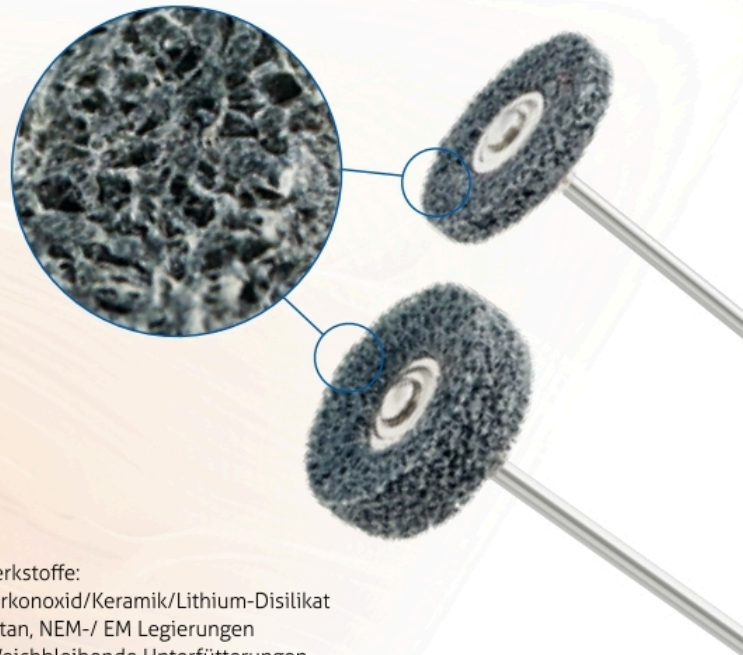

Entdecken Sie die neuen Matrix Polierer – Entwickelt für Ihre Lösungen. Die Vernetzung der abgestimmten, halboffenen Matrix ermöglicht Kontrolle und Ordnung im Anwendungsprozess. Die Matrix ist vollständig mit hochwertigem Schleifkorn durchsetzt. Im Prozess positioniert sich das Schleifkorn innerhalb der Matrix dynamisch auf Anpressdruck für eine effiziente und materialschonende Wirkung.

Discover the new Matrix polishers – developed for your solutions. The mesh structure of the harmonised, semi-open matrix enables control and order in the application process. The matrix is fully interspersed with high-quality abrasive grain. During the process, the abrasive grain positions itself dynamically within the matrix under pressure for an efficient and non-destructive effect.

Polierbürsten & Schwabbeln | Polishing brushes & Buffing wheels

Polierbürsten für das Handstück | Polishing brushes for HP

TOPDENT Miniaturbürstchen/ Miniature Brushes

Für Metall- und Kunststoffoberflächen. Hohe Standzeit./ For metal- and resin surfaces. Long-lasting.
Schaft/ shank 2,35 mm, $\odot$ max. 16.000 min⁻¹

Ziegenhaar/ goat hair

weiß, weich/ white, soft
für Verblendkunststoffe
for acrylic veneers

12 St./ pcs.
144 St./ pcs.



16 mm Ø
REF 22680
REF 22681

19 mm Ø
REF 22682
REF 22683

meliert, weich/ mixed, soft
für Kunststoffzähne
for acrylic teeth

12 St./ pcs.
144 St./ pcs.



REF 22684
REF 22685

REF 22686
REF 22687

Pferdehaar/ horse hair

hellmeliert, mittel, für EM
mixed, medium, for PM

12 St./ pcs.
144 St./ pcs.



16 mm Ø
REF 22688
REF 22689

19 mm Ø
REF 22690
REF 22691

Chungkingborsten/ Chungking bristles

schwarz, hart, für EM
black, hard, for PM

12 St./ pcs.
144 St./ pcs.



16 mm Ø
REF 22692
REF 22693

19 mm Ø
REF 22694
REF 22695

schwarzmeliert, x-hart, für EM
mixed, x-hard, for PM

12 St./ pcs.
144 St./ pcs.



REF 22696
REF 22697

REF 22698
REF 22699



TOPDENT Pinselbürstchen/ End Brushes

TOPDENT Silberdraht-Pinselbürstchen Silver Wire End brush

Zur punktuellen, okklusalen Vorpolitur und zum
Auspolieren von Teleskop-Konussekundärkronen.
For punctual, occlusal pre-polish and for polishing
telescope conical secondary crowns.
Schaft/ shank 2,35 mm, $\odot$ max. 20.000 min⁻¹

gewellt/ crimped
12 St./ pcs.

Silberdraht-Stärke
silver wire thickness
0,08 mm REF 22702
0,10 mm REF 22703

glatt/ straight
12 St./ pcs.

Silberdraht-Stärke
silver wire thickness
0,08 mm REF 22722

TOPDENT Pinselbürstchen End Brushes

Zum Auspolieren von Teleskop-Konus-
sekundärkronen.
For polishing telescope conical secondary
crowns.
Schaft/ shank 2,35 mm, $\odot$ 3.000 – 6.000 min⁻¹

Ziegenhaar,
weiß
goat hair,
white
12 St./ pcs.
REF 23260


Chungkingborsten,
schwarz
Chungking bristles,
black
12 St./ pcs.
REF 23262

TOPDENT Teleskop-Pinselbürstchen Telescope End Brushes

Ideal für die kleinsten Prämolaren-
oder Frontzahn-Teleskopsekundärteile.
Kunststoffaufnahme und elastischer
Kunststoffschaft um Beschädigungen
der Ränder zu vermeiden.
Ideal for the smallest premolar- or
anterior telescope secondary parts.
Elastic plastic shank in order to avoid
damages on the margins.
Schaft/ shank 2,35 mm
 $\odot$ 3.000 – 6.000 min⁻¹

L Naturborste in Kunststoffhülse
natural hair in plastic sleeve
20 St./ pcs. REF 23400
50 St./ pcs. REF 23401
100 St./ pcs. REF 23402

S Synthetikborste in Kunststoffhülse
synthetic hair in plastic sleeve
20 St./ pcs. REF 23247
50 St./ pcs. REF 23248
100 St./ pcs. REF 23249

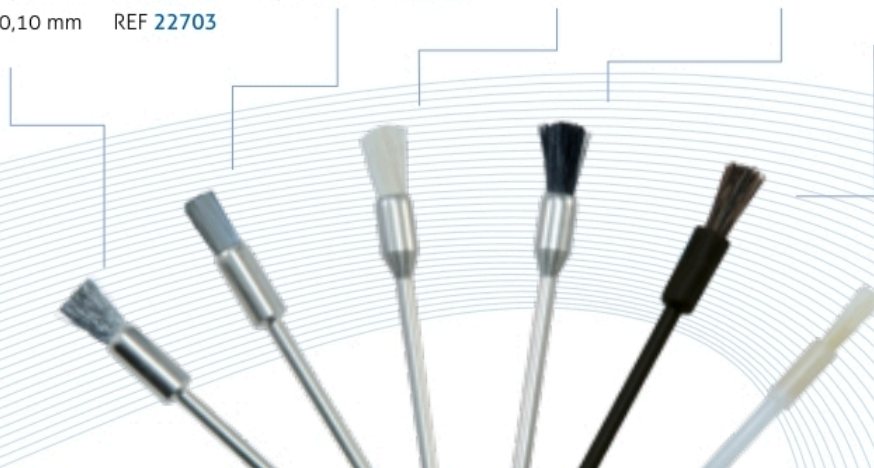

Original Robinson Bürstchen/ Brushes

Zum Polieren von Metall- und Kunststoffoberflächen.
Chungkingborsten, beste Qualität – Hohe Standzeit - (US-Produkt).
Beste Rundlaufeigenschaft, da die Bürsten fest im Trägerkopf montiert sind!

For polishing metal- and resin surfaces. Chungking bristles – TOP QUALITY. Long-lasting - (US product). **Best concentricity since bristles are mounted firmly in the mandrel head.**

Schaft/ shank 2,35 mm
Ø max. 18.000 min⁻¹

x-hart – für NEM
x-hard – for NPM
Nr. 9 - 14 mm Ø

12 St./ pcs. REF 21267
144 St./ pcs. REF 21268

hart – für EM/ hard – for PM
Nr. 9 - 14 mm Ø

12 St./ pcs. REF 21265
144 St./ pcs. REF 21266

hart – für EM/ hard – for PM
Nr. 11 - 17 mm Ø
12 St./ pcs. REF 21403
144 St./ pcs. REF 21404

x-hart – für EM
x-hard – for PM
Nr. 12 - 19 mm Ø
12 St./ pcs. REF 21409

weich – für Kunststoff
soft – for resins
Nr. 12 - 19 mm Ø
12 St./ pcs. REF 21411
144 St./ pcs. REF 21412

weich – für Kunststoff/ soft – for resins
Nr. 11 - 17 mm Ø
12 St./ pcs. REF 21401
144 St./ pcs. REF 21402

weich – für Kunststoff
soft – for resins
Nr. 9 - 14 mm Ø

12 St./ pcs. REF 21263
144 St./ pcs. REF 21264

DAS ORIGINAL!

TOPDENT Nylonbürstchen/ Nylon Brush


„Profihelper“ – schnell und effektiv.
Reinigungs- und Korrekturbürstchen für alle
Dentalmaterialien. Harte Borsten – bestens geeignet zur
Beseitigung von Gipsresten und Kunststoff-Pressfahnen bei der
Prothesenherstellung.

The „Profihelper“ – fast and efficient. Cleaning- and correction brush
for all dental materials. Hard bristles – best suited for the removal
of plaster and resin pressing flashes during the manufacturing of
dentures.

Schaft/ shank 2,35 mm
Ø max. 5.000 min⁻¹

22 mm Ø
6 St./ pcs.

REF 22679

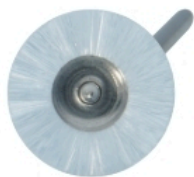

Miniaturbürstchen/ Miniature Brushes

Hohe Standzeit/ long service life
Schaft/ shank 2,35 mm
Ø max. 18.000 min⁻¹
17 mm Ø

Chungkingborsten schwarz,
x-hart für EM/ Chungking
bristles black, x-hard for PM

12 St./ pcs. REF 22718

Ziegenhaar weiß, hart, für
Keramik, Kunststoff, Komposite
goat hair white, hard, for
ceramics, resin, composite

12 St./ pcs. REF 22715



TOPDENT Messingdrahtbürstchen/ Brass Wire Brushes

Zum Glätten, Verdichten und Vorpolieren von Edelmetall-
und Co-Cr-Legierungen.

For smoothing, condensing and pre-polishing of precious
metals- and Co-Cr-alloys.

Schaft/ shank 2,35 mm
Ø max. 10.000 min⁻¹
21 mm Ø

6 St./ pcs.

REF 23267



TOPDENT Silberdraht-Bürstchen/ Silver Wire Brushes

Zur abrasionsfreien Vorpolitur und zum Mattieren von
Metallkaufächen.

For abrasion-free pre-polishing and for mat polishing of metal
surfaces.

Schaft/ shank 2,35 mm
Ø max. 10.000 min⁻¹
19 mm Ø

12 St./ pcs.

montiert/ mounted

unmontiert/ unmounted

REF 22700

REF 22701





MiniVliesBürste - schwarz / Chunking + Vlieseinlage
MiniScotchBriteBrush - black / Chungking with scotch brite insert

Zum Hochglanzpolieren aller NEM/EM Kronen & Brücken, sowie für die Modellgusspolitur. Durch die Vlieseinlage wird die Polierpaste bestens konserviert. Die breite Auflage der Bürste, sowie die hohe Standzeit erlauben es, größere Flächen durch stärkeres Aufdrücken und höhere Drehzahlen leichter zu polieren ohne größeren Haarverlust der Bürste zu riskieren.

For high gloss polishing of all NPM/PM crown and bridges, as well as for model casting polishing. Due to the scotch brite insert the polishing paste is well conserved. The broad contact surface of the brush, as well as its long life enable an easy polishing of larger surfaces using higher pressure and higher rotation speed without the risk losing too many brush hairs.

Schaft/ shank 2,35 mm, 25 mm Ø

⊙ max. 10.000 min⁻¹

12 St./ pcs.

REF 21822

MiniPli - Ziegenhaar weiß mit Nesselinlage
MiniPli - Goat hair white with muslin cloth insert

Für Keramiken aller Art, Komposit & Kunststoff. Durch die Nesselinlage wird die Polierpaste hervorragend konserviert. 10-fach höhere Standzeit gegenüber Standardbürsten. Die breite Auflagefläche ermöglicht eine großflächige Politur bei stärkerem Druck, höheren Drehzahlen und geringem Haarverlust.

For all kind of ceramics, composites and resins.

Due to the muslin cloth the polishing paste is well conserved. 10 times longer service life than standard brushes. The broad contact surface of the brush enables an easy polishing of larger surfaces using higher pressure and higher rotation speed without the risk losing too many brush hairs.

Schaft/ shank 2,35 mm, 23 mm Ø

⊙ max. 6.000 min⁻¹

6 St./ pcs.

REF 22719



Mini Ziegenhaar Bürste/ Mini Goat hair Brush

Die extraweichen Borsten schmiegen sich perfekt am Material an. Zur Bimsstein-Vorpolitur oder Hochglanzpolitur - für Handstück oder Poliermotor geeignet.

The extra soft bristles adapt perfectly to the material. Suited for pumice prepolishing, as well as for high gloss polishing, for HP or polishing lathe.

⊙ max. 5.000 min⁻¹

26 mm Ø, 1-reihig, Borsten 6 mm/ 1-row, bristles 6 mm

1 St./ pc.

REF 22717

12 St./ pcs.

REF 22717B

Hypofix-Gamma

Zur Politur von Kunststoff und EM.

Pferdehaarborsten mit in der Einlage integrierter Diamantpolierpaste. Dadurch einfache Handhabung und Zeitersparnis.

Natural hair with insert impregnated with polishing paste. For polishing resins and PM.

Schaft/ shank 2,35 mm, ⊙ max. 1.000 – 3.000 min⁻¹

22 mm Ø

3 Stück inkl. 1 Mandrell/ 3 pcs. incl. 1 mandrel

REF 8803059

Mandrelle – z.B. REF 21807 oder 07269 – finden Sie auf Seite 43./ Mandrels – e.g. REF 21807 or 07269 – refer to page 43.



Beim Abnutzen und bei reduzierter Polier-Leistung kann der Kopf der Keramikfasern mit einer Diamantscheibe für eine ideale Weiterverwendung gekürzt werden.
Worn out or with reduced polishing performance the head of the fibres may be cut with a diamond disc for ideal reuse.



Meister Finish Ceramic End Brush (Keramikfasern) MF Ceramic End Brush (Ceramic fibres)

Zum Vorpolieren ohne oder mit Diamantpolierpaste (Seidenglanzpolitur). Für sehr feine Oberflächenstruktur bei gegossenen Sekundärteleskopen sowie bei konventionell gegossenen Kronen und Brücken aus EM oder NEM. Gute Möglichkeit Oxyd und Gußrauhigkeiten - auch in der Tiefe - zu entfernen und um schonend die Friktion bei der Teleskop-Technik einzustellen, da die Keramikfasern nicht auffächern. Ein senkrechtes/paralleles Arbeiten zum Kronenrand, sowie die maximale Drehzahl von 10.000 min^{-1} verlängern die Lebensdauer.

○ max. $6.000 - 10.000 \text{ min}^{-1}$

For the pre-polish with or without diamond polishing paste (silky lustre polish). For very fine surface structures of casted secondary crowns, as well as for conventionally casted PM or NPM crowns and bridges. Best possibility to remove oxide or cast roughnesses and to adjust gently the friction of telescopes, since the ceramic fibres do not fan out. Vertical/parallel use, as well as a max. rotation speed of 10.000 min^{-1} extend service life.



Anwendungsvideo
„How to use“ video
<https://www.youtube.com/watch?v=PDbAZ5NOM3U>

Weiss - dicke Fasern/ white - thick fibres
1 St./ pc. REF 23280

Rot - dünne Fasern/ red - thin fibres
1 St./ pc. REF 23281

Polierschwabbeln für das Handstück | Polishing buffing wheels for HP

TOPDENT montierte Schwabbeln/ Mounted buffing wheels

Zur Hochglanzpolitur von Metall, Keramik und Kunststoff. Weiche Qualität, 2,35 mm Schaft - 21 mm Ø.

For high gloss polish on metal, ceramics and resins. Soft quality, 2.35 mm shank - 21 mm Ø.

○ max. $12.000 - 15.000 \text{ min}^{-1}$



Alcontura
(EM)/ (PM)

Leder/ leather
(EM)/ (PM)

Filz/ felt
(Verblendkunststoffe/
acrylic veneers)

Flanell/ flannel
(Verblendkunststoffe &
Keramik/ acrylic veneers
& ceramics)

Plüschmull/ muslin
(Keramik in Verb. mit
Diamantpolierpaste/
ceramic together with
diam. polishing paste)

6 St./ pcs. REF 21837
12 St./ pcs.

REF 23263
.....

REF 23264
REF 22713

REF 23265
.....

REF 23266
.....

TOPDENT
Wildlederschwabbeln
Chamois-leather buffing
wheels

22 mm Ø



Zur Hochglanzpolitur von
Metall, Keramik und
Kunststoff. Unmontiert.
For high gloss polish of metal
and resins. Unmounted.

12 St./ pcs.
REF 21980

DeltaGloss – Maximale Performance für Ihre Hochglanzpolitur

Perfekte Fasern für ein perfektes Finish

Die verwendete Baumwollqualität stammt aus der gleichen hochwertigen Faserklasse wie die bekannte Premium-Baumwolle aus dem Nildelta, die für ihre extra langen und feinen Fasern geschätzt wird.

Hochglanz in Perfektion

Dank der optimierten Gewebestruktur erzielt DeltaGloss eine gleichmäßige, feine Hochglanzpolitur – selbst bei anspruchsvollen Materialien wie z.B. PEEK.

Optimieren Sie die Polierleistung mit höheren Drehzahlen!

Maximum performance for your high-gloss polish

Perfect fibres for a perfect finish

The cotton quality used comes from the same high-quality fibre class as the well-known premium cotton from the Nile Delta, which is especially appreciated for its extra long and fine fibres.

High gloss in perfection

Thanks to the optimised fabric structure, DeltaGloss achieves a uniform, fine high-gloss polish - even on challenging materials such as PEEK. Optimise polishing performance by using higher speeds!



NEU
NEW




22 x 3 mm
2,35 mm Schaft/ shank

3 St./ pcs. REF 23294

Original Calibris


3-reihig mit Leineneinlagen zur Normal- und Hochglanzpolitur. Hohe Standfestigkeit. Kunststoffkern. Chungkingborsten – 20 mm.
3-rows with linen inserts for normal- and high-lustre polish. Long lasting. Plastic centre. Chungking bristles – 20 mm. 80 mm Ø

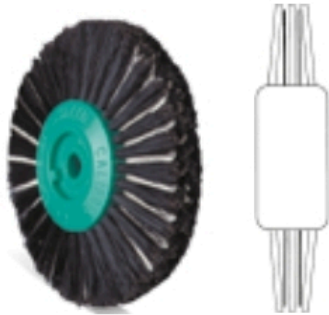

10 St./ pcs. REF 22500
40 St./ pcs. REF 22500B

Cali-Top


3-reihig mit 2 Leineneinlagen zur Normal- und Hochglanzpolitur. Kunststoffkern. Chungkingborsten – 20 mm.
3-rows with 2 linen inserts for normal- and high-lustre polish. Long lasting. Plastic centre. Chungking bristles – 20 mm. 80 mm Ø

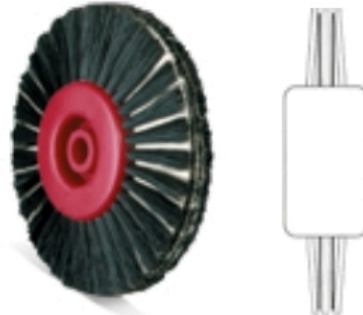

12 St./ pcs. REF 21826

Cali-Top

4-reihig mit 3 Leineneinlagen zur Normal- und Hochglanzpolitur. Kunststoffkern. Chungkingborsten – 20 mm.
4-rows with 3 linen inserts for normal- and high-lustre polish. Long lasting. Plastic centre. Chungking bristles – 20 mm. 80 mm Ø

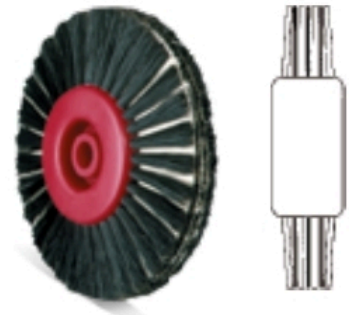

12 St./ pcs. REF 21828

Cali-Top-S

2-reihig mit Leineneinlage zur Normal- und Hochglanzpolitur. Kunststoffkern. Chungkingborsten - 15 mm. Erzielt schnelle und gute Polierergebnisse bei hoher Standfestigkeit.
2-rows with linen insert for normal- and high-lustre polish. Long lasting. Plastic centre. Chungking bristles - 15 mm. 55 mm Ø



12 St./ pcs. REF 21824
120 St./ pcs. REF 21824B

Soft-Lederbürste/ Soft-Leather Brush

2-reihig mit Einlagen. Kunststoffkern. Gute Wasseraufnahme und Speicherung durch Softleder-Einlagen. Chungkingborsten 15 mm - mittlere Härte.
2-rows with inserts. Plastic centre. Good water absorption due to soft-leather inserts. Chungking bristles of medium stiffness - 15 mm. 55 mm Ø



12 St./ pcs. REF 21829

Scotch Brush


2-reihig mit Scotch-Einlage. Kunststoffkern. Chungkingborsten - 20 mm - mittlere Härte.
2-rows with scotch-insert. Plastic centre. Chungking bristles of medium stiffness - 20 mm. 80 mm Ø



1 St./ pc. REF 21823

OK Bürste/ UPPER JAW brush

2-reihig, kurzer, harter Borstenbesatz. Kunststoffkern. Chungkingborsten - 11 mm. Zur Hochglanzpolitur von Stahl.
2-rows, short, hard bristles. For high-lustre polish of steel. Plastic centre. Chungking bristles - 11 mm. 70 mm Ø

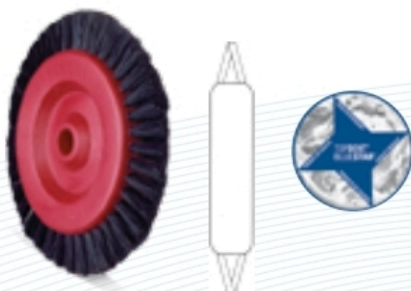

12 St./ pcs. REF 22710
120 St./ pcs. REF 22710B

Breitbürste/ Broad Brush


4-reihig. Kunststoffkern. Chungkingborsten - 20 mm. Weiche Bürste für Kunststoffe.
4-rows. Plastic centre. Chungking bristles - 20 mm. Soft brush for resins. 80 mm Ø



12 St./ pcs. REF 22705

Polierbürste/ Polishing Brush


4-reihig, schräger Borstenbesatz. Kunststoffkern. Chungkingborsten - 20 mm, für Kunststoffe.
4-rows, pointed bristles. Plastic centre. Chungking bristles - 20 mm, for resins. 80 mm Ø

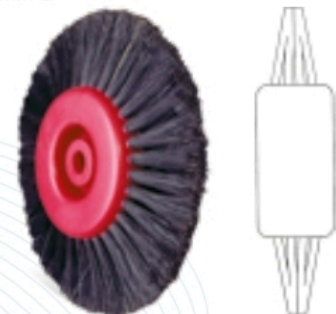

12 St./ pcs. REF 22707

Superbürste B-20

3-reihig, für Hochglanz auf Stahl + NEM. Kunststoffkern. Chungkingborsten - 15 mm - mittelhart.
3-rows, especially for high-lustre polish on steel and NPM. Plastic centre. Chungking bristles of medium stiffness - 15 mm.
55 mm Ø

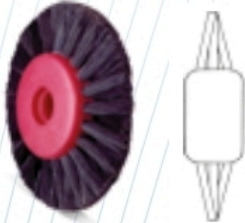

10 St./ pcs. REF 22716

Superbürste B-20


2-reihig, für Hochglanz auf Stahl. Kunststoffkern. Chungkingborsten 11 mm - hart.
2-rows, especially for high-lustre polish on steel. Plastic centre. Chungking bristles 11 mm - hard.
55 mm Ø



12 St./ pcs. REF 22706

Polierbürste/ Polishing Brush


2-reihig, universell anwendbar. Kunststoffkern. Chungkingborsten - mittelhart.
2-rows, of universal use. Plastic centre. Chungking bristles - of medium stiffness.

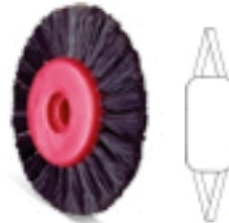

12 St./ pcs.
50 mm Ø - 13 mm REF 22708
55 mm Ø - 15 mm REF 22711

Polierbürste/ Polishing Brush

1-reihig, für Kunststoff, EM & NEM. Kunststoffkern. Chungkingborsten - 9 mm - mittelhart. Zur Politur im Papillenbereich.
1-row, for resins, PM & NPM. Plastic centre. Chungking bristles - 9 mm - of medium stiffness. For polishing in the papilla area.
45 mm Ø

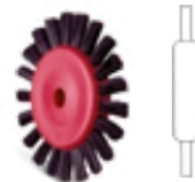

12 St./ pcs. REF 22709
120 St./ pcs. REF 22709B

Oben und Mitte: Abb. 50% von Originalgröße/ up and middle: iLL 50% of original size.

Vliesbürste/ Scotch Brush

2-reihig mit Vlieseinlage. Schonende und schnelle Politur von Kunststoff durch gleichmäßigen Andruck von Synthetikborsten und Vlies. Kunststoffkern. Besatz 20 mm.
2-rows with scotch brite insert. Fast polishing of resins. Excellent absorption of pumice - self cooling. Plastic centre. Bristles 20 mm.
80 mm Ø



1 St./ pc. REF 22677
12 St./ pcs. REF 22675

Vliesbürste/ Scotch Brush

2-reihig mit Vlieseinlage. Schonende und schnelle Politur von Kunststoff durch gleichmäßigen Andruck von Synthetikborsten und Vlies. Kunststoffkern. Besatz 15 mm.
2-rows with scotch brite insert. Fast polishing of resins. Excellent absorption of pumice - self cooling. Plastic centre. Bristles 15 mm.
55 mm Ø



1 St./ pc. REF 22678
12 St./ pcs. REF 22676

Schmalbürste/ Narrow Brush

Für Kunststoff. Metallkern mit Kunststoffzentrum. Ziegenhaar - weich. Auch zur Politur von weichbleibenden Kunststoffen. Besatz 12 mm.
For resins. Also suited for soft resins. Metal core with plastic centre. Goat hair - soft - 12 mm.
48 mm Ø



1 St./ pc. REF 21405
12 St./ pcs. REF 21405B

Schmalbürste/ Narrow Brush

Für Metall. Metallkern mit Kunststoffzentrum. Pferdehaar - mittelhart. Besatz 12 mm.
For metals. Metal core with plastic centre - bristles of medium stiffness - horse hair - 12 mm.
48 mm Ø



1 St./ pc. REF 21700
12 St./ pcs. REF 21700B

TOPDENT Kopf-Bürste »Palatinalbürste« Headbrush »Palatinal Brush«

Bürstenkopf 30 mm Ø. Mittelharte Borsten. Ideal zum Einsatz bei einem hohen Gaumendach. / Brush head 30 mm Ø. Bristles of medium stiffness. Ideal for the use in high palatal arches



L 61 mm
1 St./ pc.

REF 22712

Mini Ziegenhaar Bürste/ Mini Goat hair Brush

26 mm Ø, 1-reihig, Borsten 6 mm.
1-row, bristles 6 mm
○ max. 5.000 min⁻¹



1 St./ pc.
12 St./ pcs.

REF 22717
REF 22717B



DeltaGloss

Unser Premium-Polierschwabbel vereint höchste Qualität und Innovation – für ein brillantes Polierergebnis./ Our premium polishing buffing wheel combines the highest quality and innovation – for a brilliant polishing result.



65 mm Ø 1 St./ pc. REF **23295**
100 mm Ø 1 St./ pc. REF **23296**

Mehr auf Seite 38. / more on page 38.

Maximale Performance für Ihre Hochglanzpolitur/
Maximum performance for your high-gloss polish


- ✓ Feinste, längere Fasern – für sanfte und effiziente Politur/ Finest, longer fibres – for soft and efficient polishing
- ✓ 360 % höhere Fadendichte – für strapazierfähiges Gewebe/ 360 % higher thread density – for a dense and durable fabric
- ✓ 60 % höhere Lagenanzahl – für bessere Standzeit/ 60 % higher number of layers – for a longer service life
- ✓ Nahezu fusselfreies Polieren – für saubere Ergebnisse/ Almost lint-free polishing – for clean results
- ✓ Langlebig & wirtschaftlich – längere Nutzungsdauer und Zeitersparnis/ Durable & economical – for a longer service life and saving of time

Mehr Glanz. Mehr Effizienz. Mehr Qualität.
More Gloss. More Efficiency. More Quality.

Leinenpolierschwabbel

Linen buffing wheel

Zur Hochglanzpolitur von Kunststoff.
Kunststoffkern 40 mm Ø./ For high-lustre
polish on resins. Plastic centre 40 mm Ø.

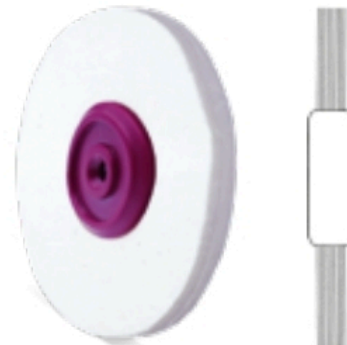

65 mm Ø 1 St./ pc. REF **23282**
100 mm Ø 1 St./ pc. REF **23285**
100 mm Ø 12 St./ pcs. REF **23285B**

Alcontura-Schwabbel

Alcontura buffing wheel

Zur Vor- und Hochglanzpolitur von Kunst-
stoffen, sowie zur Hochglanzpolitur aller
Metalle - Kunststoffkern 40 mm Ø
For pre- and high lustre polish on resins
and high lustre polish on all metals. Plastic
centre 40 mm Ø.




60 mm Ø 1 St./ pc. REF **21834**
100 mm Ø 1 St./ pc. REF **21835**

Mehr auf Seite 38. / more on page 38.

Soft-Lederschwabbel

Soft-Leather buffing wheel

Zur Hochglanzpolitur von EM. Gleichmäßige
Abnutzung. Kunststoffkern 40 mm Ø.
For high-lustre polish on PM. Plastic
centre 40 mm Ø.

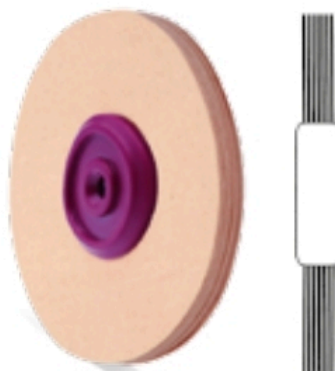


80 mm Ø 1 St./ pc. REF **21833**
100 mm Ø 1 St./ pc. REF **21832**

Flanellpolierschwabbel

Flannel buffing wheel

Für Kunststoff.
Kunststoffkern 40 mm Ø.
For resins.
Plastic centre 40 mm Ø.

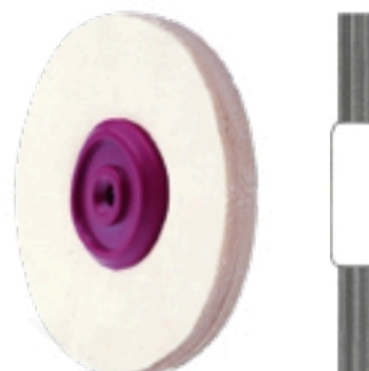


65 mm Ø 1 St./ pc. REF **23283**
100 mm Ø 1 St./ pc. REF **23284**
100 mm Ø 12 St./ pcs. REF **23284B**

Wildlederpolierschwabbel

Chamois Leather buffing wheel

Für EM.
Kunststoffkern 40 mm Ø.
For PM.
Plastic centre 40 mm Ø.

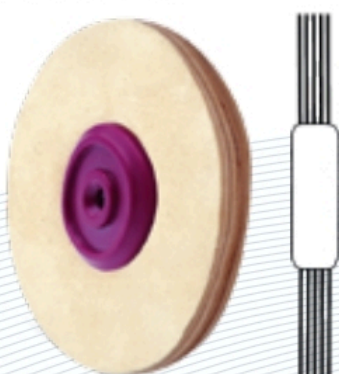


100 mm Ø 1 St./ pc. REF **23286**

Wildlederpolierschwabbel

Chamois Leather buffing wheel

Kunststoffkern 40 mm Ø. „Hammerschlag“-
Effekt. Zur Hochglanzpolitur von EM.
Plastic centre, 40 mm Ø. „Hammered“ polishing
effect. For high-lustre polish of PM.

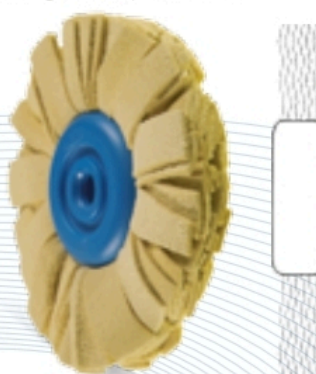

90 mm Ø 1 St./ pc. REF **23287**

Flanellpolierrad/

Flannel polishing disc

Mehrfach gesteppt - zur Hochglanzpolitur aller
Kunststoffe./
Quilted - for high-lustre polish on all resins.



80 mm Ø 3"x 30 Lagen/ layers 1 St./ pc. REF **21406**
100 mm Ø 4"x 30 Lagen/ layers REF **21407**
100 mm Ø 4"x 42 Lagen/ layers REF **21408**

Polierfilze | Felt polishers

Filzlamellenpolierer/ Lamella felt polishers

Bestens für die Hochglanzpolitur von Primärteleskopen oder Lingualbögen geeignet. Einsatz am Handstück oder Parallel-Fräsggerät möglich (evtl. Adapter erforderlich). Die einzelnen Lamellen sorgen für beste Aufnahme und Speicherung der Polierpaste. Sehr gut für längere und intensive Poliervorgänge geeignet.

Best suited for high gloss polishing of inner telescopes or lingual arches. For the use with HP or with a parallel milling machine (eventually an adapter is needed). Lamellas guarantee best uptake and retention of the polishing paste. Excellently appropriated for long and intensive polishing processes.

⌀ max. 10.000 min⁻¹
20 mm Ø

1 St./ pc. REF 23288
6 St./ pcs. REF 23288B



TOPDENT Polierfilze/ Felt polishers

Ideale Träger für Poliermittel aller Art. Effektiv - kantenstabil - wirtschaftlich. Für Keramik.

Ideal for all kind of polishing agents. Effective - edgestable - economic. For ceramics.

Schaft/ shank 2,35 mm



Kleine Flamme
small flame

⌀ max. 5.000 m⁻¹
12 St./ pcs. REF 23254



Große Flamme
large flame

⌀ max. 5.000 m⁻¹
12 St./ pcs. REF 23253



Spitze Birne
pointed pear

⌀ max. 5.000 m⁻¹
12 St./ pcs. REF 23251



Runde Birne
round pear

⌀ max. 5.000 m⁻¹
12 St./ pcs. REF 23252



Umgekehrter Kegel
inverted cone

⌀ max. 3.000 m⁻¹
6 St./ pcs. REF 23256



Linse - 21 mm Ø
lens - 21 mm Ø

⌀ max. 3.000 m⁻¹
6 St./ pcs. REF 23255

TOPDENT Filzrad/ Felt wheel

Zur Politur von Metall und Keramik. For polishing metals and ceramics.

mittel/ medium

25 x 6 mm

⌀ max. 10.000 min⁻¹



100 St./ pcs. REF 21042
50 St./ pcs. REF 21043
25 St./ pcs. REF 21044

TOPDENT Große Filzkegel/ Large Felt Cones

Zur Vorpolitur von Kunststoff in Verbindung mit Bimsstein. Bestens geeignet für den Einsatz im hohen Gaumendach.

For pre-polishing of resins in combination with pumice. Best suitable for the use in high palatal arches.

⌀ max. 10.000 min⁻¹



15 x 25 mm
12 St./ pcs.
REF 23290



20 x 35 mm
12 St./ pcs.
REF 23291



20 x 40 mm
12 St./ pcs.
REF 23292



25 x 50 mm
6 St./ pcs.
REF 23293

Nieträder | Rivet wheels



8 mm Ø REF 15550 10 mm Ø REF 15551 12 mm Ø REF 15552

Nieträder/ Rivet wheels

Zum Finieren und Adaptieren der Metallränder bei Kronen und Inlays.

For finishing and adapting metal margins of crowns and inlays.

Mandrelle | Mandrels

KKD® Snap-On-Off Träger – für **MOORE**-Scheiben
Snap-On-Off Mandrels – for **MOORE** discs

❶ für Scheiben mit Standard-Zentrum/ for discs with standard centre

HP-7 Handstück 2,35 mm

HP - handpiece

12 St./ pcs. REF 01398

TOPDENT - Mandrelle / TOPDENT - Mandrels

Tellermandrell
Mandrel for discs

Mit verstärkter Flansche/ with reinforced flange.

❷ Kopf/ head: 8 mm Ø
12 St./ pcs. REF 21807

❸ Kopf/ head: 14 mm Ø
12 St./ pcs. REF 21809

Sandpapiermandrell
Sandpaper mandrel

❹ konisch/ conical
12 St./ pcs. REF 21813

❺ zylindrisch/ cylindrical
12 St./ pcs. REF 21815

Walzen-Mandrell/ Mandrel for barrel-type polishers

❻ konisch/ conical
12 St./ pcs. REF 21805

❼ mit Mutter/ with nut thread
12 St./ pcs. REF 21803

Standard-Mandrell
Standard Mandrel

Für alle Trenn- und Polier-scheiben – verstärkt – zentriert.
For all separating- and polishing discs – reinforced – centred.

❽ Kopf/ head: 5 mm Ø
12 St./ pcs. REF 21801

❾ Kopf/ head: 8 mm Ø
12 St./ pcs. REF 07269

Polierstiftmandrell
Screw-type mandrel

Schaft/ shank 2.35 mm,
Zum Schrauben/ screw-type

❿ Mini
für 2 mm Ø Stifte/
for 2 mm Ø sticks
1 St./ pc. REF 22593

⓫ Standard
für 3 mm Ø Stifte/
for 3 mm Ø sticks
1 St./ pc. REF 22836



Syndia-Adapter

Ermöglicht den Einsatz von FG-Instrumenten im Handstück/ for the use of FG instruments in HP shank

FG-Adapter zum Stecken/ for plugging in
1 St./ pc. REF 10069

Poliermittel | Polishing agents

TOPDENT BLUESTAR® Diamant-Polierpaste Diamond-Polishing paste

Sehr abrasive und ergiebige
Diamant-Polierpaste für die Vor-
und Hochglanzpolitur von

- Zirkon
- Komposite
- Dentalkeramik
- NEM-Legierungen

Diamond polishing paste for
pre- and high gloss polishing
of

- zirconium
- composites
- dental ceramics
- NPM alloys

**Neue Dosenform zur
besseren Entnahme**
New tin for easier access

40 g REF 21035



TOPDENT Universal-Polierpaste/ Universal-Polishing Paste

TOPDENT Lux Polierpaste Lux Polishing Paste



Für alle Metalle und zur Hochglanzpolitur von Kunststoffen.
Beste Polierergebnisse./ For all metals and for high-lustre polish on
resins. Best polishing results.

ca./ approx. 1000 g, weiß/ white
REF 21292



- Schmiert nicht
- sparsam im Gebrauch
- enthält feinstes Polierpulver
- does not smear
- economic in use
- contains finest polishing powder

Zur Hochglanzpolitur von Kunststoffen ohne Strukturveränderung bei
minimalem Polierdruck. Für finierte Oberflächen von Vinyl, MMA- und
MMA-freien Kunststoffen.

For high-lustre polish on resins without structure changing with
minimum polishing pressure. For finest surfaces of Vinyl, MMA- and
MMA-free resins

ca./ approx. 500 g
REF 26127

TOPDENT Bimssteinpulver Pumice Powder

Mittlere Körnung. Das ideale
Vorpiermittel für alle Kunststoffarbeiten.
Medium grain. The ideal pre-polishing
agent for all resin works.

5 kg REF 04023
14 kg REF 04024
25 kg REF 04025



TOPDENT Hi-Finish Emulsion I

Hochglanz-Poliermittel für EM- und NEM-
Werkstücke, sowie Titan.
High gloss polishing agent for titanium-, PM-
and NPM works.

100 ml REF 21290

TOPDENT Hi-Finish Emulsion II

Hochglanz-Poliermittel für Kunststoffe aller Art.
High gloss polishing agent for all kind of resins.


100 ml REF 21390



Bohrerstände | Bur Racks

Bohrerstände/ Bur Racks

Für Praxis und Labor/ For cabinet and laboratory
Geeignet für Thermodesinfektor und Steri bis 134 °C
suitable for disinfectant and autoclavable up to 134 °C

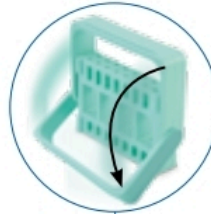


arretierbarer Sicherheitsbügel
safety bar can be locked in 3 positions


SteWaFix BurShelter „Standard“



auch für Mundspiegel geeignet
also suitable for mouth mirrors

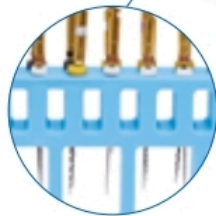


auch für Endo Nadeln geeignet
also suitable for Endo needles

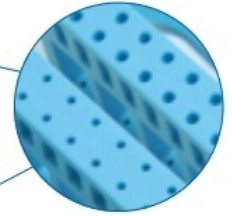

2 verschiedene Lochgrößen, geeignet für FG und HP
2 different hole sizes, suitable for FG and HP



in 3 Höhen verstellbar
height-adjustable in 3 levels

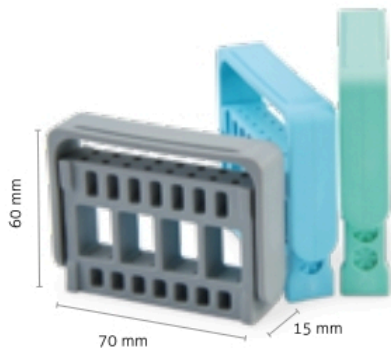

SteWaFix BurShelter „Standard“
Flexibler Bohrerstand für bis zu 16 rotierende Instrumente
Flexible bur rack for up to 16 rotating instruments

blau/ blue
grün/ green
grau/ grey


REF 44060
REF 44061
REF 44062



SteWaFix BurShelter „Junior“
Kleiner, robuster Bohrerstand für bis zu 9 FG Instrumente
Small and sturdy rack for up to 9 FG instruments

blau/ blue
grün/ green
grau/ grey

REF 44080
REF 44081
REF 44082

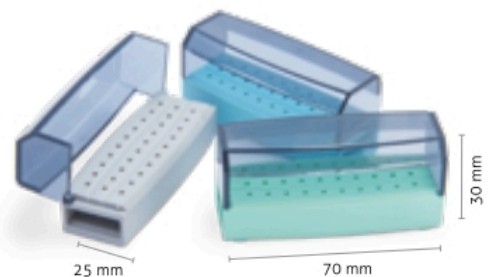


SteWaFix BurShelter „Cover“
Bohrerstand mit schwenkbarem, transparentem Deckel für bis zu 30 FG Instrumente
Bur rack with pivoted, transparent cover for up to 30 FG instruments

blau/ blue
grün/ green
grau/ grey

REF 44070
REF 44071
REF 44072

Alle Bohrerstände werden unbestückt geliefert! / All bur racks are delivered unfurnished!

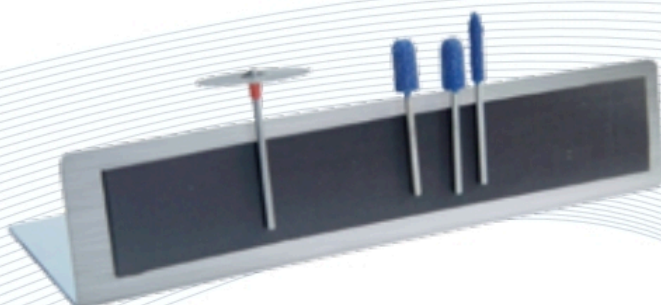

Magnetständer/ Magnetic Bur Stand

Magnethalter zur Ablage von montierten Polierern und Polierbürsten
Aus rostfreiem Edelstahl mit Magnetleiste - unbestückt.
Made of stainless steel with one magnetic rail - unfurnished.

200 x 45 x 65 mm REF 22741

Schutzbrillen | Safety glasses

KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „SUPER-FLEX CLICK“ Anti-Fog protection glasses



- modernes Design
- kratzfest
- beschlagfrei
- extrem flexibel

- modern design
- scratch resistant
- fog-free
- extremely flexible

CE EN 166



mit einzigartigem bruchstabilem
Nylon-Scharnier-System, komplett metallfrei.
With unique, break resistant nylon
Clic system, completely metal-free

KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „NEW STYLE“ Anti-Fog protection glasses

CE EN 166

Schutzbrille in modernem Design, farblose, beschlagfreie Polycarbonatscheibe mit UV-Schutz 400. Extrem leicht – 25 Gramm. Optische Güteklasse 1.
Safety glasses in modern design, clear fog-free polycarbonate lens with UV-filter 400.
Very lightweight – 25 grams. Optical quality class 1.

blau-grau/ blue-grey
REF 11770

grün/ green
REF 11771



rot/ red
REF 11772

transparent - rot/ clear - red
REF 44221



Information KKD
Schutzbrillen
Information KKD
protection glasses:

Bitte beachten:
Desinfektion nur
mit alkoholfreien
Desinfektionsmitteln.
Bitte Packungsbeilage
beachten! Please note:
disinfection only with
alcohol-free disinfectant!
Please read enclosed
package leaflet!



Schutzbrille aus Polycarbonat, auch geeignet für Korrekturbrillenträger. Mit Seiten- und Augenbrauenschutz. Optische Güteklasse 1.
Safety glasses made of polycarbonate, also convenient for wearer of corrective glasses. With side- and eyebrow protection.
Optical quality class 1.



KKD® Antibeschlag-Gel/ KKD® Anti-fog gel

Zur Erhöhung und Erhaltung des Beschlagschutzes bei Korrektur- und Anti-fog Schutzbrillen nach der Desinfektion. Für Glas, Plastik, Visiere, Lupen etc.
For increasing and maintaining the anti-fog coating of corrective- and Anti-fog protection glasses. For glass, plastics, visors, magnifiers etc.

25 ml

REF 00775



weiß/ white
REF 11780



blau/ blue
REF 11781



purpur/ purple
REF 11783



klar/ clear
REF 11785



rot/ red
REF 11782



Information KKD Schutzbrillen
Information KKD protection glasses:
Bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien Desinfektionsmitteln.
Bitte Packungsbeilage beachten!
Please note: disinfection only with alcohol-free disinfectant! Please read enclosed package leaflet!

KKD® Anti-Fog Polymerisationslicht-Schutzbrillen
UV-polymerisation light-protection glasses

Reduktion der UV-Strahlen zu 100 % und Ausfiltrierung des Blaulichtanteils zu 98 %.
UV-radiations are filtered out up to 100 % and blue light up to 98 %.

CE EN 166

KKD® Anti-Fog UV-Schutzbrille „NEW STYLE“
UV-protection glasses



REF 11775

KKD® Retina Anti-Fog UV-Schutzbrille „UNIVERSAL“
UV-protection glasses



REF 11786

Augen- und Gesichtsschutz
Eye- and face protection



Pkg. mit 10 Bügeln farbig sortiert und 10 Folien / pkg. with 10 frames
assorted and 10 foils

- ultraleicht/ ultra lightweight
- angenehm zu tragen/ comfortable wearing
- wiederverwendbar/ reusable

REF 11760

Pkg. mit blauem Bügel & 6 Schutzschilde / pkg. with blue frame
and 6 shields

- ultraleicht/ ultra lightweight
- kratzfest/ scratch-resistant
- optimaler Schutz für Augen, Nase, Mund/ optimal protection for
eyes, nose and mouth

REF 11765

6 Schutzschilde
6 shields

REF 11766

Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur
Technology for dental perfection – inspired by nature

astron® Spezial Kunststoffe – made in USA		Reliance DuraLay	
astron® special resins – made in USA	50-56	Reliance DuraLay	57
CLEARsplint® Discs		Sonderkunststoffe	
CLEARsplint® Discs	55	Special resins	58
astron® DuraClean ² ™ & Zubehör		Drucktopf	
astron® DuraClean ² ™ & Accessories	56	Pressure pot	59
		Ultraschall-Reinigungskonzentrate	
		Ultrasonic cleaning agents	60
		Zahnfächersieb	
		Tooth sieve	60
		Silikon Knetmassen	
		Silicone Impression Materials	61
		Zubehör für die Metallverarbeitung	
		Accessories for metal working	62





CLEAR & COMFORTABLE SMILES WHILE YOU SLEEP...

Mehr als 50 Jahre im Dienste „des Lächelns“!

Seit 1967 produziert die Firma Astron (mit Sitz in Lake Zurich/ Chicago, Illinois) MMA-freie Kunststoffe und wurde weltweit, nicht zuletzt durch ihren Vinylkunststoff Luxene, für unerreichte Qualität und hervorragenden Tragekomfort bei Zahntechnikern, Zahnärzten und Patienten bekannt. In Europa werden diese Produkte (CLEARsplint®, Clearsplint® CAD/CAM Pro, Labtec Pro) seit Januar 1995 durch uns, die Kentzler-Kaschner Dental GmbH, exklusiv vertrieben.

Durch produktive Zusammenarbeit unserer beider Firmen und konsequenter Weiterentwicklung sind die Astron Kunststoffe neben der Verarbeitung als Gießkunststoff oder mit der Stopf-Press-Technik mittlerweile auch als Refill Material (Clearsplint® CAD/CAM Pro) und CLEARsplint® ebenso als Fräsrunde (The Original CLEARsplint® Disc) erhältlich.

Als exklusiver EU-Repräsentant der Firma Astron beraten wir Sie kompetent und ausführlich zu allen Fragen, die in Zusammenhang mit den Kunststoffen auftreten können. Auch ist zu Ihrer Unterstützung umfangreiches Informationsmaterial erhältlich. Selbstverständlich entsprechen alle auf dem europäischen Markt erhältlichen Kunststoffe den aktuellen Anforderungen für Medizinprodukte der Klasse IIa und sind nach Richtlinie G3/42/EEC MDD zertifiziert.

For over 50 years innovations to help make smiles!

Since 1967 the astron Dental Corporation (located in Lake Zurich/ Chicago, Illinois) manufactures MMA-free materials and became worldwide known, not least because of its vinyl Luxene, by unrivalled quality and outstanding wearing comfort among dental technicians, dentists and patients. In Europe, since January 1995, these products (CLEARsplint®, Clearsplint® CAD/CAM Pro, Labtec Pro) are exclusively distributed by us, the Kentzler-Kaschner Dental company.

Due to productive cooperation between our two companies and consistent development nowadays, besides processing by pouring technique or press packing, the astron materials are also available as refill material (Clearsplint® CAD/CAM Pro) and CLEARsplint® also as milling blank (The Original CLEARsplint® Disc).

We, as exclusive EU representative of the astron Dental Corporation, advise you professionally and in detail on all questions arising in connection with the materials. In addition, for your support, comprehensive information materials are available.

It goes without saying that all MMA-free materials available on the European market fulfill the current requirements for medical devices of class IIa and are ISO and CE certified.



CLEARsplint®

MMA-freier Spezialkunststoff mit thermoaktiver Flexibilität Special resin, free of MMA, with thermoactive flexibility



Die Vorteile des CLEARsplint®-Kunststoffes sind seine einzigartige thermoaktive Flexibilität, die extreme Belastbarkeit und das Rückstellvermögen des Materials bei Wärmezufuhr. Durch die Mundtemperatur bleibt der Kunststoff stets geschmeidig und passt sich wunderbar an, ohne dabei an Festigkeit zu verlieren.


The advantages of the CLEARsplint® resin are its unique thermoactive flexibility, the extreme break-resistance and the resilience of the material when warmed up. Due to the mouth temperature the resin remains flexible which provides greater, comfortable and tension-free wearing comfort. CLEARsplint® is self-adjusting.

• MMA-frei

- extrem bruchstark
- thermoaktive Flexibilität – sie ermöglicht eine präzise Anpassung
- bessere Anpassung ermöglicht höheren und spannungsfreien Tragekomfort
- kein Druckgefühl im Mund
- selbstadjustierend
- dauerhaft transparent, kein Vergilben
- einfache Polierbarkeit (wie bei Acrylkunststoff)
- schnelle und einfache Verarbeitung

• free of MMA

- extremely break-resistant
- thermoactive flexibility – provides precise adaption
- better adaption due to tension-free wearing comfort
- no feeling of pressure in the mouth
- self-adjusting
- always transparent, no yellowing
- easy to polish (like acrylic resins)
- fast and easy processing

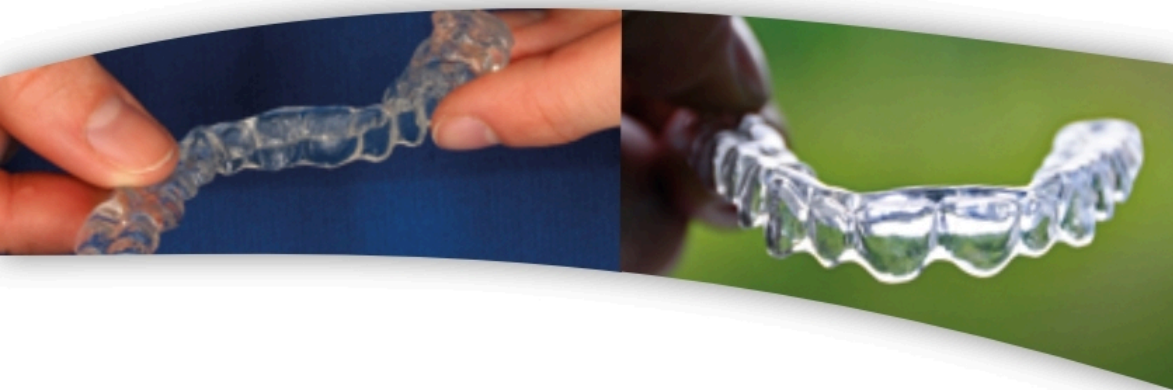

CLEARsplint®

für Komfort-Aufbissschienen | for quality nightguards and splints

Testplättchen **auf Anfrage** erhältlich
testing pads available **on request**

Lab Kit

160 g Pulver, 120 g Flüssigkeit
160 g powder, 120 g liquid

REF 26181

Economy Kit

320 g Pulver, 240 g Flüssigkeit
320 g powder, 240 g liquid

REF 26184

Super Economy Kit

960 g Pulver, 720 g (3 x 240 g) Flüssigkeit
960 g powder, 720 g (3 x 240 g) liquid

REF 26187

Einzel-/ Individuals:

Pulver/ powder 160 g
320 g
960 g

REF 26161
REF 26160
REF 26159

Flüssigkeit/ liquid 120 g
240 g
720 g (3 x 240 g)

REF 26162
REF 26163
REF 26164



**"CLEARsplint is perfect for a premium splint.
Doctors love the material and keep coming back for more."** Lee, Glidewell Laboratories

CLEARsplint®

für klare Interimsversorgungen bei Implantaten
also suited for clear interim restorations!

- MMA-frei
- lizenzfrei
- für Allergiker geeignet
- extrem bruchsticher
- thermoaktive Flexibilität
- Vermeidung hoher Gerätekosten
- leicht zu erweitern, zu reparieren und zu unterfüttern
- chemischer Verbund zu Konfektionszahn
- transparent

auch geeignet für:

- > Langzeitprovisorien
- > Zahnfleischmasken
- > Kinderprothesen



- free of MMA
- licence-free
- suitable for allergy patients
- extremely break-resistant
- thermoactive flexibility
- no high equipment costs
- easy to enlarge, repair and reline
- chemical bond with prefabricated tooth
- transparent

also suited for:

- > long-term temporary restorations
- > gingival masks
- > dentures for children



Mehr Infomaterial
finden Sie auf unserer
Homepage.
For more information
refer to our website.



Lab Kit

160 g Pulver, 120 g Flüssigkeit
160 g powder, 120 g liquid

REF 26181

Economy Kit

320 g Pulver, 240 g Flüssigkeit
320 g powder, 240 g liquid

REF 26184

Super Economy Kit

960 g Pulver, 720 g (3 x 240 g) Flüssigkeit
960 g powder, 720 g (3 x 240 g) liquid

REF 26187

Einzel-/ Individuals:

Pulver/ powder 160 g
320 g
960 g

REF 26161
REF 26160
REF 26159

Flüssigkeit/ liquid

120 g
240 g
720 g (3 x 240 g)

REF 26162
REF 26163
REF 26164

Labtec Pro

Prothesenbasismaterial für Interimsversorgungen mit natürlicher Farbgebung

Denture base material for interim restorations with natural colouring

• MMA-frei

- lizenzfrei
- für Allergiker geeignet
- extrem bruchstabil
- thermoaktive Flexibilität
- Vermeidung hoher Gerätekosten
- leicht zu erweitern, zu reparieren und zu unterfüttern
- chemischer Verbund zu Konfektionszahn
- rosa-transparent

• free of MMA

- licence-free
- suitable for allergy patients
- extremely break-resistant
- thermoactive flexibility
- no high equipment costs
- easy to enlarge, repair and reline
- chemical bond with prefabricated tooth
- pink-transparent



Passgenau, sitzt fest und schaukelt nicht
perfect fit, sits firmly and does not rock

Erweiterbar
can be enlarged

Extrem bruchstabil
extremely break-resistant

Besonders ästhetisch
particularly esthetic

Natürliche, transluzente Farbgebung mit leichter Aderung
natural, translucent coloring with slight veining

Hervorragender Saugeffekt dank abgestimmter Flexibilität bei Körpertemperatur
excellent suction effect due to thermoactive flexibility



Spannungsfreier und angenehmer Tragekomfort
tension-free and high wearing comfort

Unterfütterbar
can be repaired and relined

Chemischer Verbund zu Konfektionszähnen
chemical bond with prefabricated teeth

Gute Poliereigenschaften
excellent polishing properties

Leichte, herkömmliche Verarbeitung
easy, conventional processing

MMA frei – nicht nur für Allergiker
MMA free – suitable not only for allergy patients



Testplättchen auf Anfrage erhältlich
testing pads available on request

Economy Kit

320 g Pulver, 240 g Flüssigkeit
320 g powder, 240 g liquid

REF 262105

Super Economy Kit

960 g Pulver, 720 g (3 x 240 g) Flüssigkeit
960 g powder, 720 g (3 x 240 g) liquid

REF 262155

Einzel-/ Individuals:

Pulver/ powder 320 g
960 g

REF 26211

REF 26216

Flüssigkeit/ liquid 240 g
720 g (3 x 240 g)

REF 26212

REF 26217



CAD/CAM Refill-Basen | Refill-Bases

je 1 Metallbasisplatte, 3 Fixierklammern, 1 Auffüllblank PMMA transparent/ 1 Metal Base plate, 3 clamps, 1 filling blank PMMA transparent



Ø 98 x 20 mm, mit Schulter
with shoulder
REF 26203S


Für alle gängigen großen Fräsmaschinen
z.B. Wissner, Röders®, DATRON®, imes-icore,
vhf, Roland® auch für Sirona inLab MC X5,
Organical CAD/CAM

For all big milling units e.g. Wissner, Röders®,
DATRON®, imes-icore, vhf, Roland® auch für
Sirona inLab MC X5, Organical CAD/CAM



Ø 98 x 20 mm, ohne Schulter
without shoulder
REF 26202S

Für alle gängigen Fräsmaschinen z.B. Röders®,
Wissner, Organical CAD/CAM
For all current milling units e.g. Röders®,
Wissner, Organical CAD/CAM

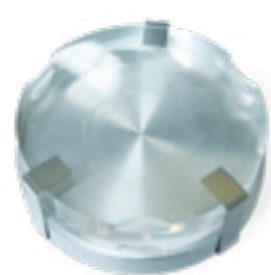


Ø 95 x 20 mm, mit 3-fach Aufnahme
with 3-point admission
REF 26201S

Für Zirkonzahn
For Zirkonzahn



Bitte beachten: Für die Verwendung
der Nachfüllbasen ist Clearsplint®
CAD/CAM Pro erforderlich (s. unten).
Please note: for the refill bases
Clearsplint® CAD/CAM Pro has to be
used (see below).

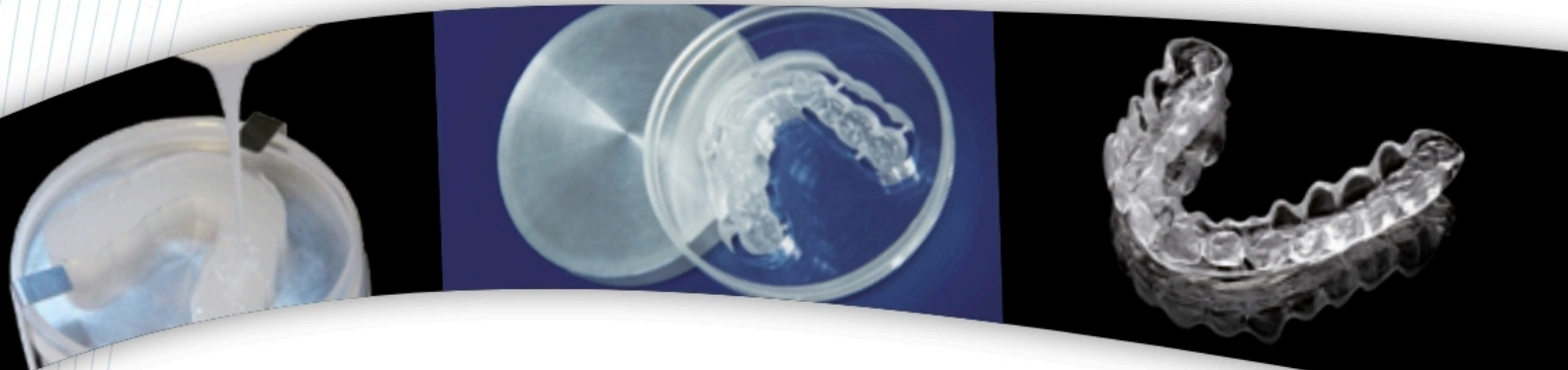

Clearsplint® CAD/CAM Pro zum Auffüllen von PMMA-Blanks for refilling of PMMA-blanks

Das Premium-Aufbissschienenmaterial speziell für die digitale
Herstellung von Aufbissschienen im CAD/CAM-Verfahren.

The premium nightguard material especially for the digital
manufacturing of functional therapeutic „comfort splints“ with the
CAD/CAM technique.

- minimaler Materialbedarf/ little material needs
- enorme Zeitersparnis/ enormous time-savings
- MMA-frei/ free of MMA



Clearsplint® CAD/CAM Pro darf nur auf Blanks aus dem Starter
Kit oder auf gerätespezifisch geeigneten transparenten Blanks
verwendet werden.

Please use Clearsplint® CAD/CAM Pro only in blanks out of the Starter
Kit or in device-specific appropriated transparent blanks.

Economy Kit

320 g Pulver, 240 g Flüssigkeit
320 g powder, 240 g liquid

REF 26195

Super Economy Kit

960 g Pulver, 720 g Flüssigkeit
960 g powder, 720 g liquid

REF 26196

Einzel-/ Individuals:

Pulver/ powder 320 g
960 g

REF 26197
REF 26198


Flüssigkeit/ liquid 240 g
720 g (3 x 240 g)

REF 26199
REF 26200

The Original CLEARsplint® Disc

- industriell gefertigte Disc aus CLEARsplint®
- kein Anmischen und Auffüllen mehr
- gleichbleibend hoher Qualitätsstandard (nahezu blasenfrei)
- enorme Zeitersparnis, Verwendung ohne zeitraubende Vorbereitung
- MMA frei

- industrially manufactured disc made of CLEARsplint®
- no mixing and filling anymore
- constantly high quality standard (almost bubble-free)
- enormous time-savings, use without time-consuming prep work
- MMA-free

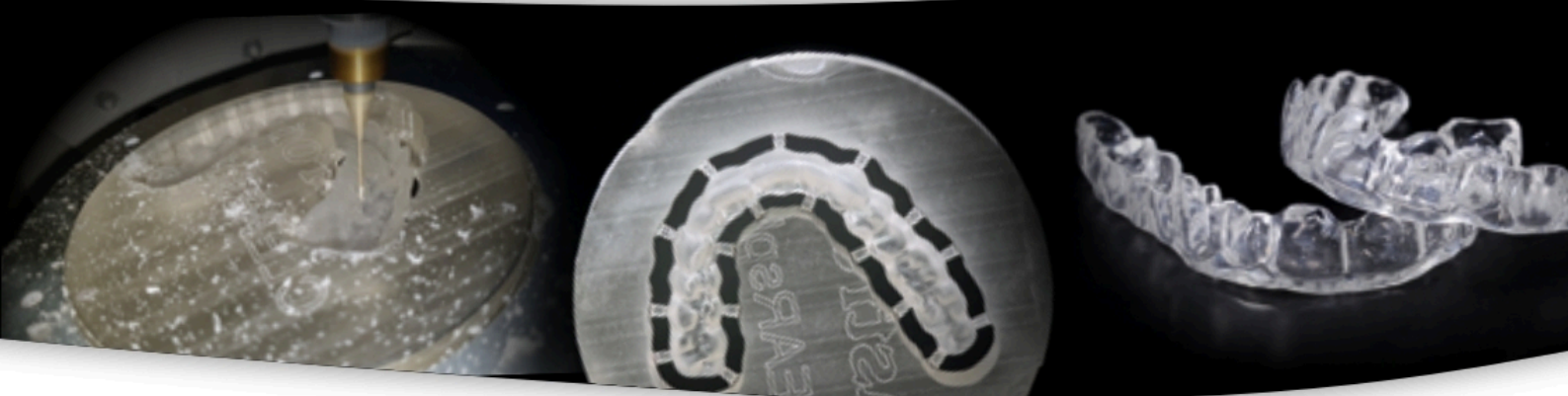

Ø 95 x 20 mm – Disc mit 3-fach Aufnahme/ Disc with 3-point admission

Für Zirkonzahn
For Zirkonzahn

1 Disc
3 Discs
12 Discs

REF 26531
REF 26541
REF 26551



Ø 98 x 20 mm – Disc mit Schulter/ Disc with shoulder

Für alle gängigen großen Fräsmaschinen z.B. Wissner, Röders®, DATRON®, imes-icore, vhf, Roland® auch für Sirona inLab MC X5, KaVo®, Wieland® Zeno Tec®, Organical CAD/CAM, Reitel®, Schütz Dental®
For all big milling units e.g. Wissner, Röders®, DATRON®, imes-icore, vhf, Roland® as well as Sirona inLab MC X5, KaVo®, Wieland® Zeno Tec®, Organical CAD/CAM, Reitel®, Schütz Dental®

1 Disc
3 Discs
12 Discs

REF 26533
REF 26543
REF 26553

Zubehör | Accessories

DuraClean²™

Spezialreiniger für CLEARsplint® Versorgungen und Labtec Kunststoffe – **vom Hersteller empfohlen!**
Special cleaning agent for CLEARsplint® nightguards and interims, as well as Labtec denture materials - recommended by the manufacturer!

Set Reinigungsmittel (170 g) mit Dose und Bürste REF 261705
Set cleaning powder (170 g) with box and brush

Reinigungsmittel/ cleaning powder 170 g REF 26171

Eco-Kit Pulver/ cleaning powder (6 Dosen) REF 261755

Reinigungsbürste/ cleaning brush REF 26172

Reinigungsdose/ cleaning box REF 26173



Aufgrund der hohen Abrasivität von Zahncremes ergibt sich bei längerem Gebrauch der negative Effekt der optischen Beeinträchtigung (Grauschleier) einer hochästhetischen klaren CLEARsplint® Premium-Aufbissschiene!

Aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. Prothesenreiniger dürfen bei CLEARsplint® Premium-Aufbissschienen prinzipiell nicht verwendet werden!

Due to the high abrasive effect of tooth pastes their permanent use may result in optical impairments (grey shadows) of your highly aesthetic transparent CLEARsplint® premium splint.

Aggressive cleaning agents, such as denture cleaners must not be used with CLEARsplint® premium splint at all.

Zubehör für astron Accessories for astron



... für CLEARsplint® und
CLEARsplint® Discs
... for CLEARsplint® and
CLEARsplint® Discs



... für CLEARsplint®
CAD/CAM Pro
... for CLEARsplint®
CAD/CAM Pro



... für Labtec Pro und
Labtec Reline
... for Labtec Pro and
Labtec Reline

Patientenpass/ Patient ID card REF M260418

REF M260414

REF M260422

Hinweiskarten/ reference cards
Pflege- und Handhabungshinweise für
den Patienten/ cleaning- and handling
instructions for the patient REF M260421

REF M260425

REF M260423



Aufbewahrungsbox für Premium-Aufbissschiene
Storing Box for Premium Splints

neutral/ without label
10 St./ pcs. REF 26189N



Keramik Anmischbecher
Ceramic mixing bowl

Sorgt bei kurzzeitiger (5- 10 Min.) Aufbewahrung im Kühlschrank für eine längere Verarbeitungszeit des Spezialkunststoffes. Kein Auslösen chemischer Bestandteile möglich!
When kept in the fridge for a short time (5-10 min.), it provides a longer processing time of the special resin. No release of chemical components.

6 cm Ø REF 26178

DuraLay Inlay Pattern Resin

DuraLay Inlay Pattern Resin härtet in ca. 5 Minuten aus und bildet ein festes, exaktes, nicht schrumpfendes Muster, das ohne Bruchgefahr, Absplittungen, Verformungen oder Temperaturschwankungen getrimmt, bearbeitet und eingesetzt werden kann.

- Detailgetreue Ränder
- Rückstandslose, saubere Verbrennung
- Härtet in nur 5 Minuten aus
- Zeitersparnis für den Anwender
- Einfache Anwendung

DuraLay Inlay Pattern Resin sets in approximately 5 minutes and forms a dense, accurate, non-shrinking pattern that can be trimmed, handled and invested without fear of breakage, chipping, distortion or temperature changes.

- Gives Sharp Margins
- Burns Out Clean
- Sets in only 5 minutes
- Saves Chair Time
- Easy to use



Reliance DuraLay Inlay Pattern Resin rot/ red

1x Pulver 56 g, 1x Flüssigkeit 60 ml/

1x powder 56 g, 1x liquid 60 ml

Pkg./ pkg.

REF 28000

Pulver 56 g/ powder 56 g

2 oz

REF 28001

Flüssigkeit 60 ml/ liquid 60 ml

2 oz

REF 28010

Dura Rely-A-Soft – Soft Denture Liner

Für Praxis und Labor

- Weichbleibendes Unterfütterungsmaterial
- MMA frei
- Perfekter Haftverbund
- Hohe Farbstabilität

For Chairside or laboratory use

- A resilient soft cushion reline
- Non-methyl methacrylate
- Creates a perfect bond



Reliance Dura Rely-A-Soft – rosa/ pink

1x Pulver, 1x Flüssigkeit à 4 oz/

1x powder, 1x liquid à 4 oz

Pkg./ pkg.

REF 28600

Pulver rosa 112 g/ powder pink 112 g

4 oz

REF 28601

Flüssigkeit 120 ml/ liquid 120 ml

4 oz

REF 28610

DuraLay Temporary Crown & Bridge

- Härtet in nur 5 Minuten aus
- Hoch belastbarer Kunststoff
- Leicht zu bearbeiten und polieren
- Minimale Schrumpfung
- Ideal für temporäre Kronen und Brücken
- Zahnfarben:
 - #62 (A2)
 - #65 (D3)
 - #69 (C2)
 - #77 (B4)

- Sets in only 5 minutes
- Strong hard acrylic
- Easy to trim and polish
- Minimal shrinkage
- Ideal for temporary crowns and bridges
- Shade:
 - #62 (A2)
 - #65 (D3)
 - #69 (C2)
 - #77 (B4)



Reliance DuraLay Temporary Crown&Bridge

4x Pulver à 56 g, 2x Flüssigkeit à 60 ml/

4x powder à 56 g, 2x liquid à 60 ml

Pkg./ pkg.

REF 28500

Pulver 56 g/ powder 56 g

#62 (A2)

2 oz

REF 28501

Pulver 56 g/ powder 56 g

#65 (D3)

2 oz

REF 28502

Pulver 56 g/ powder 56 g

#69 (C2)

2 oz

REF 28503

Pulver 56 g/ powder 56 g

#77 (B4)

2 oz

REF 28504

Flüssigkeit 60 ml/ liquid 60 ml

2 oz

REF 28510

Sonderkunststoffe | Special resins

Lichthärtender Kunststoff | Light-curing resin

TOPDENT Lux-Tray

- extrem formstabil
- minimal klebend
- einfache Verarbeitung
- lange Modellations- und Verarbeitungszeit
- vorgeformte, lichthärtende Platten
- dimensionally stable
- only slightly sticky
- easy handling
- long modelling- and processing time
- preformed, light-curing plates



Löffelmaterial, Stärke 2,2 mm
Tray material, thickness 2.2 mm

50 St./ pcs.

rosa/ pink

blau/ blue



REF 26300

REF 26100

Durch die universelle Form und gleichbleibende Stärke der TOPDENT Lux-Tray Platten von 2,2 mm eignet sich das Material zur Herstellung von Löffeln für den Ober- und Unterkiefer. Für Wachsauflagen sind Platten in rosa auch in der Stärke 1,4 mm erhältlich. Die leichte Transparenz dieser Platten lassen Anzeichnungen auf dem Modell gut erkennen und erleichtern so das Ausarbeiten. Die gleichbleibend hohe Werkstoffqualität gewährleistet eine geringe Polymerisationsschrumpfung und hervorragende Formstabilität.

The universal form and the consistent thickness of 2.2 mm allow the production of upper and lower trays. For wax set-ups pink plates are also available with a thickness of just 1.4 mm. The slight transparency provides view of markings on the model, thus facilitating the working. The consistently high material quality guarantees a low polymerisation shrinkage and excellent form stability.



Basisplatten, Stärke 1,4 mm
Base plates, thickness 1.4 mm

50 St./ pcs.

rosa/ pink

REF 26304

Okklamat Unterfütterungsgerät | Relining Unit



Für schnelle Unterfütterungen von Teil- und Totalprothesen. Für alle Polymerisationsgeräte geeignet.

For a fast relining of partial and complete dentures. Suitable for any polymerisation unit.

11 cm Ø

REF 8081010



Anwendungsfilm
ansehen!
Watch film!

TOPDENT Polypot

Elektrizitäts- und druckluftunabhängiger Polymerisationstopf aus kompaktem, thermostabilem Kunststoff mit manueller Druckerzeugung durch Wasserkompression über die Drehspindel. Zur Polymerisation aller Kaltpolymerisate bis 50 °C/122 °F.

Technische Daten

Innendurchmesser des Topfes:	ca. 100 mm
Nutzraum - Höhe:	ca. 65 mm
Gesamtgewicht (leer):	ca. 1,3 kg

Erfahrungswerte zur Polymerisation von Kaltpolymerisaten

Wassertemperatur:	50 °C (122 °F)
Druckbeaufschlagung:	2 bar (29 PSI)
Polymerisationszeit:	12-15 min.

Pressure pot made of compact, thermostable plastic, independent of compressed air. No electrical parts. The working pressure of max. 2 bar is generated manually by turning the safety screw downwards giving pressure to the lid and therefore to the water. For the polymerisation of all self-curing resins up to 50 °C/122 °F.

Technical Data

internal diameter of pot:	approx. 100 mm
height of useful space:	approx. 65 mm
gross weight:	approx. 1.3 kg

According to experiences of polymerisation	
water temperature:	50°C (122 °F)
pressure load:	2 bar (29 PSI)
Polymerisation time:	12-15 min.

Polypot mit klarem Topf komplett/ pot complete (clear)
REF 07195K

Polypot mit schwarzem Topf komplett/ pot complete (black)
REF 07195

Deckel komplett mit Manometer und Ventil/ Lid complete with manometer and valve
REF 07197

Ersatz-Behälter 1 St./ pc.

klar/ clear
REF 07196KLAR

schwarz/ black
REF 07196

Ultraschall-Reinigungskonzentrate | Ultrasonic Cleaning Agents

TOPDENT Blue Action



Sehr ergiebiges, universell verwendbares Ultraschall-Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Fetten und Ölen in Ultraschallgeräten mit und ohne Heizung.
Glanzaktivierend – nicht silikonisierend – hautschonend.
Very economical, universal ultrasonic cleaning concentrate for the removal of fat and grease in ultrasonic cleaning units with and without heating.
Self-glazing – non-silicating – non-harming to skin

(Konzentrat 1:20) 1 Liter Blue Action = 21 Liter Reinigungslösung
(concentrate 1:20) 1 litre Blue Action = 21 litres cleaning solution

1 l REF 07891
5 l REF 07892

TOPDENT Red Action



Effektives und leistungsstarkes Spezialkonzentrat für die Ultraschallreinigung im Dentallabor. Red Action entfernt Zahnstein, Raucherbeläge, Phosphatzemente und Flussmittelreste. Reinigt Gegenstände aus Edelstahl, Edelmetall, Kunststoff, Porzellan und Glas. Red Action verhält sich neutral zu Keramik (Konzentrat 1:2).
Effective and efficient special concentrate for ultrasonic cleaning in the dental laboratory. Red Action removes tartar, tobacco stains, phosphate cements and residuals of dental fluxes. Cleans objects made of stainless steel, precious metal, plastic, porcelain and glass. Does not affect ceramics (concentrate 1:2).

1 l REF 07893
5 l REF 07894


Zahnfächersieb | Tooth sieve

TOPDENT Zahnfächersieb/ Tooth sieve

- einfache und sichere Anwendung
- thermostabiler Kunststoff
- zeitsparend
- easy handling
- thermostable plastic material
- time-saving

Das TOPDENT Zahnfächersieb mit einzelnen Fächern für 14 Zähne ermöglicht das einfache Reinigen von Kunststoffzähnen mittels Dampfstrahl- oder Wachsautbrühgerät. Ein Verwechseln der Zähne ist aufgrund der Anordnung im Zahnschema nicht möglich. Durch spezielle Farbkodierung können die Siebe den einzelnen Arbeiten zugeordnet werden.

Innenmaße/ inner measurements: 105 x 80 x 50 mm

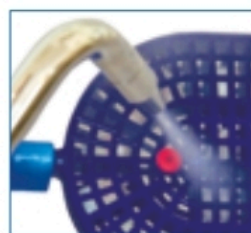

The TOPDENT tooth sieve with 14 compartments allows an easy cleaning of acrylic teeth by steam jet cleaner or wax scalding unit. With the tooth arrangement mixing teeth up is nearly eliminated. Due to the special colour codings the sieves can be easily assigned to specific works.

REF 30043

Silikon Knetmassen | Silicone Impression Materials



TOPDENT FineSil

Kondensationsvernetzende, hochviskose Silikon-Knetmasse für Laborarbeiten (Vorwälle, Isolieren etc.). Im Endzustand hohe Shore Härte (70-74). Farbe: weiss

Condensation type, high-viscous silicone impression material for laboratories. High shore hardness (70-74). Colour: white

- geschmeidige Konsistenz
- einfach zu verarbeiten
- reißfest
- dimensionsstabil
- gummielastisch
- lange lagerfähig
- smooth consistency
- easy to handle
- tear-resistant
- dimensionally stable
- rubber-elastic
- long shelf life

1,6 kg inkl. 1 Härter
incl. accelerator REF 17000S

10,0 kg ohne Härter
without accelerator REF 17004



TOPDENT YellowSil – kochfest/ can be boiled

Kondensationsvernetzendes, hochviskoses Silikonmaterial für Vorwälle. Im Endzustand hohe Shore Härte (70-74). Farbe: gelb.
Condensation type, high-viscous silicone impression material for laboratories. High shore hardness (70-74). Colour: yellow

- hitze- und feuchtigkeitsbeständig
- exakte Detailwiedergabe
- extrem hohe Dimensionsstabilität
- neutrales Verhalten zu allen Arten von Kunststoffen (Heiß- und Kaltpolymerisaten)
- problemloses Anmischen
- geschmeidige Konsistenz
- klebefrei
- lange lagerfähig
- heat- and humidity resistant
- exact detail reproduction
- dimensionally stable
- no reaction to any type of resins (self- or heat-curing)
- easy to mix and to handle
- smooth consistency
- does not stick
- long shelf life

1,6 kg inkl. 1 Härter
incl. accelerator REF 18020S

10,0 kg inkl. 7 Härter
incl. 7 accelerators REF 18022S

10,0 kg ohne Härter
without accelerator REF 18021

Pastenhärter/ paste accelerator:
35 ml rot/ red REF 18003
10 x 35 ml REF 18003B

20 ml Flüssighärter, klar
liquid accelerator, clear REF 18002



TOPDENT Mezzo-Mezzo Knetsilikon/ Kneading silicone

Additionsvernetzendes 1:1 Knetsilikon mit der Endhärte Shore A 85. Durch seine hohe Zeichnungsgenauigkeit bietet es eine präzisere Abformung und ist durch geringere Schrumpfung äußerst dimensionsstabil. Es ist kochfest, klebt nicht, ist physiologisch unbedenklich und hat hervorragende mechanische Eigenschaften. Zur Herstellung von Vorwällen, Kontrollbissen, Modellen bei Prothesenreparaturen, Ausblockungen, Isolierung von Zähnen bei Küvetteneinbettung und allen Arten von Abformungen.

Addition-curing 1:1 kneading silicone with a final shore hardness A 85. Due to its high surface impression and due to its low shrinkage it is extremely dimensionally stable. Can be boiled, does not stick, is physically harmless and possesses outstanding mechanical properties. For protection walls, control bites, models for denture repairs, block-outs, isolations and all kinds of impressions.

Farbe/ colour: blau/ blue
Lineare Maßänderung/ linear dimensional change: < 0,2%
5 kg ± 3,125 Liter

2 x 1,5 kg REF 18025S
2 x 5 kg REF 18026S
2 x 25 kg REF 18027S



extrem bruchstabil
extremely break resistant

Zubehör für die Metallverarbeitung | Accessories for metal working

Lötschutzpaste | Protective paste for soldering

Metallex Wärmestop Lötschutzpaste
Protective paste for soldering

- Sicherheit beim Löten und Schweißen für Kunststoff, Keramik, etc.
- verhindert Hitzeausdehnung **bis ca. 4000 °C**
- Verformungen und Oberflächenbeschädigungen sind ausgeschlossen
- wasserlöslich und fettfrei
- geruchsneutral, entwickelt keine Dämpfe und ist nicht gesundheitsgefährdend
- gut dosierbar
- best protection for your resins, ceramics, etc.
- prevents spread of heat up to **approx. 4000 °C**
- deformations and surface damages are eliminated
- water soluble and grease-free
- will not generate odour, nor vapour and does not endanger health
- easy to dose

250 g
grün/ green
blau/ blue

REF 21740M
REF 21740



DAS ORIGINAL!



Gussringeinlage | Muffle Liner



TOPDENT Top Liner

Asbestfrei – auf Rollen
50 mm breit, 1 mm stark.
Free of asbestos - on rolls
50 mm broad, 1 mm thick.

25 m REF 22790

Lötmasse | Soldering Material

TOPDENT LM-36 Lötmasse

Zum Einbetten der Lötstücke aus Edelmetall- und Co-Cr Legierungen.
Eine Expansion der Lötstücke ist ausgeschlossen.
For the investment of soldering workpieces made of precious metal-
and Co-Cr-alloys. No expansion of the soldering workpieces.

4,5 kg Eimer/ pail
10,0 kg Eimer/ pail

REF 04021
REF 04022

Gussringe | Casting Rings



TOPDENT Muffelringe/ Casting Rings

Aus hoch hitzebeständigem Spezialstahl.
Made of highly heat-resistant special steel.
1 St./ pc.

1er	30 mm Ø	REF 11051
3er	48 mm Ø	REF 11052
6er	65 mm Ø	REF 11053
9er	80 mm Ø	REF 11054

TOPDENT Muffel-Böden/ Muffle Bases

Aus Kunststoff, leicht zu reinigen.
Made of plastic, easy to clean.
1 St./ pc.

Universal		
(1-3-6-9)	90 mm Ø	REF 11045
1er	30 mm Ø	REF 11046
3er	48 mm Ø	REF 11047
6er	65 mm Ø	REF 11048
9er	80 mm Ø	REF 11049

Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur
Technology for dental perfection – inspired by nature



Dentalgipse

Dental stones & plasters

64-67

Modellsysteme

Model systems

68, 69

Okklusionsprüfmittel

Occlusion Indicators

70, 71

Hilfsmittel für die Modellherstellung

Auxiliaries for model preparation

72, 73

Modell- & Stumpfpräparation

Model- & die preparation

74





Dentalgipse mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften und exzellenten Expansionswerten für Modelle, die überzeugen.

Stones and plasters with excellent properties and expansion values for convincing models.

Klassifizierung nach ISO 6873.2

Klasse I: Abdruckgips

Klasse II: Modellgips (Alabaster)

Klasse III: Modellhartgips

Klasse IV: Superhartgips (niedrige Expansion)

Klasse V: Superhartgips (hohe Expansion)

classification acc. to ISO 6873.2

class I: impression plasters

class II: model plaster (alabaster)

class III: model hard stone

class IV: super-hard stone (low expansion)

class V: super-hard stone (high expansion)

Superhartgipse Klasse IV | Super-hard Stones class IV

Made
in USA

KKD® Satin-Roc - Naturgips kunststoffvergütet/ natural stone – acrylicly modified

Dünnefließender, kantenstabiler Zahnkranzgips mit hohem Stellvermögen (thixotrop) und großer Abrasionsresistenz. Detailgetreue, glatte, extrem harte Modelloberflächen. Thin-flowing, tooth model stone with high edge strength, adjustability and abrasion resistance (thixotrope). Precise detail reproduction; for extremely hard and smooth model surfaces.				Mischverhältnis: W/P 19:100 Anfangsabbinding: 7 Minuten Druckfestigkeit (nach 1 h): 49 MPa Abbindeexpansion (nach 2 h): 0,075 % mixing ratio: W/P 19:100 initial setting: 7 min compression strength (after 1 h): 49 MPa setting expansion (after 2 h): 0.075 %
	tan light			
	REF 06502		5,0 kg Karton/ carton	
	REF 06505		22,7 kg Karton/ carton	

KKD® Veradur 03 - Naturgips/ natural stone

Superhartgips mit höchster Passgenauigkeit und sehr niedriger Expansion. Die hohe Dichte, Wiedergabegenauigkeit und Kantenfestigkeit bieten beste Voraussetzungen für Stumpfmodelle und Meistermodelle in der Modellgusstechnik. Super-hard stone of highest precision and with very low expansion. The high density, exact detail reproduction, edge strength and smooth model surfaces are best conditions for model dies and master casts in the model casting technique.				Mischverhältnis: W/P 21:100 Anfangsabbinding: 11 Minuten Druckfestigkeit (nach 1 h): 44 MPa Abbindeexpansion (nach 2 h): 0,07 % mixing ratio: W/P 21:100 initial setting: 11 min compression strength (after 1 h): 44 MPa setting expansion (after 2 h): 0.07 %
	grün/ green	goldbraun/ chestnut		
	REF 06489	REF 06493	5,0 kg Karton/ carton	
	REF 06492	REF 06496	22,7 kg Karton/ carton	

KKD® Glastone - Naturgips/ natural stone

Spezialhartgips mit hervorragendem Fließvermögen und gleichzeitig guten thixotropen Eigenschaften für präzise, dauerhafte Meistermodelle mit glasharter, matter Oberfläche. Special hard stone with excellent fluidity and best setting properties for precise and durable master casts with glasshard, matt-finished surfaces.				Mischverhältnis: W/P 21:100 Anfangsabbildung: 11 Minuten Druckfestigkeit (nach 1 h): 44 MPa Abbindeexpansion (nach 2 h): 0,07 % mixing ratio: W/P 21:100 initial setting: 11 min compression strength (after 1 h): 44 MPa setting expansion (after 2 h): 0.07 %
	tan/ tan			
	REF 07310		5,0 kg Karton/ carton	
	REF 07312		22,7 kg Karton/ carton	

KKD® Master Die - Naturgips/ natural stone

Superhartgips mit geringer Abbindeexpansion und hoher Passgenauigkeit speziell zur Herstellung von Meistermodellen in der Modellguss-, Kunststofftechnik und für Kombi-Arbeiten. Auch als Sockelgips geeignet. Super-hard stone with low expansion and high fitting accuracy especially for master casts in the model casting technique and for combination works. Smooth and hard surfaces. Also suited for model basing.				Mischverhältnis: W/P 23:100 Anfangsabbildung: 11 Minuten Druckfestigkeit (nach 1 h): 38 MPa Abbindeexpansion (nach 2 h): 0,09 % mixing ratio: W/P 23:100 initial setting: 11 min compression strength (after 1 h): 38 MPa setting expansion (after 2 h): 0.09 %
	creme/ cream			
	REF 06440		5,0 kg Karton/ carton	
	REF 06446		22,7 kg Karton/ carton	

KKD® Realstone - Naturgips/ natural stone

Universeller Superhartgips mit niedrigem Expansionswert und optimalen Eigenschaften. Ideal als Sockelgips (z.B. in Verbindung mit KKD® Veradur). Universal super-hard stone with low setting expansion and optimum properties. Very suitable as base material (e.g. together with KKD® Veradur).				Mischverhältnis: W/P 25:100 Anfangsabbildung: 10 Minuten Druckfestigkeit (nach 1 h): 36 MPa Abbindeexpansion (nach 2 h): 0,10 % mixing ratio: W/P 25:100 initial setting: 10 min compression strength (after 1 h): 36 MPa setting expansion (after 2 h): 0.10 %
	canary/ canary	weiß/ white		
	REF 06542	REF 06546	5,0 kg Karton/ carton	
	REF 06545	REF 06549	22,7 kg Karton/ carton	

Spezialgipse | Special Stones



KKD® Veradur - Naturgips Klasse V/ natural stone class V

Sehr harter, leichtfließender Superhartgips mit extrem feiner Körnung für glatteste Modelloberflächen. Optimale Passgenauigkeit in der Total- sowie Teilprothetik. Very hard, easy-flowing super-hard stone with extremely fine grain for smoothest model surfaces. Optimum accuracy in the complete- and partial prosthetics.				Mischverhältnis: W/P 21:100 Anfangsabbildung: 11 Minuten Druckfestigkeit (nach 1 h): 41 MPa Abbindeexpansion (nach 2 h): 0,20 % mixing ratio: W/P 21:100 initial setting: 11 min compression strength (after 1 h): 41 MPa setting expansion (after 2 h): 0.20 %
	grün/ green			
	REF 06433		5,0 kg Karton/ carton	
	REF 06439		22,7 kg Karton/ carton	

KKD® Cal - Naturgips Klasse III/ natural stone class III

Bewährter Hartgips für Arbeits- und Studienmodelle und zum Einbetten von in Wachs aufgestellten Prothesen. Bestens geeignet für die Kunststoff-Gießtechnik. Approved dental stone for working- and study models and for flasking procedures. Best suitable for the pouring resin technique.				Mischverhältnis: W/P 30:100 Anfangsabbildung: 9 Minuten Druckfestigkeit (nach 1 h): 25 MPa Abbindeexpansion (nach 2 h): 0,13 % mixing ratio: W/P 30:100 initial setting: 9 min compression strength (after 1 h): 25 MPa setting expansion (after 2 h): 0.13 %
	gelb/ yellow			
	REF 00600		5,0 kg Karton/ carton	
	REF 00491		22,7 kg Karton/ carton	

KKD® Articulation Plaster - Naturgips Klasse II/ natural stone class II

Schnellabbindender Artikulationsgips mit ausgezeichnetem Stellvermögen (thixotrop) bei geringster Abbindeexpansion. Fast setting articulation plaster with excellent adjusting ability (thixotrope) for precise mounting in the articulator. Lowest setting expansion.				Mischverhältnis: W/P 45:100 Anfangsabbildung: 2,5 Minuten Druckfestigkeit (nach 1 h): 8 MPa Abbindeexpansion (nach 2 h): 0,13 % mixing ratio: W/P 56:100 initial setting: 2,5 min compression strength (after 1 h): 8 MPa setting expansion (after 2 h): 0.13 %
	weiß/ white			
	REF 06468		5,0 kg Karton/ carton	
	REF 06474		22,7 kg Karton/ carton	

KKD® Snow White Stone - Naturgips Klasse IV/ natural stone class IV

Superhartgips mit gutem Fließverhalten für orthodontische Arbeitsmodelle. Super-hard stone with good fluidity for orthodontic working models.				Mischverhältnis: W/P 27:100 Anfangsabbinding: 10 Minuten Druckfestigkeit (nach 1 h): 36 MPa Abbindeexpansion (nach 2 h): 0,10 % mixing ratio: W/P 27:100 initial setting: 10 min compression strength (after 1 h): 36 MPa setting expansion (after 2 h): 0.10 %
	weiß/ white			
	REF 06447		5,0 kg Karton/ carton	
	REF 06453		22,7 kg Karton/ carton	

KKD® Orthodontic Plaster - Naturgips Klasse III/ natural stone class III

Leichtfließender Hartgips für orthodontische Arbeits- und Studienmodelle mit hoher Oberflächenhärte. Easy-flowing hard stone for orthodontic working- and study models with high surface hardness.				Mischverhältnis: W/P 37:100 Anfangsabbinding: 13 Minuten Druckfestigkeit (nach 1 h): 29 MPa Abbindeexpansion (nach 2 h): 0,10 % mixing ratio: W/P 37:100 initial setting: 13 min compression strength (after 1 h): 29 MPa setting expansion (after 2 h): 0.10 %
	weiß/ white			
	REF 06461		5,0 kg Karton/ carton	
	REF 06467		22,7 kg Karton/ carton	

Dentalgipse in der Übersicht – empfohlene Anwendungsbereiche

Overview of Dental Stones and Plasters – recommended scopes of use:

	Farbe Colour	Klasse Class	Zahnkränze, Stümpfe, Sägeschnittmodelle, Metallkeramik, Meistermodelle models, dies, sawcut models, metall-ceramics, master models	Sockelung Gegenbissmodelle model basing, opposing dentition models	Kunststoffprothetik acrylic resin prosthetics	Artikulation, Verschlüsselungen articulation	KFO-Arbeiten Schaumodelle orthodontic works, demonstration models
Satin-Roc	tan light	IV	●				
Veradur 03	grün / goldbraun	IV IV	●	●			
Glastone	tan	IV	●				
Master Die	creme	IV	●	●			
Realstone	canary / weiß	IV	●	●			
Veradur	grün	V	●	●	●		
KKD® Cal	gelb	III		●	●		
Articulation Plaster	weiß	II				●	
Snow White	weiß	IV		●			●
Orthodontic Plaster	weiß	III					●

Gipsversiegelung | Plaster Sealing Agent

TOPDENT Stoneseal

Selbsthärtende Kunststofflösung zum Aufpinseln. Härtet und versiegelt Gipsflächen ohne Filmbildung.

- Schützt die Gipsflächen vor Bruch und Abrasion
- für wasserabweisende Oberflächen

Self-curing resin liquid which is painted on the stone die or model.

Hardens and seals plaster surfaces without leaving a film

- protects the plaster surface against abrasion and fracture
- for water-repellent surfaces

15 ml REF 23049
100 ml REF 23050



TOPDENT Optipin System

- Optimierte Gleit- und Friktionseigenschaften
- optimales Zusammenspiel zwischen Einführtrichter der Pinhülse und konisch verlaufendem Pinende
- Optimierung der Bohrlochgröße auf nur 1,5 mm Ø
- optimales Handling

- optimised sliding and friction properties
- optimal insertion of the conical-shaped pin into the funnel-shaped sleeve
- optimised drill-hole diameter of 1.5 mm Ø
- optimal handling

Arbeitsbox – Starter-Kit/ Working box - Starter Kit

250 St. Optipins, 250 St. Optipinhülsen,
1 St. Optipin-HM-Stufenbohrer mit 3 mm Schaft, 3 ml Schnellkleber regular
250 pcs. Optipins, 250 pcs. sleeves,
1 pc. Optipin-TC-bur with 3 mm shank,
3 ml fast-setting glue regular
REF 16000S

Nachfüllpackung/ Refill

je 1.000 St. Optipins und Optipinhülsen
ea. 1'000 pcs. Optipins and sleeves
REF 16001S



1.
Zahnkranz leicht konisch zur Basis beschleifen
model has to be trimmed slightly conically to the base



2.
Zahnkranzbohrungen mit geeignetem Pinbohr-Gerät durchführen
drill holes with an appropriate pinsetter



3.
Pins mit "Kopf-Kragen-klebung" befestigen
tapered end of the pin is placed into the hole – "glued head"




4.
Isolieren – z.B. mit TD Dry-Sep
TD Dry-Sep is best suited for isolating plaster and pins



5.
Pinhülsen mit dickerem Teil voran auf die Pins aufstecken
put sleeves on the pins in such a way that the thicker end comes close to the model

HM Stufenbohrer/ TC-Bur

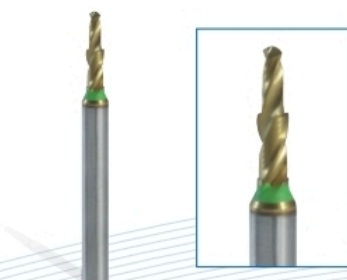

3,00 mm Schaft/ shank
REF 16002

TOPDENT Schnellkleber/ Fast-Setting glues

Cyan-Acrylat – für den gesamten Laborbereich. Klebt in Sekundenschnelle Gips, Metall, Kunststoff, Glas und Keramik.
Cyano-acrylate – of universal use in the laboratory. For bonding synthetic materials, metals, plasters, glass and ceramic in a few seconds.

Dünnflüssig: Zum Kleben, Härten und Versiegeln

Thin: for bonding, hardening and sealing

3 ml REF 22526

10 ml REF 22522

Regular: Zum Überbrücken von Toleranzen z.B. bei Pinbohrungen

Regular: for bridging gaps, e.g. pin-hole drilling

3 ml REF 22525

10 ml REF 22521



TD SPLITFIX-System



Funktionell-ästhetische Modelle erleichtern die tägliche Arbeit und sollten selbstverständlich sein. Nur auf präzisen Splitcast-Modellen kann zeitsparend und qualitativ hochwertig gearbeitet werden. Es ist sehr einfach, diesen entscheidenden Grundstein zu legen!

Functional, aesthetic models facilitate the daily work and should be a matter of course. Only split-cast models make a time-saving and excellent work possible. It is very simple to lay the foundation to perfect work!



Anwendungsbeispiel
example of use

- Modellherstellung mit Kontrollsockel in einem Arbeitsgang
- sehr niedrige Modellsockelhöhe
- hohe Präzision durch Formstabilität
- Wiederverwendbarkeit
- 1,5 cm mehr Einbauhöhe
- model-casting and split-casting in one operation
- very low model base
- high precision through form stability
- reusable
- 1.5 cm more working height



Modellherstellung mit Kontrollsockel in einem Arbeitsgang/ model-casting and split-casting in one operation:

1.



Entsprechend der Zahnkranzgröße passende SPLITFIX-Platte auswählen
acc. to model size choose the appropriate SPLITFIX plate in yellow, red or blue

2.



Platzierung der SPLITFIX-Platte auf dem Tisch des Einstellgerätes
place chosen plate onto the height adjuster

3.



Höheneinstellung bei geöffneter Manschette (2-3 mm über der Basis des Zahnkranzes)
with open collar adjust the height in such a way that the upper margin of the collar jutted out the model base by about 2-3 mm

4.



Für optimale Ergebnisse empfiehlt es sich, den Gips mind. eine Stunde lang aushärten zu lassen
for optimum results we recommend to allow the plaster to harden for about 1 hour

5.



Das Trimmen des Sockels ist nicht zwingend erforderlich – Minimierung des Expansionsrisikos
trimming of the model base is not absolutely necessary - minimisation of expansion risk

6.



Die spiegelglatte Basis des Modells
the glassy base surface of the model



Grundausrüstung/ BASE Kit

Je 2 Sockelplatten mit integriertem Magnet in rot, blau und gelb, 6 Haftplatten, je 1 Manschette in rot, blau und gelb, 1 Einstellgerät

ea. 2 base plates with integrated magnet in red, blue and yellow, 6 counter plates, ea. 1 collar in red, blue and yellow, 1 height adjuster

REF 044205



Haftplatten Counter plates



verzinkt/ zinc-coated

20 St./ pcs.

REF 04408

SPLITFIX Einstellgerät HEIGHT adjuster



Zur Höheneinstellung des Primärsockels vor dem Schließen der Manschette
for height adjusting of model base prior to closing the collar

1 St./ pc.

REF 04412

Manschetten Collars



5 St./ pcs.

rot groß/ red large
blau mittel/ blue medium
gelb klein/ yellow small

REF 04409

REF 04410

REF 04411

Sockelplatten Base Plates



mit integriertem Magnet
with integrated magnet

10 St./ pcs.

rot groß/ red large
blau mittel/ blue medium
gelb klein/ yellow small

REF 04401M

REF 04403M

REF 04405M

Okklusionsprüfmittel | Occlusion Indicators

Bright Spot II

Flüssiges Okklusionsprüfmittel (Indikator)
Liquid occlusion indicator

Zur einfachen Kenntlichmachung von Störkontakten bei schwer zu markierenden Oberflächen wie hochglanzpolierten Kroneninnenseiten und Metallflächen.

- Schichtstärke von nur ca. 7 micron
- spiegelt okklusale Störkontakte präzise wider
- wird auf die Gegen- oder benachbarte Seite aufgebracht und markiert schon beim geringsten Kontakt

Sollte nur auf trockenen Oberflächen verwendet werden. Nur auf versiegelten Gipsoberflächen verwenden um ein Eindringen der Flüssigkeit zu vermeiden und um eine einfachere Entfernung zu gewährleisten


Bright Spot rot/ red, 15 ml REF 08656

Verdünner/ thinner, 30 ml REF 08658

For easy marking of high spots on hard accessible surfaces as high-glossed polished inner surfaces of crowns or metal surfaces.

- thin film of around 7 microns
- reflects occlusal high spots very precisely
- applied to the opposing or adjacent surface it transfers a mark at the lightest touch or contact

It is best when applied to dry surfaces. Use it only on sealed stone surfaces in order to avoid material from penetrating the surface and for easier removal of the film.

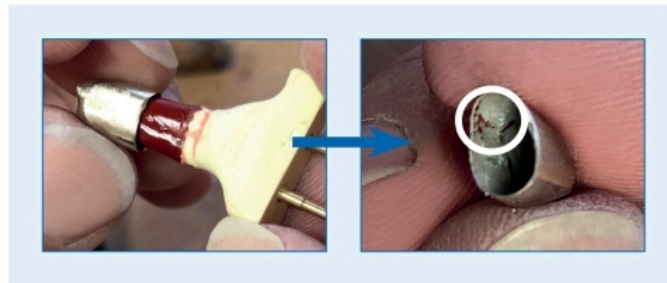

TOPDENT CAD/CAM-Spray


Pulverspray zur Verbesserung der optischen Eigenschaften von Modellen bei der Aufnahme per Scanner. Nur für die extraorale Anwendung.

Powder spray for the improvement of the optical properties of models using scanner. Only suitable in the extra-oral area.

200 ml
weiß/ white
REF 21569



ohne/ without CAD/CAM Spray

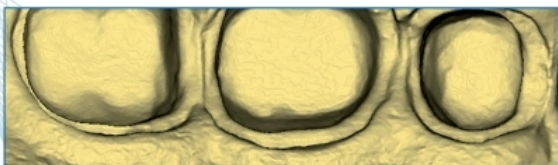

mit/ with CAD/CAM Spray



Mehr Inhalt,
gleicher Preis

TOPDENT Contact Spray Ultra 2000

- Zur Markierung der Okklusionsflächen
- zum Sichtbarmachen von Kontaktpunkten in Kronen und Brücken
- feiner Sprühnebel, leicht abwaschbar
- höchste Deckkraft bei geringem Verbrauch
- for marking occlusion areas
- for indicating contact points in crowns and bridges
- fine spray mist, easy removable
- highest covering power with low consumption

75 ml
Messingdüse
brass nozzle

grün/ green
REF 21500

75 ml
Kunststoffdüse
plastic nozzle

grün/ green
REF 21500AV

rot/ red
REF 21565



TOPDENT Contact Spray

- Extrafeiner Sprühnebel für zielgenaues Sprühen
- wirtschaftlich, günstige Verpackungseinheit
- extrafeiner Auftrag 5-7 μ Korngröße
- Extra fine spray mist for accurate spraying
- economic in use
- fine spread 5-7 μ particle size

200 ml

hellgrün/ light green
REF 21570

rot/ red
REF 21570R

weiß/ white
Weißes Spray auch als
Scanspray geeignet
also suitable as
scanspray
REF 21570W



TOPDENT Contact Spray Ultra 2000

Zur Kontrastverstärkung
bei CAD/CAM
For contrast increasing
for CAD/CAM

75 ml
weiß/ white
REF 21566



Hilfsmittel für die Modellherstellung | Auxiliaries for model preparation

Gipsmesser | Plaster knives



mit Daumenschutz und Küvettenöffner
with thumb protection and flask opener

REF 11159



mit Küvettenöffner/ with flask opener

REF 11166



mit konischem Griff/ with conical handle

REF 11167

Original Buffalo



6R mit Holzgriff/ with wooden handle

REF 21259



7R mit Holzgriff/ with wooden handle

REF 21260



6A mit Kunststoffgriff/ with plastic handle

REF 21248



7A mit Kunststoffgriff/ with plastic handle

REF 21249


Gipsschneidezange | Plaster Cutting Forceps



REF 07237

KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „NEW STYLE“ Anti-Fog protection glasses

CE EN 166

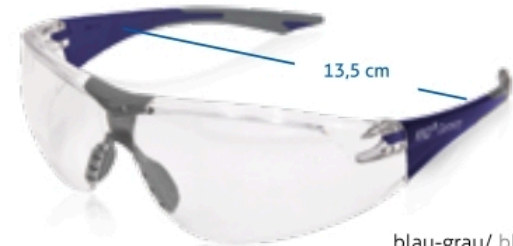

13,5 cm

blau-grau/ blue-grey
REF 11770

Mehr Schutzbrillen auf Seite 46./ protection glasses on page 46.

Anmischspateln | Mixing Spatulas



Ganzmetall - Lichtenstein
full metal (shoehorn-shaped)
- Lichtenstein

① gerade/ straight

REF 11173

② gebogen/ curved

REF 11168

③ gebogen/ curved

REF 11172

④ flexibel gebogen/ flexible curved

REF 11169

⑤ flexibel schmal/ flexible narrow

REF 11171

⑥ flexibel breit/ flexible broad

REF 11170



Abdruck-Entspannungsmittel Releasing Agent for impressions

KKD® Release Spray

Zur Entfettung, Neutralisierung und Entspannung aller Abdrücke aus Silikon oder Polysulfidmaterialien vor dem Ausgießen mit Gips oder Stumpfmodellmassen. Deutlich verbesserte Detailwiedergabe und Oberflächenbeschaffenheit des Modells. Für vereinfachtes Lösen des Abdrucks.

For degreasing, neutralising and releasing of all impressions made of silicone or polysulfide materials prior to pouring out with plaster or refractory material. For bubble-free models. For improving the detail reproduction and surface properties of the model material. For easy removing of the impression

Zerstäuberflasche/ dispenser 100 ml
Nachfüllflasche/ refill 1 l

REF 23097
REF 23098

Trennmittel | Separating Agents

TOPDENT DRY-SEP

Universelles Präzisionsisoliermittel **Gips gegen Gips** zum Aufsprühen oder Aufpinseln. Extrem dünner Isolierfilm. Flockt nicht aus. Speziell für Sägemodelle und Splitcast-Technik.

Universal, precise separating agent **plaster against plaster**. Can be sprayed or brushed on. Leaves just an extremely thin film. Does not coagulate. Especially for saw and split cast models.

Flasche mit 250 ml/ bottle with 250 ml
klar/ clear
inkl. Sprühkopf/ incl. spray nozzle
ohne Sprühkopf/ without spray nozzle

1 l Flasche/ bottle
5 l Kanister/ canister

REF 22666
REF 22669

REF 22663
REF 22664

TOPDENT Separator

Universelles Präzisionsisoliermittel **Gips gegen Kunststoff** auf Alginat-Basis zum Aufpinseln.

Für extrem saubere, glänzende und glatte Kunststoffoberflächen (Aufbisschienen, Prothesen, etc.). Auch für Gips/Gips geeignet.

Universal, precise separating agent **plaster against resin**. Can be brushed on. For extremely clean, shiny and smooth resin surfaces (splints, dentures, etc.). Also suited for plaster against plaster.

rot/ red
Flasche/ bottle

1 l

REF 26125

Silikon-Isoliermittel Silicone Isolating Agent

TOPDENT Isolierspray

Universelles, besonders wirksames Isoliermittel für den gesamten Laborbereich (FCKW-frei). Äußerst sparsam im Gebrauch. Enthält kein Lösungsmittel.

Universal, especially effective separating spray for manifold use in the laboratory (free of CFC). Economic in use. Does not contain solvents.



- schützt Artikulatoren und Küvetten gegen das Anhaften von Gips
- hält die Gummimatte des Rüttlers sauber
- schützt Muffelböden vor aggressiven Einbettmassen
- Protects articulators and flasks against sticking of plaster
- keeps the rubber mat of the vibrator clean
- protects muffle bases against aggressive investment materials

Spraydose/ spray can
400 ml


1 St./ pc.
12 St./ pcs.

REF 22665
REF 22665B



Modell- & Stumpfpräparation | Model- & die preparation

Oberflächenindikator | Surface indicator

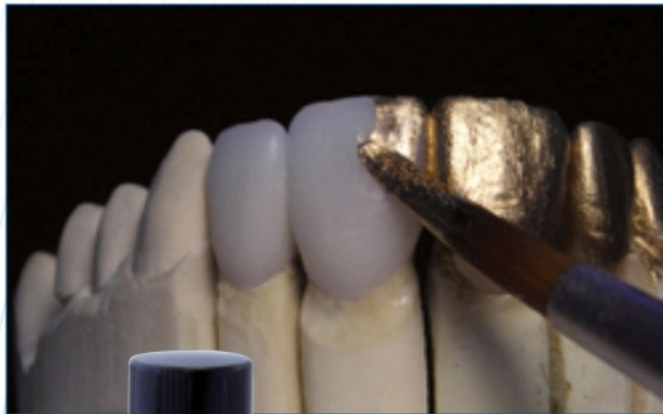

Contour™ Powder Liquid Gold

Zur optischen Kenntlichmachung der Oberfläche von Zähnen auf dem Gipsmodell und/oder Keramikrestauration, um Farbe, Form und Lichtbrechung des vorhandenen Zahnes auf den Zahnersatz naturgetreu zu imitieren.

- Schnelles Sichtbarmachen von Oberflächenungenauigkeiten
- trocknet schnell und ist leicht wieder abzdampfen
- optimale Möglichkeit um natürliche und schöne Keramikrestaurationen herzustellen

For optical indication of the teeth surface on plaster models and/or ceramic restorations in order to create a true-to-nature reproduction of form, colour and refraction of the existing tooth

- to see imperfections and irregularities very quickly
- dries quickly and can be easily removed using water / steam
- for highly natural and more beautiful restorations after glazing

Contour™ Powder Liquid Gold, 12 ml
Verdünner/ thinner, 12 ml

REF 08575
REF 08574

Stumpfplatte | Die Spacer

TRU-FIT Gold & Silber

Schnellhärtender Stumpfüberzugslack.

- Hart und abriebfest
- genau kontrollierbare Applikation
- feine, gleichmäßige Schichtstärken. Mit 2 Schichten wird ein optimaler Platzhalter geschaffen. Schichten jeweils 30 Sek. trocknen lassen

Fast setting die spacer.

- Hard and abrasion resistant
- controllable application
- fine, uniform layers. 2 layers provide an optimal space maintainer. Allow each layer to dry for 30 sec.

TRU-FIT – einzeln/ individuals

15 ml	silber/ silver	gold	Verdünner/ thinner
30 ml	REF 08560	REF 08557	–
			REF 08563

2-Farben-Sortiment: je 15 ml gold + silber und 30 ml Verdünner
2-colours-assortment: ea. 15 ml gold + silver and 30 ml thinner
REF 08556S



Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur Technology for dental perfection – inspired by nature

Wachse, Wachsprofile & Zubehör

Waxes, wax patterns & accessories

76-80

Materialien und Instrumente für

Keramik- & Kunststoffverblendtechnik

Materials and instruments for the ceramic- and
acrylic veneer technique

81, 82

Pinzel

Brushes

83-85

Studienmodell

Study model

86

Ausbildungssortiment

Set for beginners

87

Pinzetten, Scheren & Laborinstrumente

Tweezers, scissors & laboratory
instruments

87, 88

Techniker- & Teleskopzangen

Laboratory- & telescope pliers


89-90



Wachse | Waxes

TOPDENT Fräs- und Modellierwachs – mittelhart Milling- and Modelling wax – medium hard

Durch die außerordentlichen Schab- und Fräseigenschaften kann dieses Wachs mit rotierenden Spezialinstrumenten leicht bearbeitet werden.
Due to its excellent carving and milling properties this wax can be easily milled using a special rotating instrument.

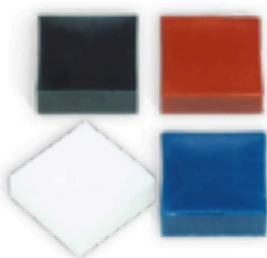

- Erhöhter Erstarrungspunkt (67 °C) für größere Beanspruchbarkeit beim Fräsen
- leicht zu bearbeiten und aufzutragen
- sehr fein modellierbar
- gute Randschlussbildung
- high solidification point (67 °C) for better working properties during milling
- easy to work and to apply
- for very fine modelling
- leaves no marginal gap

4 x 50 g Blöcke/ blocks

weiß/ white REF 25255

grün/ green REF 25254

Set/ assortment REF 25257

rot/ red

REF 25256

blau/ blue

REF 25253

TOPDENT Wachsdraht/ Wax wire

Runder, mittelharter Wachsdraht auf Rollen.
Round, medium hard wax wire on rolls.



blau/ blue - 250 g

2,0 mm Ø REF 21280

2,5 mm Ø REF 21301

3,0 mm Ø REF 21302

3,5 mm Ø

REF 21281

4,0 mm Ø

REF 21303

5,0 mm Ø

REF 21304

Wachsdraht in Stangen/ wax wire in bars

25 g - 1,0 mm Ø REF 21300




Lochretentionen/ Perforated retainers

zur Modellation des Retentionsteiles von UK und OK Modellgussbasen. Selbsthaftend, adaptierfähig. Rot
For the modelling of the retention part of upper and lower jaw model casting bases. Self-adhesive, very easily adapted. Red

25 Stege/ bars REF 25252

Modellierwache in Platten für die Prothetik Modelling Waxes in Plates for Prosthetics

Für partielle und totale Prothesen.
For partial and complete dentures.

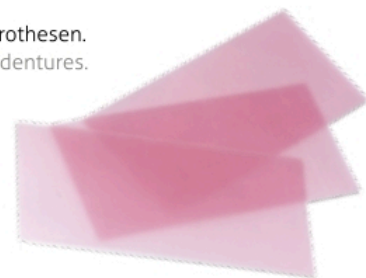

- Einfach ohne Verziehen zu schneiden
- sehr leicht modellierbar, da zäh aber nicht spröde
- hervorragendes Rückstellvermögen
- gute Haftung ohne zu kleben
- geringste Schrumpfung
- easy to cut without smearing
- easy modelling – tough but not brittle
- dimensionally stable
- good adhesive properties without sticking
- lowest shrinkage

SHURWax, rosa/ pink

Winterwachs hart
winter wax hard

150 x 75 x 1,5 mm

450 g REF 06401

2.300 g REF 06402

Sommerwachs extrahart
summer wax x-hard

175 x 80 x 1,5 mm

500 g REF 06403

2.500 g REF 06404

KKD® LabWax

Universelles Basisplattenwachs
mit hohem Härtegrad.

Universal-purpose base plate
wax of high hardness degree.

150 x 75 x 1,5 mm
hellrosa/ light pink


450 g REF 06407

2.300 g REF 06408

KKD® Utility Wax Strips

Selbsthaftendes Boxing Wachs in runden oder eckigen Stangen für alle Abformmaterialien geeignet.

Self-adhesive boxing wax in round or angular bars. Suitable for all impression materials.

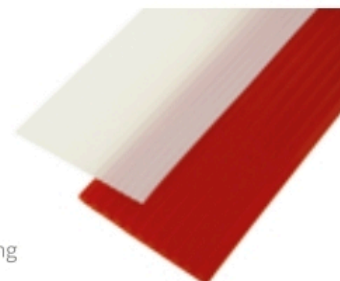

280 mm lang/ 280 mm long

runde Stangen/ round bars

weiß/ white 4,8 mm

60 St./ pcs. REF 06419

weiß/ white 1,6 mm

95 St./ pcs. REF 06420

rot/ red 4,8 mm

60 St./ pcs. REF 06421

rot/ red 1,6 mm

95 St./ pcs. REF 06422

eckige Stangen/ square bars

weiß/ white 4,8 mm

55 St./ pcs. REF 06423

rot/ red 4,8 mm

55 St./ pcs. REF 06424

Wachprofile für den Modellguss/ Wax Patterns for Model Castings


- Vorgeformt, selbsthaftend, adaptierfähig.
- Pre-formed, self-adhesive, very easily adaptable.

Retentionsklammern, 10 Tafeln à 8 Stege
Retention clasps, 10 sheets à 8 bars




KR1
REF 25248


Netzretentionen rot, 20 Tafeln
Retention grids, red, 20 sheets

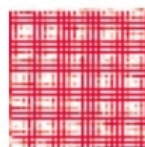

RN1 grob/ coarse
REF 25249

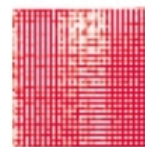

RN2 fein/ fine
REF 25251

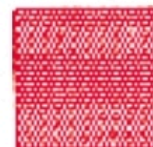

RN3 Lochform
REF 25250

Klammerprofile grün, 10 Tafeln à 20 Klammern
Retention clasps green, 10 sheets à 20 clasps

Ringklammern
ring clasps



RK
REF 25242



RKG
REF 25245

Molarenklammern
molar clasps



MK
REF 25247

Prämolarenklammern
premolar clasps



PK
REF 25244

Bonyhardklammern
Bonyhard clasps



TK1
REF 25243



TK2
REF 25246

Wachspinsel | Wax brushes

TOPDENT Glättungspinsel/ Smoothing Brush

- Für Wachsmodektionen
- feinste Spezialborsten
- For smoothing occlusal wax surfaces
- finest nylon bristles

hart/ hard

REF 21356



TOPDENT Radierinstrument | Carving instrument

Scharfes, lanzenförmiges Instrument mit auswechselbarer Klinge.
Gut geeignet bei der Arbeitsvorbereitung für Modellgussarbeiten.

Sharp, lance-shaped instrument with interchangeable blade. Best suitable for the preparation of model casting works. REF 22670

6 Klingen/ blades

REF 22671



TOPDENT Wachs Modellierinstrumente | Wax Modelling Instruments

TOPDENT LeCron Modellierinstrumente/ LeCron Modelling instruments



klein/ small 12 cm

REF 21841



groß/ big 16 cm

REF 21840

TOPDENT Zahle Modellierinstrument/ Zahle Modelling instrument



13 cm

REF 21843

Wachs Modelliermesser | Wax Modelling Knives

Fahnenstock



klein/ small

REF 11160



groß/ big

REF 11165

nach Lessmann mit Wachsmulde/ type Lessmann with wax trough



klein/ small

REF 11161



groß/ big

REF 11164

mit löffelförmiger Wachsmulde/ with spoon-shaped wax trough



klein/ small

REF 11162



groß/ big

REF 11163

Aufwachsbesteck | Waxing-up Instruments

TOPDENT PK Thomas COLOR

PKT-1



REF 23813

Zur Positionierung von funktionellen und nicht funktionellen Höckern. Auch zur Ergänzung der Rand-, Höcker- und Dreiecksleisten.
For positioning of functional and non-functional cusps. The marginal-, cusp- and triangular ridges are also added.

PKT-2



REF 23814

Zur Beseitigung von auf der Okklusalfäche verbleibenden Hohlräumen./ For eliminating cavities remaining on the occlusal surface.

PKT-3



REF 23815

Zur Glättung von Entwicklungs- und Ergänzungsrillen./ For smoothing developmental- and supplementary grooves.

PKT-4



REF 23816

Zum Glätten der axialen Oberflächen./ For smoothing axial surfaces.

PKT-5



REF 23817

Zur Verfeinerung der Grate./ For refining the ridges.

Wachsmesser | Wax Knife

Antkoviak

Ersatzklinge/ spare blade



REF 11157

REF 11158

Brenner | Burner

Alcohol-Torch

Spiritus-Handbrenner mit Miniflamme. Zum Glätten der Oberflächen von Wachsmodellationen. Durch Druck auf die Flasche lässt sich die Flammengröße regulieren (nadelfeine Stichflamme).
Alcohol hand burner with mini flame. For smoothing surfaces of wax modellations. Flame size (needle-thin) can be regulated by pressing on the bottle.

REF 21261



KKD® Vaseline


Separator für die Kunststofftechnik. Zum Schutz der Prothesenzähne. Idealer Hautschutz (stark fettend). DAB Qualität.
Separator for the resin technique. For the protection of denture teeth. Ideal skin protection (very greasing). DAB Quality.

40 ml
REF 00740



Materialien und Instrumente für Keramik- & Kunststoffverblendtechnik Materials and instruments for the ceramic- & acrylic veneer technique

TOPDENT Inlay Pin Pro

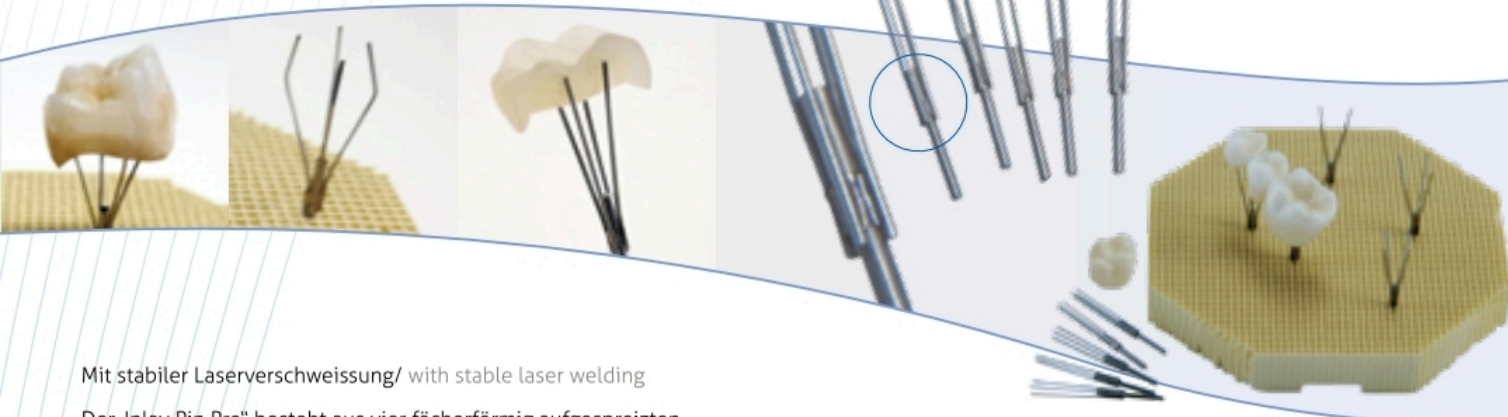

Mit stabiler Laserverschweissung/ with stable laser welding

Der „Inlay Pin Pro“ besteht aus vier fächerförmig aufgespreizten, hitzebeständigen Drähten. Die dünnen Drahtarme sind am Sockelpin angelasert und können durch einfaches Biegen auf jede Gegebenheit eingestellt werden. Die Pins wurden speziell zur Aufnahme von Vollkeramik-Inlays entwickelt, können aber genauso für Table Tops und Metallkronen verwendet werden.

The „INLAY PIN PRO“ consists of 4 fan-shaped spread, heat-resistant wires. The thin wires are laser welded onto the base pin and can be easily adapted to any position by bending. The pins are especially designed to hold full ceramic inlays, but can be also used for Table Tops and metal crowns.

5 St./ pcs.

REF 20511M

TOPDENT Brennset/ Ceramic Firing Set

Set: 1 Wabenplatte, 10 Inlay Pins Pro/
1 mesh tray, 10 Inlay Pins Pro

REF 20510MS

Wabenplatte/ mesh tray

Keramische 8-eck-Wabenplatte für vielfältige Positionierungsmöglichkeiten der Haltestifte./ Ceramic octagonal mesh tray for innumerable positioning possibilities of the supports.

1 St./ pc.

REF 20507

Zirkon Brenngutträger/ Zirconia Firing Supports

Der Zirkonbrenngutträger und die Haltestifte sind perfekt geeignet für alle Vollkeramik-Systeme. Der Brenngutträger sowie die Haltestifte sind optimal vom WAK-Wert, sodass die Expansion und Kontraktion parallel zu Kronen und Brücken verläuft. Es können keine Verunreinigungen durch schwarze Metall- oder Keramikpins entstehen.

Especially suited for all full ceramic systems. The firing base as well as the supports have an optimum CTE value, so that the expansion and contraction run parallel to crowns and bridges. No soiling because of black metal- or ceramic pins.



2 Wabenplatten, 20 Zirkonstifte/ 2 trays, 20 supports
20 Haltestifte Zirkon/ 20 supports

REF 20530S
REF 20532

Cone Pin Keramik-Brenn-Set/ Cone Pin Ceramic Firing Set

Keramische 8-eck-Wabenplatte mit Brennguthaltern aus einer hochtemperaturbeständigen Speziallegierung. In 6 verschiedenen Formen erhältlich. Zunderfrei bis 1200 °C.

Ceramic octagonal mesh tray with supports made of high temperature resistant special alloy. Available in 6 different shapes. Scale-free up to 1200 °C.



Set: 2 Wabenplatten, 1 Brenngutwatte, Brennguthalter:

4 x F1, 2 x F2, 2 x F3, 2 x F4, 1 x F5, 1 x F6

2 mesh trays, 1 firing cotton, supports:

4 x F1, 2 x F2, 2 x F3, 2 x F4, 1 x F5, 1 x F6

REF 20500S

TOPDENT Brenngutwatte Soldering Support

Aus reiner Keramikfaser.
Wärmeschutz bis 2.000 °C,
90 x 65 mm, ca. 10 mm stark

Made of pure ceramic fibre. Heat protection
up to 2.000 °C. 90 x 65 mm, approx. 10 mm thick



REF 10810

Brennguthalter einzeln – Pkg. à 5 Stück
firing supports – pkg. of 5 pcs.



F1
REF 20501



F2
20502



F3
20503



F4
20504



F5
20505



F6
20506



Keramikinstrumente | Ceramic Instruments

TOPDENT Keramik-Modellier-Instrumente „Color“/ Ceramic modelling instruments „Color“

Mit auswechselbaren, farbmarkierten Ansätzen in 2 Stärken (rot=flexibel, weiß=starr). Griffe aus Leichtmetall
with interchangeable, colour-coded blades in 2 thicknesses (red=flexible, white=rigid). Light metal handles

Set: 3 Instrumente und alle Ansätze
3 instruments and all blades

REF 11500S



Spatel/ spatula
0,1 mm rot/ red
0,2 mm weiß/ white

REF 11504
REF 11507

Griff mit Spateln/ handle with spatulas
Nr. 1 gold

REF 11501



Spitze/ point
0,1 mm rot/ red
0,2 mm weiß/ white

REF 11505
REF 11508

Griff mit Spitzen/ handle with points
Nr. 2 rot/ red

REF 11502



Messer/ knife
0,1 mm rot/ red
0,2 mm weiß/ white

REF 11506
REF 11509

Griff mit Messern/ handle with knives
Nr. 3 blau/ blue

REF 11503

TOPDENT Keramik-Dosierstäbe/ Porcelain Dosing Instruments

REF 21541

Set zur gezielt dosierten Entnahme von Keramikmassen. Dosiermengen wahlweise 30 mg, 50 mg, 80 mg, 100 mg
Set for exact dosage of porcelain materials. 4 possibilities: 30 mg, 50 mg, 80 mg, 100 mg



TOPDENT Achatspatel/ Agate spatula

Zum abriebfreien Anmischen von Keramikmassen/ for abrasion-free mixing of porcelain materials

REF 21715



TOPDENT Opaquier-Stab/ Opaque stick

Zum Auftragen von Keramik Grundmassen. Aus Glas./ For the application of ceramic base material. Made of glass

REF 21720



Pinsel | Brushes

TOPDENT Keramik-Pinsel für die Schichttechnik Ceramic brushes for the layering technique

❶ Big Brush – reines Rotmarder/Kolinsky-Haar, feine Spitze mit Gewichts-Ausgleich-Kügelchen zum Aufbau der Keramik/ Pure Red Marten/Kolinsky hair, finest tip with small balls for the building-up of the porcelain

REF 25301

❷ Touch up Brush - 4s – reines Rotmarder/Kolinsky-Haar, sehr kurz und spitz – für kleinere Korrekturen/ Pure Red Marten/Kolinsky hair, very short and pointed – for slight corrections

REF 25302

❸ Stain Brush - 00 – reines Rotmarderhaar, spitz – Malfarbenpinsel
Pure Red Marten hair, pointed – for stains

REF 25305

❹ Glazing Brush - 4f – feine Synthetik-Rotmarderhaar-Mischung, flach – zum Auftragen kleiner Mengen Glasurmasse/ Mix of fine synthetic- and Red Marten hair, flat – for the application of small amounts of glaze

REF 25303

❺ Clean up Brush - 6 – feine Synthetik-Rotmarderhaar-Mischung – trocken anzuwendender Reinigungspinsel/ Mix of fine synthetic- and Red Marten hair – cleaning brush for dry use

REF 25304

Set mit allen
5 Pinseln
set with all
5 brushes
REF 25300S



TOPDENT Keramik-Pinsel/ Ceramic brushes

- Für alle keramischen Arbeiten/ for all ceramic works
- aus bestem Naturhaar gefertigte Pinselspitzen/ tips of finest natural hair
- optimale Formgestaltung der Naturholzgriffe/ optimised shape of the natural wood handle

1100: Zum Auftragen von Keramikmassen und für Korrekturen, beste Rotmarder/Kolinsky Qualität./ For the application of porcelain materials and for corrections, best Red Marten/Kolinsky quality.

Set 1100* mit 4 Stück/ set with 4 pcs.

REF 21661S

1200: Rotmarder/Kolinsky Malfarbenpinsel/ Red Marten/Kolinsky stain brushes

Set 1200* mit 2 Stück/ set with 2 pcs.

REF 21666

1400: Flache, spatelförmige Pinselspitzen aus feinem Iltishaar zum Auftragen von Keramik- und Glasurmassen/ flat, spatula-shaped brush tips of finest polecat hair for the application of ceramic materials and glazes

Set 1400* mit 3 St./ set with 3 pcs.

REF 21668S

Set mit 9 Pinseln*
set with 9 brushes*

REF 21660S

*= im Set enthalten/
included in the set

1100 – Nr.1 1 St./ 1 pc. REF 21662

1100 – Nr.2 1 St./ 1 pc. REF 21663

1100 – Nr.3 1 St./ 1 pc. REF 21664

1100 – Nr.4 1 St./ 1 pc. REF 21665

1200
1400 – Nr.1 1 St./ 1 pc. REF 21669
1400 – Nr.2 1 St./ 1 pc. REF 21670
1400 – Nr.3 1 St./ 1 pc. REF 21671
1400 – Nr.4 2 St./ 2 pcs. REF 21666



„glaze“ #4
Synthetikflachpinsel zum großflächigen Auftragen von Glasurmassen
Synthetic hair flat brush for extensive application of glazes

REF 25325

„paint“ #5/0
Sehr dünner Kolinsky-Feinmalpinsel zum gezielten Einfärben von Fissuren, Leisten und Schmelzrissen. Der „Kreativpinsel“
Very thin Kolinsky stain brush for precise staining of fissures and enamel cracks.
The „Creative Brush“

REF 25326

„silan“ #2
Zum Auftragen von Haftvermittlerflüssigkeiten. Naturgriff zur Vermeidung von Abfärbungen
For the application of adhesives. Natural handles in order to avoid staining

REF 25329

Isolierpinsel/ Isolating brush
Weißes Ponyhaar, nahtlose Zwinge/ white pony hair, seamless clamp

REF 30041

CeraBrush – Keramik-Schichtpinsel/ Ceramic layering brush

- Hochwertige Synthetikfasern mit ausgezeichneter Elastizität/ High-quality synthetic fibres with excellent elasticity
- Optimales Feuchtigkeitsmanagement/ Optimum moisture management
- Punktgenaues Applizieren durch feine, elastische Spitzen/ Precise application thanks to finest, elastic tips



TOPDENT CeraBrush #4		TOPDENT CeraBrush #4 Ref 25370 info@kld-topdent.de made in Germany	REF 25370
TOPDENT CeraBrush #6		TOPDENT CeraBrush #6 Ref 25371 info@kld-topdent.de made in Germany	REF 25371
TOPDENT CeraBrush #8		TOPDENT CeraBrush #8 Ref 25372 info@kld-topdent.de made in Germany	REF 25372
TOPDENT CeraBrush #4		TOPDENT CeraBrush #4 Ref 25380 info@kld-topdent.de made in Germany	REF 25380
TOPDENT CeraBrush #6		TOPDENT CeraBrush #6 Ref 25381 info@kld-topdent.de made in Germany	REF 25381
TOPDENT CeraBrush #8		TOPDENT CeraBrush #8 Ref 25382 info@kld-topdent.de made in Germany	REF 25382

Modellierinstrumente für Komposite | Composite Modelling Instruments

TOPDENT Silicone Brushes - made in USA

Instrumente für die Verarbeitung von Composite-Kunststoffen wie Artglass, belleGlas und ähnlichen Kunststoffen.

- Schnellerer Aufbau von Composite-Kunststoffen
- dichte, porenfreie Restaurationen
- kein Anhaften der Materialien am Instrument
- das abschließende Glätten mit den weichen, weißen Silikonspitzen reduziert die Schleif- und Polierzeit erheblich

Silicone instruments for modelling restorative materials like Artglass, belleGlas etc.

- speed all resin build-ups
- produce dense porosity-free restorations
- materials do not stick on the instruments
- the final smoothing with the soft, white silicone tips reduces polishing time enormously



schwarz	weiß	schwarz	weiß	schwarz	schwarz	weiß	schwarz	weiß
REF 24501	REF 24511	REF 24502	REF 24512	REF 24503	REF 24504	REF 24514	REF 24505	REF 24515

Set mit 5 St./ set with 5 pcs.

schwarz / hart
black / hard

REF 24500S

weiß / weich
white / soft


REF 24510S

TOPDENT Qualitäts-Pinsel
Quality-Brushes

Für die Keramik. Lackierte Holzgriffe.
For the ceramic technique. Lacquered
wooden handles.



Hochwertige Pinsel mit **Rotmarder/Kolinsky** Naturhaar vom sibirischen Marder.
Brushes of finest natural **Red Marten/Kolinsky** hair of the Siberian Marten.

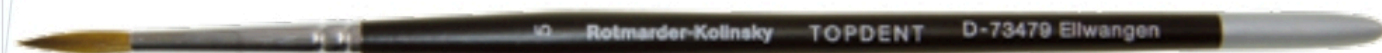


Größe/ size	00	0	1	2	3	4	5	6
REF	22946	22947	22948	22949	22950	22951	22952	22953

Hochwertige Qualitätspinsel mit feinem **Synthetikhaar**.
Brushes of finest **synthetic hair**.



Größe/ size	00	0	1	2	3	4	5	6
REF	25351	25352	25353	25354	25355	25356	25357	25358

Studienmodell | Study Model

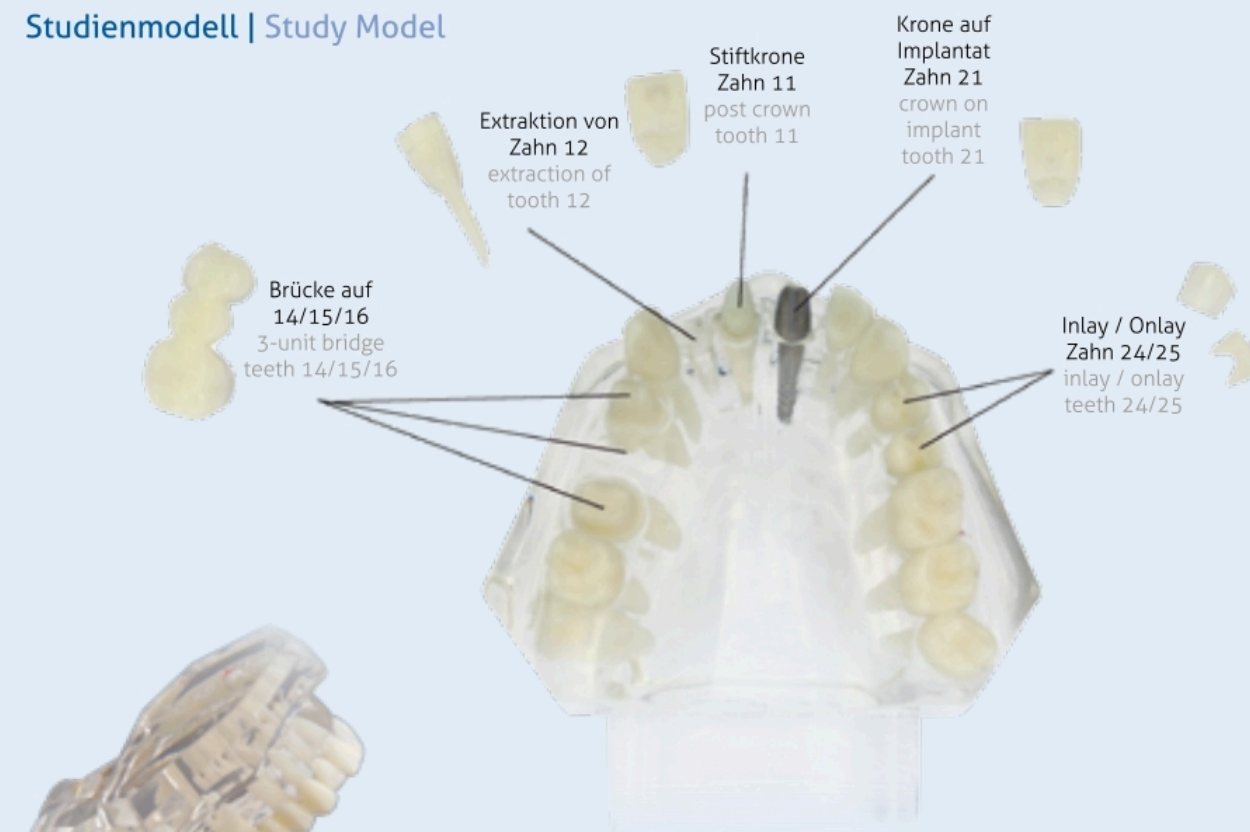


Studienmodell/ Study Model

- Hochwertiges, transparentes Schaummodell für Zahnkrankheiten
- Darstellung von Krankheitsverläufen kariöser Defekte
- Implantatarbeiten mit Aufbau: Brücken, Kronen und Inlays
- Extraktion von Zahn 12
- Pulpagangrän mit Zyste
- Zahnhalsskaries
- Weisheitszähne
- komplette Bezahnung des Ober- und Unterkiefers in einem Klipp-Artikulator

- High-quality, transparent demonstration model for dental diseases
- presentation of disease progression of carious defects
- implants: crowns, bridges and inlays
- extraction of tooth 12
- pulp gangrene with cyst
- cervical caries
- wisdom teeth
- complete dentition of upper- and lower jaw

REF 09445

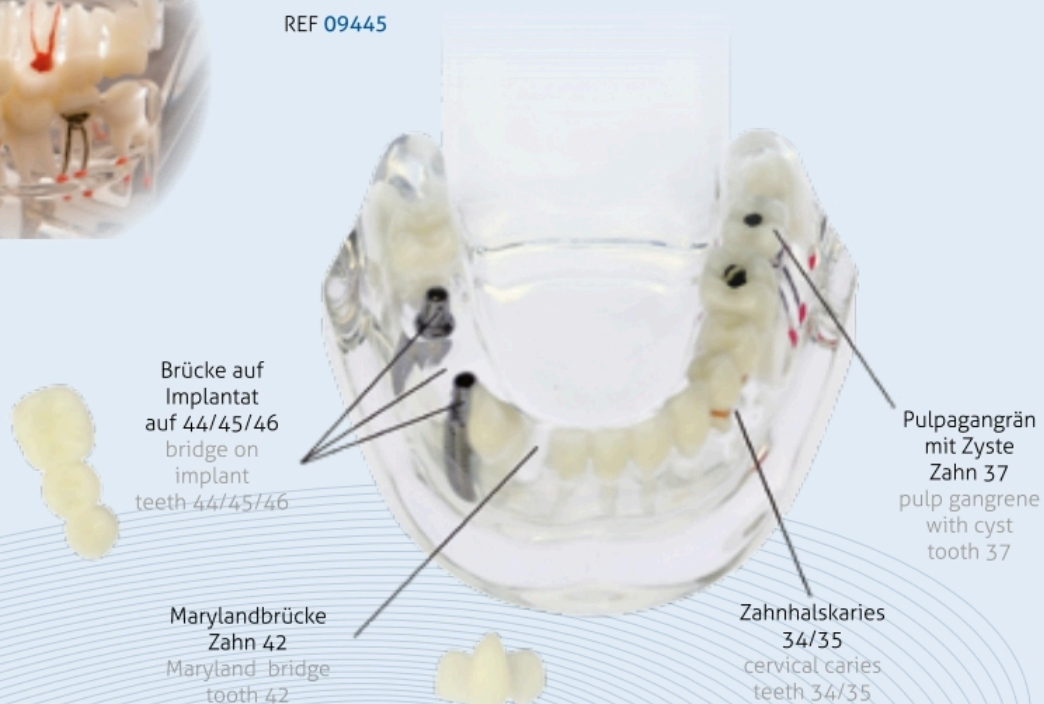

Ausbildungssortiment | Set for beginners

Der perfekte Start für Ihren Azubi in der Zahntechnik!
The perfect start for your trainee in dental technology!

Inhalt

je 1 St. Wachmodelliermesser mit löffelförmiger Wachmulde klein, Wachmodelliermesser nach Fahnenstock groß, LeCron Modellierinstrument klein und groß, Folienmesser, Folienschere gerade, Lötpinzette gebogen, **Aufwachsinstrument PKT2**, Halteklemme gebogen, Gipsmesser mit Küvettenöffner, Tasterzirkel Metall nach Iwanson, Glättungspinsel, Bleistift

contents:

ea. 1 wax modelling knife with spoon-shaped wax trough small / wax modelling knife type Fahnenstock big / LeCron modelling instrument small and big / foil knife / foil scissors straight / soldering tweezers curved / **PKT2** / hemostat curved / plaster knife with flask opener / calipers for metal type Iwanson / smoothing brush / pencil

Set komplett/ set complete
REF 111505



Pinzetten, Scheren & Laborinstrumente | Tweezers, Scissors & Laboratory Instruments

TOPDENT Folienscheren/ Foil scissors
L 11,5 cm



gerade/ straight
REF 21590



gebogen/ curved
REF 21589



KKD® Kronen- & Goldscheren/ Crown- & gold scissors
L 11 cm



gerade/ straight
REF 13067
HM-Einsatz/ TC inserts
REF 13635



HM-Einsatz/ TC inserts
REF 13634



TOPDENT Tasterzirkel/ Calipers

Nach Iwanson – beidseitig ablesbar. Rostfrei.
Type Iwanson – scale on both sides. Stainless steel.



für Metall
for metal
REF 21821



für Wachs
for wax
REF 21820



Skalpelle, Folienmesser | Scalpels, Foil Knife



Skalpeltgriff/ Scalpel handle
L ca./ approx. 12,5 cm REF **13740**



TOPDENT Folienmesser/ Foil Knife
mit auswechselbarer Klinge
with interchangeable blade
L ca./ approx. 15 cm REF **08816**
10 Klingen/ 10 blades REF **08826**

Pinzetten | Tweezers

TOPDENT College Pinzetten/ College Tweezers
mit Riefen/ with serration



gebogen, ca. 16 cm/ curved, approx. 16 cm
REF **11174**



gerade, ca. 15,5 cm/ straight, approx. 15,5 cm
REF **11175**

TOPDENT Säurepinzetten/ Acid tweezers
komplett neoprenüberzogen/ with rubber coating



gebogen, ca. 20 cm/ curved, approx. 20 cm
REF **21850**



gerade, ca. 21 cm/ straight, approx. 21 cm
REF **21851**

TOPDENT Lötpinzetten/ Soldering Tweezers



gebogen/ curved
L ca./ approx. 16,5 cm
REF **11178**



gerade/ straight
L ca./ approx. 16,5 cm
REF **11177**




mit Ablage/ with support
L ca./ approx. 17 cm
REF **11179**

TOPDENT Halteklemmen | Hemostats



L: 12 cm
gebogen/ curved REF **21595**
gerade/ straight REF **21596**

L: 9 cm
gerade/ straight REF **21598**

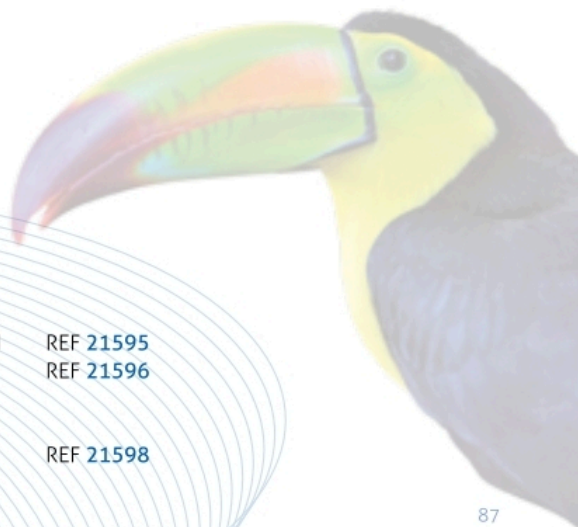

Drahtbiegezangen | Wire bending Pliers

Drahtschneider/ Wire Cutter



Einsätze aus Hartmetall. Zum einfachen Kürzen von Biegearbeiten.
Max. Drahtstärke: Ø 0,8 mm

TC inserts. For easy cutting of bending works. Max. wire thickness:
Ø 0.8 mm

L: 14 cm

REF 07236

Aderer



Zum Formen und Biegen von Klammern und kieferorthopädischen
Drähten. Max. Drahtstärke: Ø 0,7 mm

For shaping and bending of clamps and orthodontic wires. Max. wire
thickness: Ø 0.7 mm

L: 13 cm

REF 07239

Krampon/ Universal pliers



Universal Biege- und Schneidezange.

Max. Drahtstärke: Ø 0,9 mm, Schneiden max: Ø 0,7 mm

Universal bending- and cutting pliers. Max. wire thickness: Ø 0.9 mm,
for cutting max.: Ø 0.7 mm

L: 16 cm

REF 07242

Waldsachs



Halte- und Biegezange in einem. Max. Drahtstärke: Ø 1,0 mm

Holding- and bending pliers. Max wire thickness: Ø 1.0 mm

L: 15 cm

REF 07241

Flachzange/ Flat pliers



Geriffelt. Zierliche Maulspitze

Serrated. Delicate point

L: 15 cm

REF 07238

Bügelbiegezange/ Arch forming pliers




Für die Herstellung und Aktivierung von Lingual- bzw. Palatinal-
bügeln. Max. Drahtstärke: Ø 1,2 mm

For the making and activation of lingual-, resp. palatinal bows.

Max. wire thickness: Ø 1.2 mm

L: 12,5 cm

REF 07240

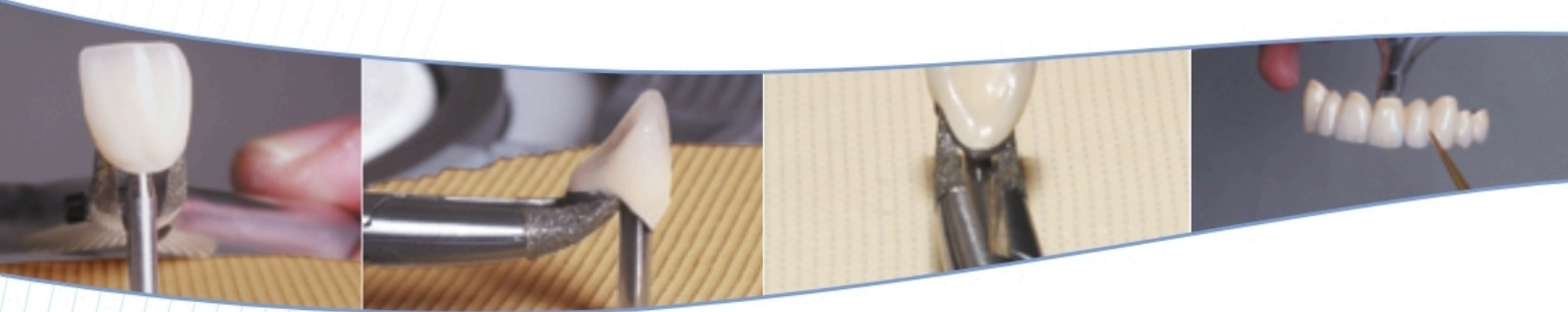


Anwendungsvideo
„How to use“ video
[www.youtube.com/
watch?v=Vw0MRtwadH4](https://www.youtube.com/watch?v=Vw0MRtwadH4)



Selbstspreizend durch
innenliegende Doppelfeder
self-expanding due to inside
double-spring

Spezialdiamantierter
Instrumentenkopf
instrument tips with
special diamond
coating

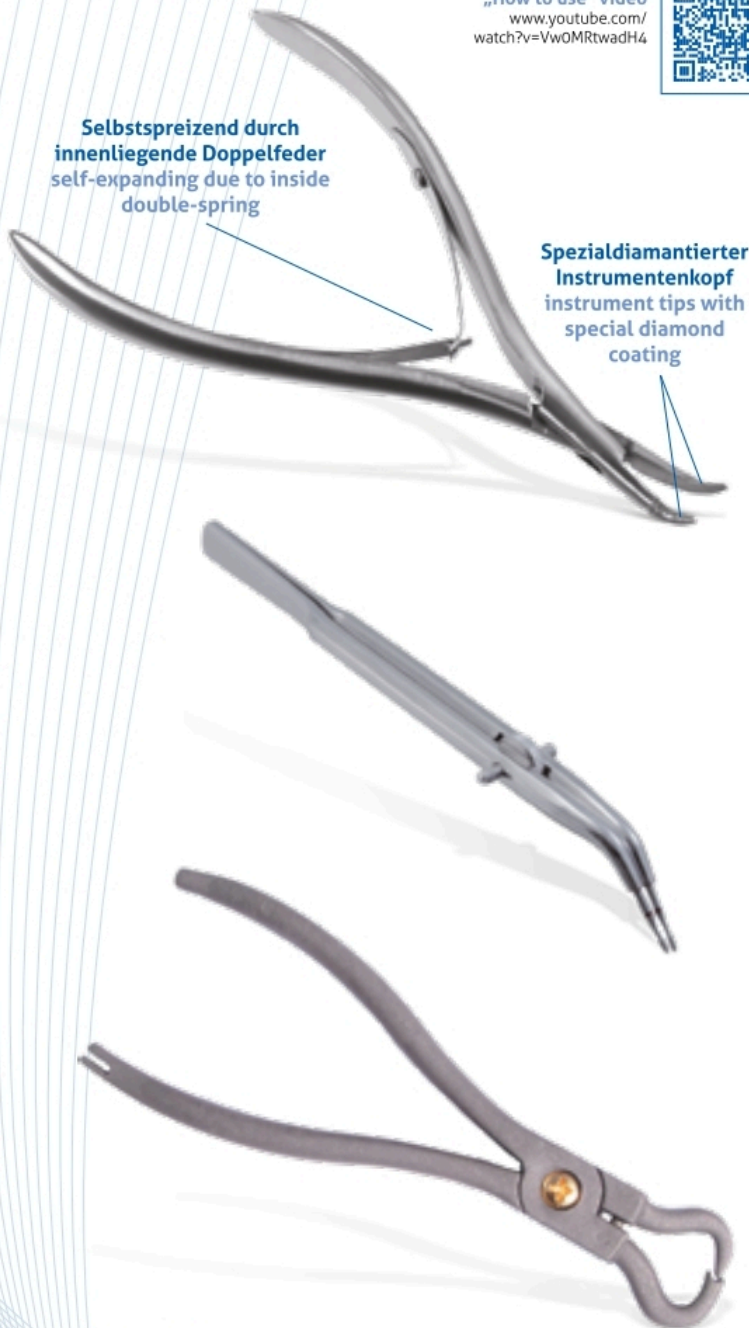

TOPDENT CrownGrip

Ideales Positionierungs-, Fixier- und Ablageinstrument für sämtliche Kronen- und Brückenarbeiten. Kronen bzw. Brücken werden ohne Schraubspannung und ohne Klemmraster nur durch den Federdruck gehalten.

- Ideales Halteinstrument zur Farbbestimmung bei der Rohbrandeinprobe
- erschütterungsfreies Ablegen von Kronen und Brücken auf dem Brenngutträger
- sicheres Fixieren von Zirkonoxidkonstruktionen



Ideal instrument for positioning and safe holding of all types of crown- and bridge works. No screw-mounting, nor clamps - just spring pressure holds crowns and bridges safely

- ideal holding instrument during colour matching
- vibration-free positioning of crowns and bridges onto firing trays
- safe fixation of zirconium oxide constructions

L ca./ approx. 13,5 cm

REF 23012

Crownny

gebogen – graziler Kronenhalter für den anspruchsvollen Keramiker – inkl. Diamanteinsätze/ curved – fine crown holder for the demanding technician – incl. diamond inserts

REF 8070004

1 Paar Diamanteinsätze/ 1 pair diamond inserts
REF 8012014

TOPDENT CrownMaster

Kronenhaltepinzette aus hochhitzebeständigem Kohlefaser-Werkstoff; Randschonend und ohne Kratzer an der Metalloberfläche zu verursachen; temperaturbeständig bis 150 °C.

Margin-protecting and no scratches on the metal surface.

Crown holder made of highly heat-resistant, fibre-glass (up to 150 °C)
L ca./ approx. 13,5 cm

REF 22396



„FLIPPER“



- Diamantierte Arbeitsspitzen: Diamantbeschichtung 126 my, Schichtstärke 15/100
- perfekte Haftkraft an den Innenteleskopen durch optimale Geometrie
- die Teleskopzangen fixieren das Primärteil fest und sicher, so dass sich das Sekundärteil problemlos abziehen lässt
- Diamond coated tips: diamond coating 126 my, coating thickness 15/100
- excellent adhesion on the inner telescopes due to its optimum geometry
- the primary crown is firmly fixed, therefore the secondary crown can be easily removed

L: ca./ approx. 13 cm



Standard
REF 13988



schmal-lang, für den
Frontzahnbereich OK/UK
small-long, for anterior
region upper/lower
REF 13988L



kurz-breit z.B. für
den Molarenbereich
short-broad e.g. for molars
REF 13988K



Zangenständer/ Pliers Shelf

„Premium“ – ohne Zangen
"Premium" – without pliers

REF 11890

KKD® ANTI-FOG SCHUTZBRILLEN „UNIVERSAL“ ANTI-FOG PROTECTION GLASSES

Schutzbrille aus Polycarbonat, auch geeignet für Korrekturbrillenträger.
Mit Seiten- und Augenbrauenschutz. Optische Güteklasse 1.
Safety glasses made of polycarbonate, also convenient for wearer of
corrective glasses. With side- and eyebrow protection.
Optical quality class 1.

CE EN 166

klar/ clear
REF 11785



weiß/ white
REF 11780



blau/ blue
REF 11781



purpur/ purple
REF 11783



rot/ red
REF 11782



Für Korrekturbrillen
bis 13,5 cm Breite
for corrective glasses
up to 13.5 cm



Information KKD Schutzbrillen:
Information KKD protection glasses:
Bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien
Desinfektionsmitteln. Bitte Packungsbeilage beachten!
Please note: disinfection only with alcohol-free
disinfectant! Please read enclosed package leaflet!

Weitere Schutzbrillen auf Seite 46-48
For more safety glasses see pages 46-48

KKD® Antibeschlag-Gel
KKD® Anti-fog gel



Zur Erhöhung und Erhaltung des Beschlagschutzes
bei Korrektur- und Anti-fog Schutzbrillen nach
der Desinfektion. Für Glas, Plastik, Visiere, Lupen
etc./ For increasing and maintaining the anti-fog
coating of corrective- and Anti-fog protection
glasses. For glass, plastics, visors, magnifiers etc.

25 ml

REF 00775

TOPDENT BLUESTAR®
DIAMANT-POLIERPASTE
DIAMOND-POLISHING PASTE

**Neue Dosenform zur
besseren Entnahme**
New tin for easier access

40 g REF 21035




Seite/ page 44

TOPDENT BRENNSET
MIT NEUEN INLAY PINS PRO
CERAMIC FIRING SET
WITH NEW INLAY PINS PRO

**Inlay Pin Pro mit stabiler
Laserverschweissung**
Inlay Pin Pro with stable
laser welding

Set: 1 Wabenplatte, 10 Inlay Pins Pro
1 mesh tray, 10 Inlay Pins Pro

REF 20510MS

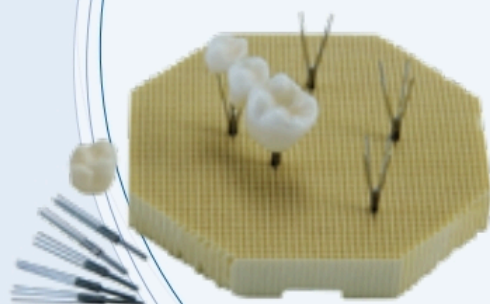

Seite/ page 80

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Kentzler-Kaschner Dental GmbH

General terms and conditions (GTC) of the Kentzler-Kaschner Dental GmbH



Die Ausgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen steht allen Geschäftsfreunden und Vertragspartnern unseres Hauses stets zur Verfügung. Alle Vertragsbeziehungen unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf die wir ausdrücklich hinweisen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache mit Hilfe folgender QR-Codes eingesehen werden:



<https://www.kkd-online.de/de/agb>

Alternativ können Sie uns auch per e-Mail oder Anruf mit der Zusendung der AGBs beauftragen.

Unsere Kontaktdaten/ Our contact details:

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
D-73479 Ellwangen/Jagst
☎ +49 (7961) 9073-0
✉ +49 (7961) 9073-15
📧 info@kkd-topdent.de

The edition of the General Terms and Conditions is always available to all business friends and contractual partners of our company. All contractual relationships are subject to our General Terms and Conditions, to which we explicitly refer.

Our General Terms and Conditions can be viewed in German and English with the help of the following QR codes:



<https://www.kkd-online.de/en/terms-and-conditions>

Alternatively, you can also request us to send you the GTCs via e-mail or phone call.



Hinweise zum Datenschutz | Data protection notes

Die Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 DSGVO finden Sie auf unserer Website www.kkd-online.de unter Datenschutz. Sollten Sie zukünftig keine Informationen oder Kataloge mehr von uns wünschen, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht an info@kkd-topdent.de oder an unsere Postadresse: KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH, Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen / Jagst

The information on the processing of your personal data in accordance with Article 13 DSGVO is available on our website at www.kkd-online.de -> „Privacy Policy“. Should you no longer wish to receive information or catalogues from us in the future, please send us a short message to info@kkd-topdent.de or our postal address: KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH, Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen / Jagst, Germany

Unsere Kataloge finden Sie stets aktuell als Blätterkataloge auf unserer Homepage

You will find our
catalogues always up to
date as flip catalogues
on our homepage

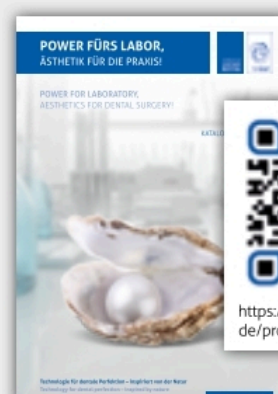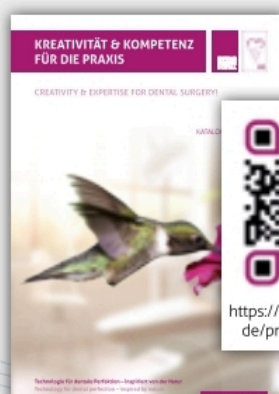

EINZIGARTIG PERFECT
UNIQUE JUST PERFECT



astron®

The Original

CLEARsplint® Disc



Exklusive in Europe
KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen / Jagst
Telefon: +49 (7961) 9073-0
www.kkd-topdent.de



Astron Dental Corp.
Lake Zurich, Ill. 60047
Made in USA

CE
1023

Seite/ page 55



Überreicht von Ihrem Dental-Fachhandel /-Depot
your dental depot

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen/Jagst

Telefon: +49 (7961) 9073-0
Fax: +49 (7961) 9073-15

e-Mail: info@kkd-topdent.de



Alle TOPDENT Produkte mit dem BLUESTAR® sind Qualitätsprodukte für den präzisionsbewussten Zahntechniker und haben produktspezifische Merkmale, die sich von handelsüblichen Standards deutlich abheben. All TOPDENT products marked with the BLUESTAR® are special quality products for the precision conscious technician and have product-specific characteristics which beat by far common standards.



QM-System nach EN ISO 9001
QM system according to EN ISO 9001

Power fürs Labor – Ästhetik für die Praxis!
Power for laboratory – aesthetics for dental surgery!